

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ



Evario

Łóżko dostosowane do wszystkich oddziałów szpitalnych

Evario

Łóżko szpitalne, które spełnia wszystkie wymagania



Łóżka muszą spełniać szeroki zakres wymagań. Zadania stawiane przed jednostkami szpitala są tak szerokie, że czasami trudno określić, który model łóżka jest odpowiedni dla danej placówki. Czy lepszym rozwiązaniem byłby model łatwiejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika, czy też bardziej opłacalny, który spełnia wszystkie potrzeby? Idealną odpowiedzią na to pytanie jest łóżko Evario firmy Stiegmeyer.

Dzięki inteligentnemu systemowi modułowemu Evario jest odpowiednim łóżkiem do wszystkich oddziałów szpitalnych. Różne opcje obsługi, systemy zabezpieczenia bocznego, koła i szczyty łączą się razem, tworząc funkcjonalne i estetyczne uniwersalne łóżko szpitalne, które spełnia indywidualne wymagania, oferując przy tym bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Łatwość obsługi łóżka Evario znacznie ułatwia personelowi codzienną pracę. Dzięki płaskiej konstrukcji oraz możliwości automatycznej dezynfekcji zapewnia doskonałą higienę, wspierając szpital w walce z czynnikami chorobotwórczymi.

Spis treści

4	Najważniejsze cechy	18	Evario w szerokiej wersji
6	Evario – idealne łóżko do każdego oddziału szpitalnego	18	Evario w długiej wersji
8	Barierki boczne ¾	19	Evario z wagą
9	Barierki boczne Protega	20	Evario za stałym zagłówkiem
10	Zintegrowany panel sterowania	21	Opłacalne korzyści
11	Pilot podręczny LCD	22	Niezawodna higiena
12	Praktyczne funkcje obsługi	24	Konserwacja i serwis
13	Cyfrowe systemy wsparcia	25	Wypożyczenie i opcje
14	Korzyści dla personelu	29	Dane techniczne
16	Korzyści dla pacjentów	30	Grupa Stiegmeyer



Evario

o szerokości 87 cm

- Wymiary leża (wymiary materaca): 87 x 200 cm
- Szerokość zewnętrzna mniejsza niż 1 metr
- Do wyboru dzielone barierki boczne Protega i barierki boczne ¾
- Obsługa za pomocą pilota LCD lub zintegrowanego panelu sterowania
- Ze szczytami Intercontinental, Stelo lub Rondo

Strona 6



Evario

o szerokości 90 cm

- Wymiary leża (wymiary materaca): 90 x 200 cm
- Dla materacy 90 cm i systemów zmiennociśnieniowych
- Ze szczytami Stelo lub Rondo
- Dzielone barierki boczne Protega
- Obsługa za pomocą pilota LCD lub zintegrowanego panelu sterowania
- Kable schowane w ramie łóżka

Strona 6



Evario w szerokiej wersji

Zwiększony komfort

- Wymiary leża (wymiary materaca): 97 x 200 cm
- Odpowiednie również dla cięższych pacjentów
- Opcjonalne 5-te koło dla lepszej zwrotności szerszego łóżka

Strona 18



Evario w długiej wersji

Łóżko dla wysokich pacjentów

- Wymiary leża (wymiary materaca): 87 x 210 cm
- Możliwość przedłużenia leża o 18 cm
- Estetyczne szczyty do wyboru

Strona 18



Evario z wagą

Precyzyjna kontrola wagi

- Wymiary leża (wymiary materaca): 90 x 200 cm
- Zintegrowana waga łóżkowa z odrębnym pilotem
- Dokładność ważenia do 100 g
- Możliwość wyposażenia w opcjonalny system Out-of-Bed

Strona 19



Evario ze stałym zagłówkiem

Bezpieczna regulacja wysokości

- Wymiary leża (wymiary materaca): 87 x 200 cm
- Zapobiega kolizji z meblami podczas regulacji wysokości
- Zakres regulacji wysokości 35 - 85 cm (ze zintegrowanym kołem)
- Bezpieczne korzystanie z akcesoriów (wysięgnik z uchwytem do ręki, stojak na kropłówkę) nawet przy pełnej mobilności leża

Strona 20

Najważniejsze cechy

Bezpieczne uchwyty

Uchwyty znajdujące się w szczytach i barierkach bocznych zapewniają wsparcie dla pacjenta podczas wchodzenia i schodzenia z łóżka. Jednocześnie ułatwiają manewrowanie łóżkiem.

Higieniczne leże

Dostępne rodzaje leża zapewniają wysoki komfort oraz są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji - także do dezynfekcji automatycznej.

Ochrona przed uszkodzeniami

Stożki buforowe ścienne i krążki odbojowe chronią łóżko oraz ściany przed uszkodzeniem.

Pilot podręczny LCD

Intuicyjny pilot, obsługiwany za pomocą trzech przycisków. Zapewnia 3 poziomy kontroli dla: pacjenta, personelu i serwisu.

Zintegrowany panel sterowania

Panel sterowania, wbudowany po obu stronach barierki bocznej Protega, umożliwia regulację łóżka dostosowaną do wszystkich użytkowników i zawiera przydatne, wstępnie ustawione pozycje leża.

Autoregresja oparcia pleców

Przesuwne oparcie chroni pacjenta przed siłami nacisku podczas regulacji łóżka, a także zapobiega powstawaniu odleżyn.

Estetyczne i praktyczne szczyty

Dostępne do wyboru trzy rodzaje szczytów: Intercontinental, Stelo i Rondo są łatwe do czyszczenia. Na życzenie łóżko może być również wyposażone w stały zagłówek, który nie przesuwa się podczas regulacji wysokości leża.

Barierki boczne Protega

Dzielone barierki boczne od strony głowy, poruszające się wraz z regulacją segmentu oparcia pleców, zapewniają optymalną ochronę do wysokości 41 cm.

Duży zakres regulacji wysokości

Zakres regulacji wysokości od 32 cm do 91 cm zabezpiecza pacjenta przed upadkiem, jednocześnie zapewnia personelowi pracę w ergonomicznej pozycji.

5-te koło

Opcjonalne 5-te koło sprawia, że manewrowanie łóżkiem w ciasnych pokojach i wąskich korytarzach jest niezwykle łatwe i utrzymuje łóżko na torze jazdy, bez konieczności ustawiania pozycji koła.



Evario


Idealne łóżko do każdego oddziału szpitalnego

Modułowy system sprawia, że łóżko Evario może dostosować się do bardzo specyficznych wymagań. W podstawowej konfiguracji dostępne jest z leżem o szerokości 87 lub 90 cm. Węższy wariant ułatwia manewrowanie łóżkiem w ciasnych pomieszczeniach.

Różne dekory i kształty można łączyć ze sobą w rozmaity sposób, zapewniając szereg możliwości wizualnych - od przytulnej, ciepłej elegancji po nowoczesny, funkcjonalny styl. Dzięki temu szpitale mogą poprawić jakość pomieszczeń dla pacjentów, nadając im indywidualny wygląd.

- Duże bezpieczne obciążenie robocze sprawia, że łóżko również nadaje się dla cięższych pacjentów o masie do 250 kg
- Zintegrowane przedłużenie leża o 28 cm dla wysokich pacjentów
- Duże powierzchnie i dobry dostęp do wszystkich elementów łóżka zapewniają łatwe czyszczenie i konserwację

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

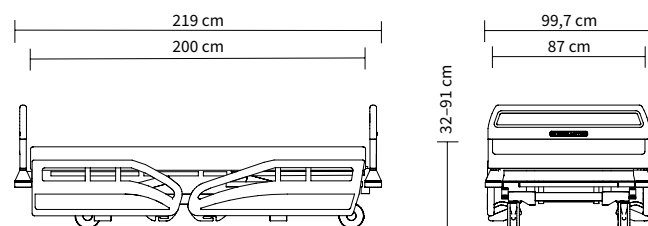


▲ Szczyty można dowolnie łączyć z barierkami bocznymi. Możliwe jest np. połączenie klasycznego szczytu Rondo z barierkami bocznymi Protega.



◀ Evario doskonale wspiera szybki powrót do zdrowia w codziennej opiece nad pacjentem, jest również odpowiednie do intensywnej terapii.

▼ Barierki boczne ¾ to rozsądne i łatwe w obsłudze rozwiązanie.

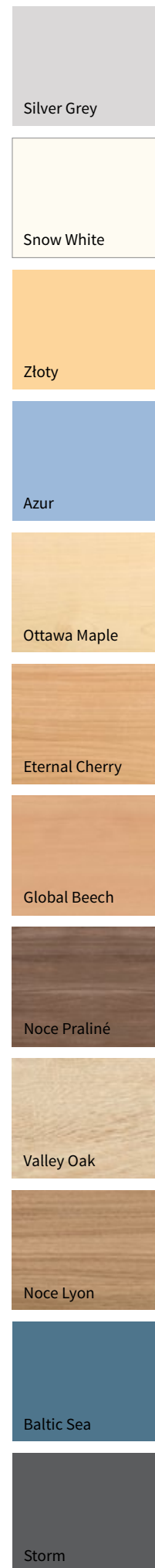



Intuicyjne podnoszenie i opuszczanie barierki bocznej ¾.
Wersja przeznaczona do automatycznej dezynfekcji zawiera zintegrowane zabezpieczenie krawędzi.

Barierki boczne ¾

Oszczędność miejsca i obsługa jedną ręką

Zapobieganie wypadaniu pacjentów z łóżek szpitalnych to najważniejsze zadanie barierki bocznej. Jednak istotne jest równoległe promowanie mobilności i unikanie rozwiązań ograniczających wolność. Barierki boczne Evario są właściwym wyborem dla spełnienia tych wymagań. Ich duża wysokość ochronna do 41 cm, umożliwia również korzystanie z materacy komfortowych, materacy przeciwoleżynowych i zmiennociśnieniowych. Barierki boczne ¾ chronią dużą część leża, a zatem zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Zajmują mało miejsca, ponieważ dyskretnie wtapiają się w otoczenie i gwarantują pacjentowi swobodny widok.

▼ Personel może obsługiwać barierki boczne ¾ szybko i intuicyjnie za pomocą jednej ręki.



▼ Barierki boczne ¾ zawierają krążki odbojowe, które chronią łóżko przed uszkodzeniami.



Barierki boczne Protega

Dzielone barierki boczne w kształcie skrzydeł

Barierki boczne Protega to alternatywa opracowana przez Stiegmeyer w celu elastycznego reagowania na potrzeby pacjentów. Dzielone barierki boczne z wytrzymałego tworzywa sztucznego, mogą opcjonalnie być podniesione tylko od strony głowy lub na całej długości leża. Stanowi to pomoc w orientacji oraz zapewnia pacjentowi pełną ochronę. Barierki boczne Protega są ergonomicznie ukształtowane i przyjemne w dotyku.

Płaska konstrukcja daje poczucie swobody oraz umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie.

▼ W segmencie oparcia pleców barierki boczne Protega poruszają się wraz z regulacją oparcia i zapewniają idealną ochronę nawet w pozycji siedzącej.

▼ Wystarczy jedna ręka by opuścić barierkę boczną wzdłuż boku łóżka. Odbywa się to płynnym i cichym ruchem, wspomaganym siłownikiem.





▲ Panele po wewnętrznej stronie łóżka są czytelne i przejrzyste oraz łatwe w użyciu dla pacjenta.

Zintegrowany panel sterowania

Intuicyjna obsługa łóżka

Łóżko Evario wyposażone w barierki boczne Protega, może być opcjonalnie obsługiwane za pomocą innowacyjnych sterowników, które są zintegrowane w barierkach bocznych po obu stronach łóżka.

Panele dają pacjentowi cztery opcje regulacji, które są najczęściej stosowane: regulacja wysokości leża, podnoszenie segmentu oparcia pleców oraz oparcia uda, a także zmiana z pozycji leżącej

do wygodnej pozycji siedzącej. Ułatwia to pacjentowi czytanie, jedzenie lub wstawanie, a tym samym wspomaga proces powrotu do zdrowia. Zewnętrzna strona panelu została zaprojektowana z myślą o pozostałych użytkownikach łóżka i posiada czytelny, duży wyświetlacz, który pozwala wybrać osobne poziomy kontroli dla personelu medycznego i serwisu. Oprócz zwykłych regulacji można go użyć do wyboru medycznie wskazanych pozycji, takich jak np. pozycja Trendelenburga.



▼ Panele po zewnętrznej stronie łóżka oferują dodatkowe opcje regulacji dla personelu medycznego i serwisu.



Pilot podręczny LCD

Łatwa obsługa za pomocą tylko 3 przycisków



▲ Personel medyczny ma zwiększoną kontrolę nad Evario ze swojego poziomu obsługi.

▼ Pilot podręczny LCD jest zawsze pod ręką, umieszczony w uchwycie na barierkach bocznych.



Pilot podręczny LCD posiada podświetlany wyświetlacz i tylko 3 przyciski. Pacjenci mogą w szybki i łatwy sposób wybrać opcje regulacji łóżka na wyświetlaczu. Funkcje zablokowane przez personel medyczny nie są widoczne dla pacjenta. Ta intuicyjna obsługa sprawia, że nadaje się do użytku nawet przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Aby uniknąć przypadkowej regulacji łóżka, pilot LCD ma trzy osobne poziomy kontroli: dla pacjentów, personelu i serwisu. Personel może zablokować pewne opcje regulacji dla pacjentów, ale dzięki funkcji EasyCare sam nadal może korzystać ze wszystkich opcji łóżka. Trzeci poziom kontroli umożliwia serwisowi dokonywanie przydatnych ustawień, niezbędnych podczas konserwacji i analizy błędów.

◀ Zmiana poziomów kontroli jest łatwa dzięki magnesowi odblokowującemu.

◀ Możliwość schowania pilota podręcznego LCD w uchwycie pod leżem.

◀ Pilota można odchylić na bok, gdy nie jest używany.

Praktyczne funkcje obsługi

Szybka regulacja łóżka

Jako praktyczne i pozytywne wsparcie dla personelu medycznego w łóżku Evario zaprogramowano trzy pozycje oparcia, które są najczęściej stosowane w codziennej opiece. Można je wybrać jednym naciśnięciem przycisku na panelu sterowania, który znajduje się blisko pacjenta. Ustawione kąty regulacji wynoszą 15°, 30° i 45°.

Kąt 30° zmniejsza ciśnienie, odciąża serce i ułatwia oddychanie.



▲ Pozycję kardiologiczną można również szybko ustawić, używając wyświetlacza na panelu sterowania.

▲ Kąt 45° ułatwia spożywanie posiłków i rozmowę z innymi osobami na wysokości oczu.

EasyCare

Podobnie jak w przypadku pilota podręcznego LCD, funkcja **EasyCare** umożliwia personelowi obsługę wszystkich opcji regulacji łóżka, nawet tych, które są zablokowane dla pacjenta.




JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

EasyCare zmniejsza obciążenie personelu medycznego

- Pilot LCD oferuje **trzy poziomy kontrole**: dla pacjentów, personelu i serwisu.
- Personel może **blokować i ukrywać** niektóre opcje regulacji dla pacjenta.
- Dzięki funkcji **EasyCare** regulacji tych można dokonywać na poziomie personelu bez zmiany stanu blokady dla pacjenta. Oszczędza to sporo czasu personelowi, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Włączanie funkcji

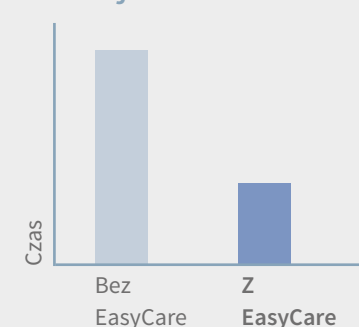


Tworzymy niestandardowe rozwiązania dla Twojego szpitala

Cyfrowe systemy wsparcia odciążają i zapewniają ochronę



Cyfrowe systemy wsparcia są nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwala redukować środki ograniczające swobodę pacjenta, jednocześnie chroniąc go. Dodatkowo wspierają personel medyczny, szczególnie podczas nocnych dyżurów. Głównie nacisk kładziony jest tutaj na system Out-of-Bed. W momencie, gdy pacjent wstaje z łóżka, załącza się czujnik obciążenia w oparciu pleców, inicjując działania wspomagające:

- Natychmiast włącza światło pod łóżkiem dla lepszej orientacji
- Powiadamia personel czterema sygnałami, wybranymi w przedziałach od 15 sekund do 15 minut
- Sygnały wizualne lub akustyczne mogą być wysyłane za pomocą istniejącego wewnętrznego systemu przywoławczego

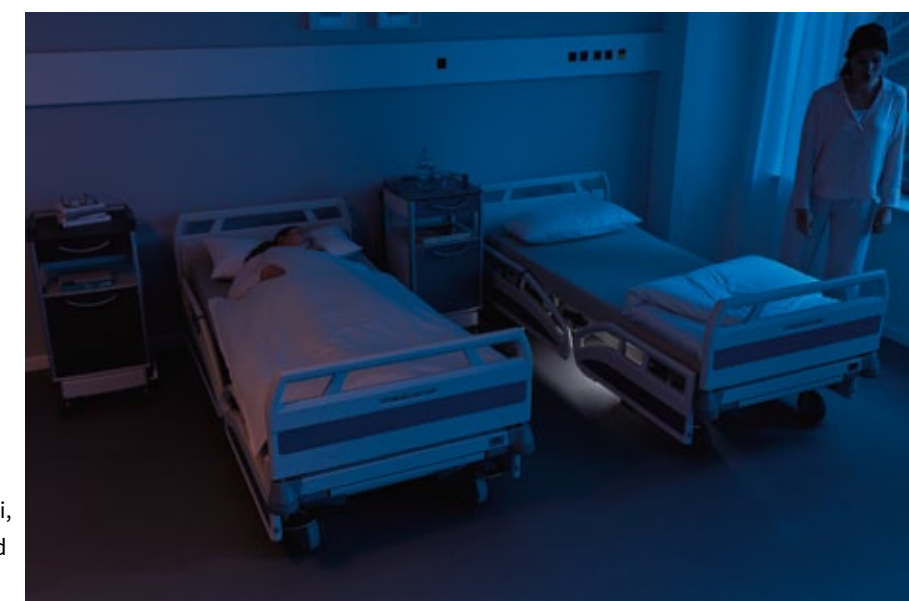


▲ System Out-of-Bed może załączać dyskretne światło pod łóżkiem.

System Out-of-Bed można połączyć z istniejącym wewnętrznym systemem przywoławczym.

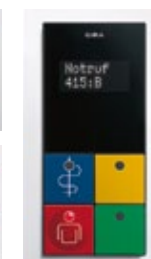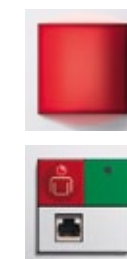



JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ Zalety 5-tego koła

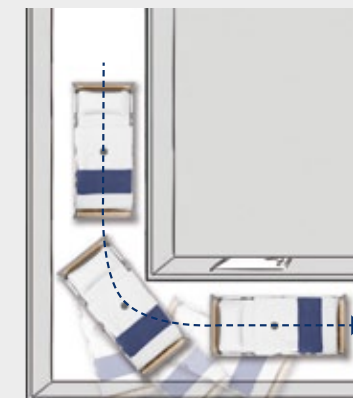

W przypadku szybkiego przejazdu przez zakręt na pacjenta mogą oddziaływać duże siły odśrodkowe. 5-te koło, zapewnia utrzymanie Evario na torze jazdy i zapobiega odjeżdżaniu łóżka na bok.

◀ Opcjonalne 5-te koło ułatwia personelowi manewrowanie łóżkiem.

Korzyści dla personelu Łatwa obsługa

Personel medyczny często boryka się z trudnościami fizycznymi i emocjonalnymi podczas codziennej pracy w szpitalu. Evario zapewnia pomoc w wielu sytuacjach, dzięki intuicyjnej obsłudze. Wiele przydatnych szczegółów łóżka tworzy spójną całość. Na szczególną uwagę zasługuje duży zakres regulacji wysokości od 32 do 91 cm - dzięki czemu nawet wysoki personel może pracować w ergonomicznej pozycji.

▼ Zintegrowane przedłużenie leża o 28 cm wyróżnia się łatwością obsługi.

▼ Odejmowane szczyty umożliwiają szybszy dostęp do pacjenta.



Manewrowanie łóżkiem jest wyzwaniem w ciasnych pokojach i korytarzach. Zasadniczo łóżko wyposażone w dodatkowe 5-te koło może być prowadzone bez obciążania pleców przez jedną osobę. Opcjonalne 5-te koło zmniejsza wymaganą siłę i ułatwia precyzyjne manewrowanie, a tym samym chroni łóżko i otoczenie przed kolizjami.

Ponadto 5-te koło zapewnia wysoką stabilność podczas transportu pacjenta, niezależnie od tego, czy personel medyczny prowadzi łóżko od strony głowy czy nóg.

Ergonomiczne uchwyty na stabilnych szczytach zapewniają dodatkowe udogodnienie podczas transportowania łóżek. Łatwy do aktywacji mechanizm blokujący zabezpiecza szczyty przed przypadkowym wyciągnięciem.

▼ W sytuacji awaryjnej pozycję CPR można natychmiast ustawić za pomocą dźwigni umieszczonej pod segmentem oparcia pleców.

▼ Podświetlane elementy na panelu sterowania zwiększają bezpieczeństwo nawet w ciemności, a zaprogramowane pozycje znacznie usprawniają pracę personelu.



Korzyści dla pacjentów

Komfort i bezpieczeństwo



Ogromny komfort i stylowy wygląd Evario sprawiają, że jest to łóżko szpitalne, w którym można poczuć się jak w domu. Pacjenci mogą w nim odzyskać siły i wiarę. Ma to także pozytywny wpływ na szybkość ich powrotu do zdrowia.

▲ Evario zapewnia dużo miejsca i komfort w każdej sytuacji - również dzięki funkcji autoregresji oparcia pleców, która zapobiega niewygodnym siłom nacisku dla pacjenta, podczas regulacji.




Uchwyty ►
w barierkach bocznych Protega
jak i wąskie listwy w barierkach bocznych ¾ ►
zapewniają swobodę i niezakłócony widok
na pokój lub przez okno.



▲ Dzielone barierki boczne Protega i poręcze dostępne na całej długości łóżka sprzyjają mobilności pacjenta. Może on samodzielnie wstawać, mając wsparcie.

Najniższa pozycja leża ►
na poziomie zaledwie 32 cm
zmniejsza skutki upadków.

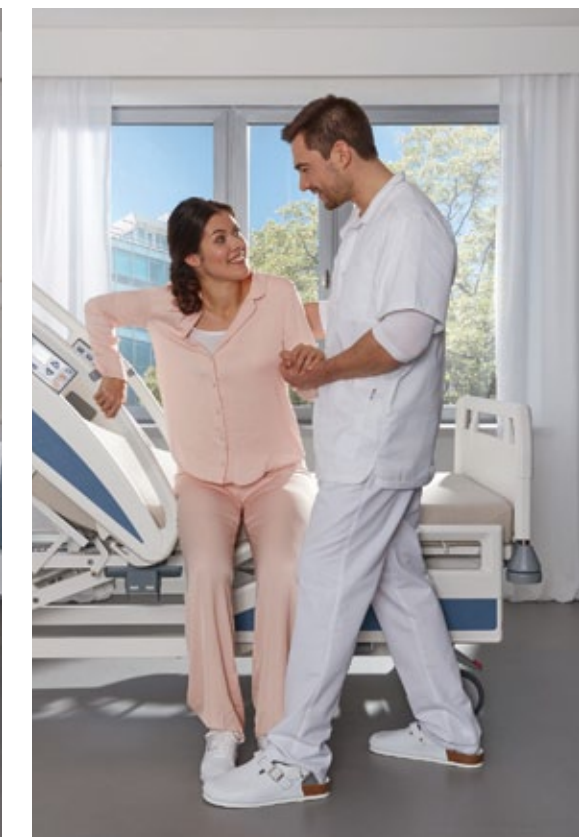


▲ Gdy pacjent podejmuje pierwsze próby wstawania i chodzenia, stabilna poręcz zapewnia przydatne wsparcie i sprzyja mobilizacji.

Evario w szerokiej wersji

Na życzenie dostępna jest wersja łóżka o szerokości 100 cm w połączeniu z leżem o długości 200 cm. Przedłużenie leża jest również możliwe w tym wariantcie. Duże bezpieczne obciążenie robocze łóżka sprawia, że jest ono także odpowiednie dla cięższych pacjentów, o wadze do 250 kg.



Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

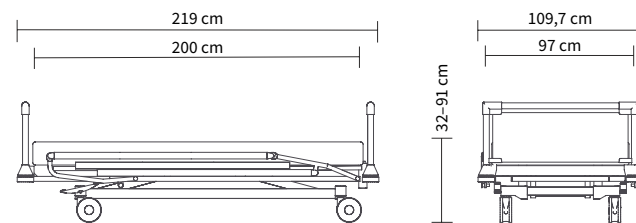


Evario w długiej wersji

Pacjenci na przestrzeni lat stali się wyżsi i ciężsi. Dzięki Evario szpitale są idealnie na to przygotowane. Leże ma opcjonalną długość 210 cm i może zostać przedłużone do 228 cm.



Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

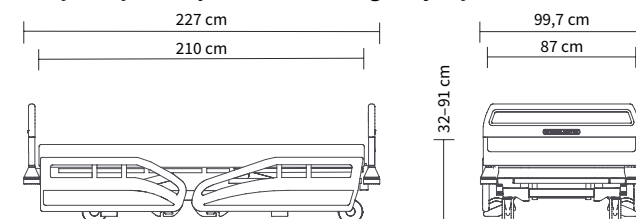

Evario z wagą

Kontrola masy dzięki zespólnemu systemowi ważenia



Evario z wagą spełnia wysokie wymagania oddziału intensywnej terapii. Oferowany system, dzięki zintegrowanej wadze zapewnia precyzyjne odczyty i pomaga w diagnozie oraz prawidłowym leczeniu. Monitorowanie wagi pacjenta odbywa się z dokładnością do 100 g. Automatyczna kompensacja pozwala personelowi dodawać lub usuwać przedmioty z łóżka bez wpływu na wyświetlaną masę pacjenta. Oprócz opcji ważenia, nowy system jest również opcjonalnie dostępny ze zintegrowaną funkcją Out-of-Bed. Automatycznie włącza ona światło pod łóżkiem, gdy pacjent z niego wstanie. System można również podłączyć do systemu przywołania pielęgniarki (lub wewnętrznego systemu przywoławczego). Dzięki sensorom wagowym w podwoziu, personel jest informowany, gdy pacjent wstaje z łóżka i nie wraca do niego po upływie określonego czasu.

▲ Waga jest wyświetlana na łatwym w obsłudze pilocie podręcznym z 2,4-calowym podświetlanym wyświetlaczem i dobrze widocznymi przyciskami.

Ergonomicznie zaprojektowany pilot podręczny może być przymocowany do szczytu łóżka lub bezpiecznie schowany w półce na pościel.



Ze względów higienicznych podwozie jest chronione dodatkową osłoną, a tym samym jest łatwiejsze do czyszczenia.





Evario ze stałym zagłówkiem zmniejsza ryzyko uszkodzenia

Opcjonalny stały zagłówek nie przesuwają się podczas regulacji wysokości łóżka, dzięki czemu pozwala uniknąć kolizji z wyposażeniem pokoju.

- Wymiary łóżka 87 x 200 cm
- Wysięgnik z uchwytem do ręki i stojak kroplówki na zewnątrz
- Zakres regulacji wysokości 32 – 85 cm
- Odchylana do 12° pozycja Trendelenburga

▼ Unika się zarysowania ścian podczas regulacji wysokości łóżka.



▼ Umieszczony po zewnętrznej stronie wysięgnik z uchwytem do ręki nie porusza się podczas regulacji wysokości.



Opłacalne korzyści w parze z wysoką jakością

Evario to opłacalna inwestycja, zapewniająca szpitalowi wyjątkowe łóżko w przystępnej cenie, które w perspektywie długoterminowej pozwala zaoszczędzić niemałe koszty. Wszystkie elementy zostały poddane dokładnym testom, często znacznie przekraczającym standardowe procedury, aby zapewnić długą trwałość i użyteczność łóżka. Jego przemyślana konstrukcja sprawia, że Evario od samego początku wyklucza pewne ryzyko uszkodzenia. Zintegrowany panel sterowania jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia, ponieważ nie można go wyciągnąć ani nie może spaść. W razie naprawy, panel sterowania można po prostu usunąć, bez konieczności demontażu barierek bocznych.

▼ Wszechstronny asortyment krążków odbojowych, a także stożków buforowych ściennych chroni łóżko i ściany przed uszkodzeniami.



▼ Poziom kontroli dla serwisu na pilocie podręcznym LCD i panelu sterowania zapewnia przydatne ustawienia dla procesu konserwacji, analizy błędów i resetowania.





Niezawodna higiena

Ręczna i automatyczna dezynfekcja

Odporne czynniki chorobotwórcze stanowią poważne wyzwanie dla każdego szpitala. Krótsze pobyty i zwiększona rotacja pacjentów sprawiają, że zapobieganie infekcjom jest jeszcze trudniejsze. Niezawodna higiena łóżka odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu tego ryzyka. Evario jest idealnie zaprojektowane do dokładnego czyszczenia i dezynfekcji - zarówno ręcznej, jak i opcjonalnie automatycznej.



▲ Łóżko ma duże i gładkie powierzchnie, które nie pozwalają, aby brud osiadł niezauważony. Zarówno modele szczytów Intercontinental jak i Stelo wzmacniają te wyjątkowe właściwości higieniczne.



◀ Pozycja do automatycznej dezynfekcji jest ustawiona na pilocie i panelu sterowania.

Nawet standardowa wersja, przeznaczona do ręcznego mycia, jest wytwarzana w klasie ochronnej IPX6, dzięki czemu zapewnia najlepsze możliwe warunki czyszczenia. W wersji do automatycznej dezynfekcji Stiegmeyer określił rozszerzoną klasę ochrony IPX6W (zmywalną), która zapewnia szczególnie dobrą ochronę przed wilgocią.

Automatyczna dezynfekcja zapewnia operatorom łóżek szpitalnych silną broń w walce z niebezpiecznymi drobnoustrojami. Nawet z tworzywowymi barierkami bocznymi Protega, Evario nadaje się do automatycznej dezynfekcji - to decydująca przewaga w stosunku do porównywalnych modeli.

Konserwacja i serwis

Wsparcie dla personelu technicznego



▲ Poziom techniczny pilota podręcznego LCD pomaga w przeglądach i konserwacji.

Bezpieczeństwo, wydajność i łatwość użytkowania Evario są również widoczne podczas przeglądów i konserwacji. Wszystkie elementy elektroniczne zostały umieszczone w taki sposób, aby zapewniały szczególną ochronę, a jednocześnie były łatwo dostępne przez cały czas. Jednostka sterująca i akumulator znajdują się pod leżem od strony głowy. Do pracy bez prądu dostępna jest bateria ołowiowo-żelowa lub mocny akumulator litowo-jonowy o długiej żywotności. Ten ostatni umożliwia większą liczbę cykli regulacji i musi być wymieniany rzadziej. Jeśli konieczna będzie wymiana baterii, obie wersje są łatwo dostępne. Serwisanci mogą przeprowadzić wszelkie niezbędne prace konserwacyjne i naprawcze tych elementów w zaledwie kilku prostych krokach.



Wszystkie elementy elektroniczne łóżka są łatwo dostępne. Dzięki temu serwisanci oszczędzają do 20 minut podczas prac konserwacyjnych.



Evario o szerokości 90 cm posiada zintegrowane kable z ramą łóżka. Umożliwia to swobodny dostęp do wszystkich obszarów i zapewnia łatwe czyszczenie.

Wyposażenie i opcje

Szczyty



- Stelo
- Dla wariantów o szerokości 87 cm i 90 cm, w szerokiej wersji, w długiej wersji i z wagą
- Z wytrzymałymi profilami ze stali nierdzewnej
- Szczyty całkowicie odejmowane
- Zabezpieczone przed przypadkowym wyciągnięciem
- Dekory z kolekcji Resopal od Stieglmeyer



- Intercontinental
- Dla wariantów o szerokości 87 cm i 90 cm, ekstra szerokich, ekstra długich i ze stałym zagłówkiem
- Z tworzywa sztucznego PP
- Szczyty całkowicie demontowalne
- Szczególnie łatwe do czyszczenia
- Zabezpieczone przed przypadkowym wyciągnięciem



- Rondo
- Dla wariantów o szerokości 87 cm i 90 cm, ekstra długich i z wagą
- Z anodowanymi profilami aluminiowymi
- Wymienny profil zabezpieczający krawędzie po bokach
- Szczyty całkowicie odejmowane
- Zabezpieczone przed przypadkowym wyciągnięciem



- Stały zagłówek
- Zagłówek przymocowany do podwozia, całkowicie odejmowany
- Pozostaje w miejscu podczas regulacji wysokości leża
- Chroni przed kolizją z wyposażeniem pokoju
- Zabezpieczone przed przypadkowym wyciągnięciem
- Można go łączyć tylko ze szczytem Intercontinental

Barierki boczne



- Barierki boczne ¾
- Zabezpieczają pacjenta do wysokości ok. 39 cm
- Mogą być podnoszone i opuszczane jedną ręką
- Nie ograniczają widoku pacjenta
- Wersja do automatycznej dezynfekcji z zabezpieczeniem krawędzi



- Barierki boczne Protega
- Zabezpieczają pacjenta do wysokości ok. 41 cm
- Dzielone barierki boczne z wysokiej jakości tworzywa
- Łatwa i cicha obsługa
- Ochrona przed przygnieceniem palców

Leże



- Leże higieniczne
- Wykonane z polipropylenu
- Możliwość demontażu poszczególnych segmentów
- Nowoczesny design
- Opcjonalnie z otworami na system pasów



- Leże tworzywowe
- Wykonane z tworzywa typu HPL
- Możliwość demontażu poszczególnych segmentów
- Z otworami na system pasów
- Idealne do automatycznej dezynfekcji



- Leże wypełnione metalową kratką
- Wykonane ze stali
- Szczególnie wytrzymałe i trwałe
- Sekcje zintegrowane lub wyjmowane osobno
- Idealne do automatycznej dezynfekcji



- Oparcie pleców przeźierne dla promieni RTG
- Wykonane z tworzywa typu HPL, przeźierne dla promieni RTG
- Pozostałe elementy wykonane z polipropylenu
- Możliwość prześwietlenia pacjenta aparatem RTG bez potrzeby zmiany jego położenia
- Zawiera uchwyt na kasetę RTG

	Koła zintegrowane
	• Średnica 150 mm • Zakres regulacji wysokości leża ok. 35 – 91 cm • Prześwit podwozia do podłogi. 17 cm
	Podwójne koła
	• Średnica 150 mm • Zakres regulacji wysokości leża ok. 35 – 91 cm • Prześwit podwozia do podłogi. 17 cm
	Podwójne koła Linea
	• Średnica 150 mm • Zakres regulacji wysokości leża ok. 32 – 88 cm • Prześwit podwozia do podłogi. 13,5 cm
Dźwignie hamulca	
	Chromowana dźwignia hamulca
	• Odlew ciśnieniowy, chromowany • Hamulec włączany poprzez nacisk od góry • Hamulec wyłączany od dołu • Estetyczna, chromowana forma odlewu
	Chromowana dźwignia z kolorowym oznakowaniem
	• Odlew ciśnieniowy, chromowany • Powierzchnia bieżnika z kolorowym oznakowaniem • Szybka i intuicyjna obsługa • Estetyczna, chromowana forma odlewu
	Tworzywowa dźwignia
	• Wykonana z tworzywa • Powierzchnia bieżnika z kolorowym oznakowaniem • Szybka i intuicyjna obsługa
Krażki odbojowe	
	Tworzywowe
	• Średnica 100 mm • Materiał: poliamid (PA6) • Zawiera stożki buforowe ścienne
	Uniwersalne
	• Średnica 100 mm • Dwuosiove krażki odbojowe • Materiał: poliamid (PA6) • Zawiera stożki buforowe ścienne
Cyfrowe systemy wsparcia	
	System Out-of-Bed
	• Wybór czasu reakcji sygnału (4 opcje) • Automatyczna aktywacja opcji zapalania światła pod łóżkiem • Obsługa i aktywacja oddzielnym pilotem podręcznym • Możliwość połączenia z istniejącymi systemami telefonicznymi za pośrednictwem otwartych interfejsów (więcej informacji w instrukcji obsługi)
	Światło pod łóżkiem
	• Aktywowane pilotem podręcznym LCD lub zintegrowanym panelem kontrolnym • Dyskretne, nieoślepiające światło dla orientacji w ciemności
	Sygnał hamulca
	• Sygnał dźwiękowy, jeśli hamulec jest zwolniony, ale nie odłączono kabla zasilającego • Ochrona przed uszkodzeniami i niezamierzonym przemieszczaniem się łóżka

	Zintegrowany panel sterowania
	• Zintegrowany panel po obu stronach barierki bocznych Protega • Praktyczne opcje regulacji dla pacjenta (od wewnątrz), a także dla personelu opieki i serwisu (od zewnątrz) • Wstępnie ustawione pozycje łóżek • Szybka aktywacja funkcji CPR
	Pilot podręczny LCD
	• 3 pozycje kontroli (pacjent, personel medyczny, serwis) • Szeroki zakres opcji blokowania i ustawiania w trybie pracy normalnej i w sytuacjach awaryjnych na poziomie personelu • Bezpośrednia analiza błędów na poziomie kontroli technicznej
	Skrzynka blokująca
	• Przymocowana do półki na pościel • Do blokowania grup funkcji • Do ustawiania pozycji Trendelenburga oraz pozycji CPR • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
	Panel centralny
	• Służy do blokowania i obsługi poszczególnych funkcji • Ustawienia awaryjne • Funkcje zapisywania w pamięci • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
	Pilot satelita
	• Łatwe przymocowanie do oparcia • Elastyczne ramię indywidualnie dopasowane do pacjenta • Duże, czytelne i łatwo dostępne piktogramy
	Dźwignia regulacji wysokości
	• Łatwa regulacja wysokości łóżka za pomocą stopy
Wypożenie dodatkowe	
	Uchwyt na pilota
	• Bezpieczny uchwyt pilota • 2 rodzaje uchwytów do wyboru
	Listwa przesuwna
	• Nadaje się do mocowania akcesoriów wyposażenia wzdłuż brzegów łóżka • Profil 10 x 25 mm
	Uniwersalna listwa do mocowania
	• Oferuje wystarczająco dużo miejsca do mocowania akcesoriów
	Zintegrowane przedłużenie segmentu podudzia
	• Dodatkowa wygoda podczas przedłużania leża • Listwy jednocześnie przedłużają podnóżek
	Bateria kwasowo-ołowiowy
	• Niezawodna i niedroga
	Bateria litowo-jonowa
	• Długa żywotność baterii • Duża liczba cykli regulacji

Wyposażenie i opcje

	Evario o szerokości 87 cm	Evario o szerokości 90 cm	Evario w szerokiej wersji	Evario w długiej wersji	Evario z wagą	Evario ze stałym zagłówkiem
Barierki boczne						
Barierki boczne ¾ obsługiwane jedną ręką	✓	–	✓	–	–	–
Barierki boczne Protega	0	✓	0	0	✓	✓
Rodzaje szczytów						
Intercontinental	✓	–	–	✓	–	✓
Stelo	0	0	✓	0	0	–
Rondo	0	✓	–	0	✓	–
Kolor ramy						
Biały NCS S0500N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dezynfekcja, stopień ochrony						
Mechaniczna dezynfekcja, IPX6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczna dezynfekcja, IPX6W	0	0	–	0	–	0
Leże						
Higieniczne leże z polipropylenu ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Higieniczne leże z polipropylenu z otworami na system pasów ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Higieniczne leże z polipropylenu z oparciem przeziernym dla promieni RTG	0	0	–	0	0	0
Leże wypełnione płytą HPL z otworami na system pasów	0	–	–	0	–	0
Leże wypełnione metalową kratką	0	–	–	0	–	0
Leże wypełnione metalową kratką (demonowalne)	0	–	–	0	–	0
Krażki odbojowe						
4 standardowe po obwodzie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 uniwersalne po obwodzie	0	0	0	0	0	0
2 uniwersalne - od strony głowy, 2 standardowe - od strony nóg	0	0	0	0	0	0
Stożek buforowy ścienny						
Od strony głowy i nóg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koła						
Zintegrowane koła o średnicy 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podwójne koła o średnicy 150 mm	0	0	0	0	0	0
Podwójne koła Linea o średnicy 150 mm	0	0	0	0	–	0
Przewodząca powłoka kół						
1 koło	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 koła	0	0	0	0	0	0
4 koła	0	0	0	0	0	0
5 kół	0	0	0	0	0	0
Dźwignia hamulca						
2 x tworzywo z kolorowym oznakowaniem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 x tworzywo z kolorowym oznakowaniem	0	0	0	0	0	0
Odlew ciśnieniowy, chromowany	0	0	0	0	0	0
2 x odlew ciśnieniowy, chromowany z kolorowym oznakowaniem	0	0	0	0	0	0
4 x odlew ciśnieniowy, chromowany z kolorowym oznakowaniem	0	0	0	0	0	0
Położenie koła z blokadą kierunkową						
Przód, prawy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przód, lewy	0	0	0	0	0	0
Tył, prawy	0	0	0	0	0	0
Tył, lewy	0	0	0	0	0	0
Pośrodku łóżka (5-te koło)	0	0	0	0	0	0

	Evario o szerokości 87 cm	Evario o szerokości 90 cm	Evario w szerokiej wersji	Evario w długiej wersji	Evario z wagą	Evario ze stałym zagłówkiem
Elementy obsługi						
Pilot podręczny LCD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zintegrowany panel sterowania	0	0	0	0	0	0
Panel centralny w półce na pościel	0	0	0	0	0	0
Skrzynka blokująca w półce na pościel	0	0	0	0	–	0
System Out-of-Bed						
Tak	0	0	0	0	0	0
Tak, wyłącznie ze światłem pod łóżkiem	0	0	0	0	0	0
Wyposażenie dodatkowe						
Listwa przesuwna wzdłuż łóżka	0	0	0	0	0	0
Listwa przesuwna w segmencie oparcia pleców	0	0	0	0	0	0
Uniwersalna listwa do mocowania wzdłuż łóżka	0	0	0	0	0	0
5-te koło	0	0	0	0	0 ²⁾	0
Półka na pościel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przedłużenie segmentu podudzia	0	0	0	0	0	0
Przedłużenie leża	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tuleja do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki						
Owalna	✓	✓	✓	✓	✓	–
Okrągła	0	0	0	0	0	✓
Funkcje elektroniczne						
Dźwignia regulacji wysokości	0	0	0	0	0	0
Sygnal hamulca	0	0	0	0	0 ³⁾	0
Światło pod łóżkiem	0	0	0	0	0	0
Pilot satelita ¹⁾	0	–	0	0	–	–
Bateria						
Bateria kwasowo-ołowiowa	0	0	0	0	0	0
Bateria litowo-jonowa	0	0	0	0	0	0

Dane techniczne

	Evario o szerokości 87 cm	Evario o szerokości 90 cm	Evario w szerokiej wersji	Evario w długiej wersji	Evario z wagą	Evario ze stałym zagłówkiem
Dane podstawowe						
Wymiary zewnętrzne	ok. 99,7 x 219 cm	ok. 103,8 x 219 cm	ok. 109,7 x 219 cm	ok. 99,7 x 227 cm	ok. 103,8 x 219 cm	ok. 99,7 x 236 cm
Wymiary leża (wymiary materaca)	ok. 87 x 200 cm	ok. 90 x 200 cm	ok. 97 x 200 cm	ok. 87 x 210 cm	ok. 90 x 200 cm	ok. 87 x 200 cm
Przedłużenie leża	ok. 28 cm	ok. 28 cm	ok. 28 cm	ok. 18 cm	ok. 28 cm	ok. 28 cm
Podział sekcji leża	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 61 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm
Autoregresja oparcia pleców	ok. 10 cm	ok. 10 cm	ok. 10 cm	ok. 10 cm	ok. 10 cm	ok. 10 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	ok. 260 kg	ok. 260 kg	ok. 260 kg	ok. 260 kg	ok. 260 kg	ok. 260 kg
Maksymalna waga pacjenta	ok. 250 kg	ok. 250 kg	ok. 250 kg	ok. 250 kg	ok. 250 kg	ok. 250 kg
Prześwit do podłogi	ok. 17 cm	ok. 17 cm	ok. 17 cm	ok. 17 cm	ok. 17 cm	ok. 17 cm
Prześwit do podłogi z kołami Linea o średnicy 150 mm	ok. 13,5 cm	ok. 13,5 cm	ok. 13,5 cm	ok. 13,5 cm	–	ok. 13,5 cm
Waga całkowita	ok. 160 kg	ok. 162 kg	ok. 165 kg	ok. 160 kg	ok. 170 kg	ok. 165 kg
Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych Protega	ok. 41 cm	ok. 41 cm	ok. 41 cm	ok. 41 cm	ok. 41 cm	ok. 41 cm
Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych ¾	ok. 39 cm	–	ok. 39 cm	ok. 39 cm	–	–
Regulacje						
Kąt przechyłu Trendelenburga	ok. 0 – 14°	ok. 0 – 14°	ok. 0 – 14°	ok. 0 – 14°	ok. 0 – 14°	ok. 0 – 12°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga	ok. 0 – 15°	ok. 0 – 15°	ok. 0 – 15°	ok. 0 – 15°	ok. 0 – 15°	ok. 0 – 15°
Zakres regulacji wysokości leża	ok. 35 – 91 cm	ok. 35 – 91 cm	ok. 35 – 91 cm	ok. 35 – 91 cm	ok. 35 – 91 cm	ok. 35 – 85 cm
Zakres regulacji wysokości leża z kołami Linea o średnicy 150 mm	ok. 32 – 88 cm	ok. 32 – 88 cm	ok. 32 – 88 cm	ok. 32 – 88 cm	–	ok. 32 – 82 cm
Kąt odchylenia oparcia pleców	ok. 0 – 70°	ok. 0 – 70°	ok. 0 – 70°	ok. 0 – 70°	ok. 0 – 70°	ok. 0 – 70°
Kąt odchylenia oparcia uda	ok. 0 – 40°	ok. 0 – 40°	ok. 0 – 40°	ok. 0 – 40°	ok. 0 – 40°	ok. 0 – 40°
Uniesiona pozycja nóg	ok. 0 – 16°	ok. 0 – 16°	ok. 0 – 16°	ok. 0 – 16°	ok. 0 – 16°	ok. 0 – 16°

Chronimy wartości Tworzymy przyszłość

Chronimy wartości

Nasze przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1900 w Herford i po dziś dzień pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym. Szacunek i odpowiedzialność w stosunku do naszych klientów, pracowników i partnerów stanowią podstawę naszej codziennej pracy. Opierając się na tych wartościach oraz naszym długoletnim doświadczeniu, oferujemy klientom na całym świecie produkty, rozwiązania i usługi wysokiej jakości z segmentu opieki i zdrowia.

Tworzymy przyszłość

Aby błyskawicznie reagować na zmiany zachodzące w dziedzinie opieki i zdrowia, sami opracowujemy wszystkie nasze produkty. Wdrażanie innowacji i opracowywanie wizji opieki na przyszłość są celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, aby wspierać ich w realizacji codziennych zadań. Wdrażanie trendów przyszłości już w teraźniejszości jest naszą tradycją.

Nasze specjalizacje

Szpitalne

Domy opieki

Opieka domowa

Komfortowe łóżka

Systemy meblowe

Serwis



Grupa Stieglmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez markę Burmeier - również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi.

- Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym
- Ponad 1100 pracowników na całym świecie
- Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się we własnych zakładach
- Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech
- Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
- Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
- Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Polsce i RPA

Nasze marki


STIEGELMEYER


BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com