

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ




# Mobilo

Więcej niż standard



▲ Mobilo oferuje pacjentom szczególnie wysoki zakres bezpieczeństwa i komfortu, zarówno jako wózek do przewożenia chorych i jako łóżko do pobytu dziennego. Gwarantują to barierki boczne, zabezpieczające pacjenta po obu stronach do wysokości 35 cm, jak również wygodny materac z pianki.

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

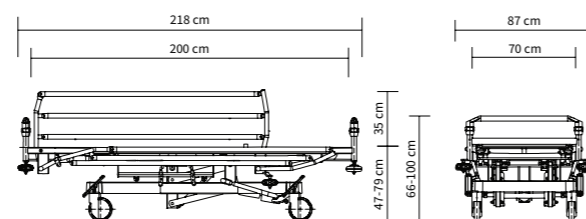

▲ Wysokość i pozycje leża można elastycznie regulować z obu stron wózka - od pozycji leżącej do wygodnej pozycji siedzącej.



▲ Barierki boczne stanowią dodatkową pomoc dla personelu medycznego, ponieważ w zależności od sytuacji, pacjent nie wymaga stałego nadzoru.



▲ Wysokość leża można regulować hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej.



▲ W nagłych przypadkach Mobilo można szybko przechylić do pozycji Trendelenburga.

## Mobilo

### Więcej niż standard

Produkt Mobilo sprawdza się w wielu ważnych rolach. Jako **wózek do przewożenia chorych**, zapewnia pacjentom szybkie i bezpieczne przemieszczanie z jednego miejsca do drugiego. Dzięki swoim bogatym funkcjom, spełnia dodatkowo standardy norm łóżkowych DIN EN 60601-2-52, dlatego w razie potrzeby może być stosowane jako **leże dziennego pobytu w szpitalu**, co zmniejsza problem z rozmieszczeniem pacjentów. W zależności od stanu zdrowia, pacjent może przebywać na wózku Mobilo przez dłuższy okres czasu, bez stałego nadzoru personelu.

Ponadto Mobilo ułatwia pracę personelu medycznego, gdyż kompleksowe przygotowanie, niezbędne w przypadku łóżek wymagających zmiany pościeli, nie jest tu konieczne. **Centralny system blokady kół** dostępny jest z pozycji wszystkich 4 kół, co ma istotne znaczenie w stresujących sytuacjach, wymagających szybkiej reakcji ze strony personelu.

## Bezpieczeństwo i komfort

### Wsparcie dla pacjentów i personelu medycznego

Leże Mobilo dostępne jest w wersji 2-segmentowej i 4-segmentowej. Powierzchnia o wymiarach 70 x 200 cm jest duża jak na wózek i zapewnia większą swobodę dla pacjenta. **Regulacja wysokości** leża w zakresie od 47 do 79 cm umożliwia pacjentom łatwe wchodzenie i schodzenie z wózka, natomiast personelowi – pracę w ergonomicznej pozycji. Obustronne **barierki boczne** zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

**Podpora reanimacyjna** sprawia, że wózek jest jeszcze bardziej uniwersalny. Umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, pod leżem od strony głowy, zapewnia stabilność wózka podczas resuscytacji pacjenta.



Łatwy do zamontowania tablet ułatwia pacjentowi spożywanie posiłków bez konieczności zmiany miejsca.



▲ Szerokie, ergonomicznie zaprojektowane uchwyty umieszczone na szczytach wózka, ułatwiają manewrowanie nim w szybki i łatwy sposób.

## Pomoc w każdej sytuacji dzięki przydatnym akcesoriom

Wszystkie elementy niezbędne do leczenia i opieki nad pacjentem mogą być w prosty i szybki sposób przymocowane do Mobilo. Ułatwia to pracę zarówno, gdy produkt pełni funkcję wózka do przewożenia chorych, a także łóżka do codziennej pielęgnacji.

▼ Niezbędne akcesoria do opieki mogą być przymocowane do aluminiowej listwy znajdującej się po obu stronach wózka.



▲ Opcjonalnie dostępne stojaki infuzyjne mają konstrukcję teleskopową i mogą być montowane we wszystkich 4 narożnikach wózka.

▼ Tworzywowa osłona podstawy znajdująca się pod leżem, oferuje łatwo dostępną przestrzeń na butle z tlenem z paskiem zabezpieczającym lub miejsce na osobiste przedmioty pacjenta.



## Dodatki spełniające wiele wymagań


Dzięki szerokiej gamie akcesoriów i licznym detalom Mobilo można dostosować do wielu wymagań codziennej rutyny szpitalnej. **Łatwość manewrowania** i doskonałe **właściwości**

**higieniczne** odciążają personel i pozwalają zaoszczędzić czas, który można wykorzystać na opiekę nad pacjentem.

▼ Uchwyt na rolkę papieru może być zamontowany na szczytach wózka, zapewniając higieniczne użytkowanie leża.

▼ Szczyty wyposażone są w listwy ze stali nierdzewnej do mocowania akcesoriów wyposażenia dodatkowego, np. pomp, stojaków lub systemu dostarczania tlenu.

▼ Prowadnice umożliwiają przesunięcie płyty przeziernej dla promieni RTG w celu wykonywania zdjęć, co pozwala na diagnostykę bez konieczności przenoszenia pacjenta na inne łóżko.

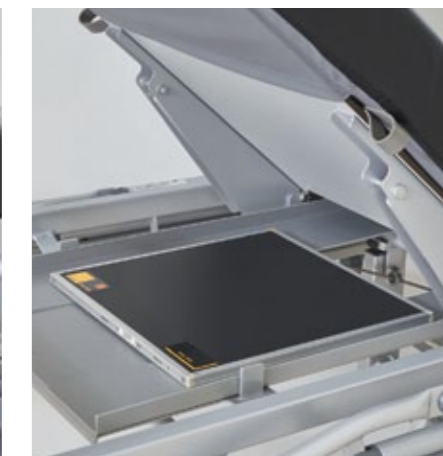

# Dane techniczne

Wypożyczenie i opcje	
<b>Barierki boczne</b>	
Barierki boczne po obu stronach leża	✓
<b>Kolor ramy</b>	
Argentum, zbliżony do RAL 9006	✓
<b>Leże</b>	
Leże 2-segmentowe	✓
Leże 4-segmentowe	0
<b>Krażki odbojowe</b>	
6 krajków odbojowych	✓
<b>Koła jezdne z blokadą centralną</b>	
Podwójne koła o średnicy 150 mm	✓
Zintegrowane koła o średnicy 200 mm	0
<b>Położenie koła z blokadą kierunkową</b>	
Przód, prawy	✓
Przód, lewy	0
Tył, prawy	0
Tył, lewy	0
<b>Przewodząca powłoka kół</b>	
1 koło	✓
2 koła	0
4 koła	0
<b>Wypożyczenie dodatkowe</b>	
Tablet na posiłki i prowadnica na kasetę RTG pod leżem	0
Podpora reanimacyjna	0

Dane techniczne	
<b>Dane podstawowe</b>	
Wymiary zewnętrzne	ok. 87 × 218,5 cm
Wymiary leża (wymiary materaca)	ok. 70 × 200 cm
Wysokość materaca	ok. 10 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	ok. 200 kg
Maksymalny udźwig	ok. 250 kg
Prześwit do podłogi przy najniższej pozycji leża	ok. 9 cm
Waga całkowita	ok. 130 kg
Podział sekcji leża: 2-segmentowe	ok. 74 – 117,5 cm
Podział sekcji leża: 4-segmentowe	74 – 13 – 37,7 – 61,8 cm
Wysokość zabezpieczenia barierki bocznych	ok. 35 cm
<b>Regulacje</b>	
Kąt przechyłu Trendelenburga	ok. 0 – 12°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga	ok. 0 – 12°
Zakres regulacji wysokości leża	ok. 47 – 79 cm
Kąt odchylenia oparcia pleców	ok. 0 – 70°
Kąt odchylenia oparcia uda (leże 4-segmentowe)	ok. 0 – 45°



## Chronimy wartości Tworzymy przyszłość

### STIEGELMEYERGROUP

#### Chronimy wartości

Nasze przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1900 w Herford i po dziś dzień pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym. Szacunek i odpowiedzialność w stosunku do naszych klientów, pracowników i partnerów stanowią podstawę naszej codziennej pracy. Opierając się na tych wartościach oraz naszym długoletnim doświadczeniu, oferujemy klientom na całym świecie produkty, rozwiązania i usługi wysokiej jakości z segmentu opieki i zdrowia.

#### Tworzymy przyszłość

Aby błyskawicznie reagować na zmiany zachodzące w dziedzinie opieki i zdrowia, sami opracowujemy wszystkie nasze produkty. Wdrażanie innowacji i opracowywanie wizji opieki na przyszłość są celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, aby wspierać ich w realizacji codziennych zadań. Wdrażanie trendów przyszłości już w teraźniejszości jest naszą tradycją.

#### Nasze specjalizacje

Szpitalne

Domy opieki

Opieka domowa

Komfortowe łóżka

Systemy meblowe

Serwis



Grupa Stieglmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez markę Burmeier – również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi.

- Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym
- Ponad 1100 pracowników na całym świecie
- Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się we własnych zakładach
- Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech
- Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
- Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
- Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Polsce i RPA

Nasze marki

STIEGELMEYER

BURMEIER



## STIEGELMEYERGROUP

### Siedziba główna / Headquarters

---

Deutschland / Germany  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com

France  
**Stieglmeyer SAS**  
8 Allée des Chevreuils  
69380 Lissieu  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

South Africa  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**  
The Estuaries · Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl



Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej:  
Find your local partner on our website:  
[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)