


SARAYA Poland

Środek dezynfekujący do powierzchni Alpet D2

**Szybka i skuteczna
dezynfekcja otoczenia.
Kiedy liczy się czas, Alpet D2
jest po twojej stronie.**

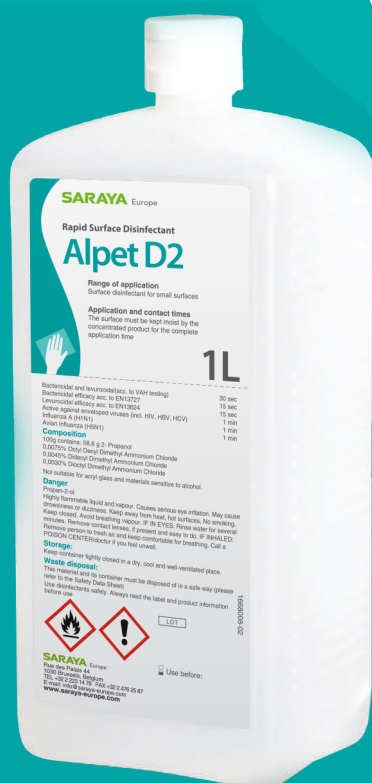

Alpet D2

Środek dezynfekujący do powierzchni

CECHY PRODUKTU

- Czas oddziaływania wynoszący 60 sekund usprawnia produktywność
- Bardzo aktywnie usuwa warstwy substancji biologicznych, tłuszczów i olejów
- Szybko odparowuje, chroniąc sprzęt wrażliwy na działanie wody
- Gotowy do użycia, nie trzeba go spłukiwać
- Działanie antybakteryjne / bakteriostatyczne pomaga utrzymać higienę

SKŁADNIKI AKTYWNE

Izopropanol: 58,6 %

Chlorek oktylo-didecyldimetyloamonu:
0,0075 %

Chlorek didecyldimetyloamonu:
0,0045 %

Chlorek dioktylo-dimetyloamonu:
0,0030 %

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd: przezroczysty, bezbarwny płyn

Zapach: Charakterystyczny zapach (alkoholu)

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed nałożeniem produktu należy wyczyścić wszystkie przedmioty, powierzchnie i sprzęt.
- Spryskiwać lub przecierać powierzchnie produktem Alpet D2 do momentu, aż będą całkowicie zmoczone.
- Pozostawić środek dezynfekujący na powierzchni przez 60 sekund.

BADANIA PRODUKTU

EN 1040 15 sek.

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa

EN 1275 15 sek.

- Candida albicans

prEN 13727 15 sek.

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae

EN13624 15 sek.

- Candida albicans

Metody DGHM 30 sek.

Ilościowa zawiesinowa metoda
(na brudne powierzchnie)

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Candida albicans

Metody DGHM 30 sek.

Dezynfekcja powierzchni – Ilościowe badanie z użyciem nośnika z działaniem mechanicznym
(na brudne powierzchnie)

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Candida albicans

Wirusy (Wytyczne DVV i RKI)

Wirus krowianki, szczep Estree* 60 sek.

Wirus wirusowej biegunki bydła (BVDV) 60 sek.

Wirus grypy typu A (H5N1) 60 sek.

Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV 1) 60 sek.

***Wytyczne DVV i RKI dotyczące markerów wirusowych dla „środków o ograniczonym działaniu wirusobójczym”.**

Należy bezpiecznie stosować środki dezynfekujące. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie

SARAYA Poland

ul. Zorzy 1, Klaudyn 05-080, Poland
TEL +48 22 817 90 55 - FAX +48 22 817 90 64

E-mail: handel@saraya.pl

www.saraya.pl