


F&P *myAIRVO 2*

Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu **myAIRVO™ 2**

Urządzenie myAIRVO 2 generuje wysokie przepływy ogrzanej i nawilżonej mieszanki powietrza i tlenu, która jest dostarczana do pacjenta za pomocą różnych nosowych i tracheostomijnych części kontaktujących się z pacjentem oraz masek.

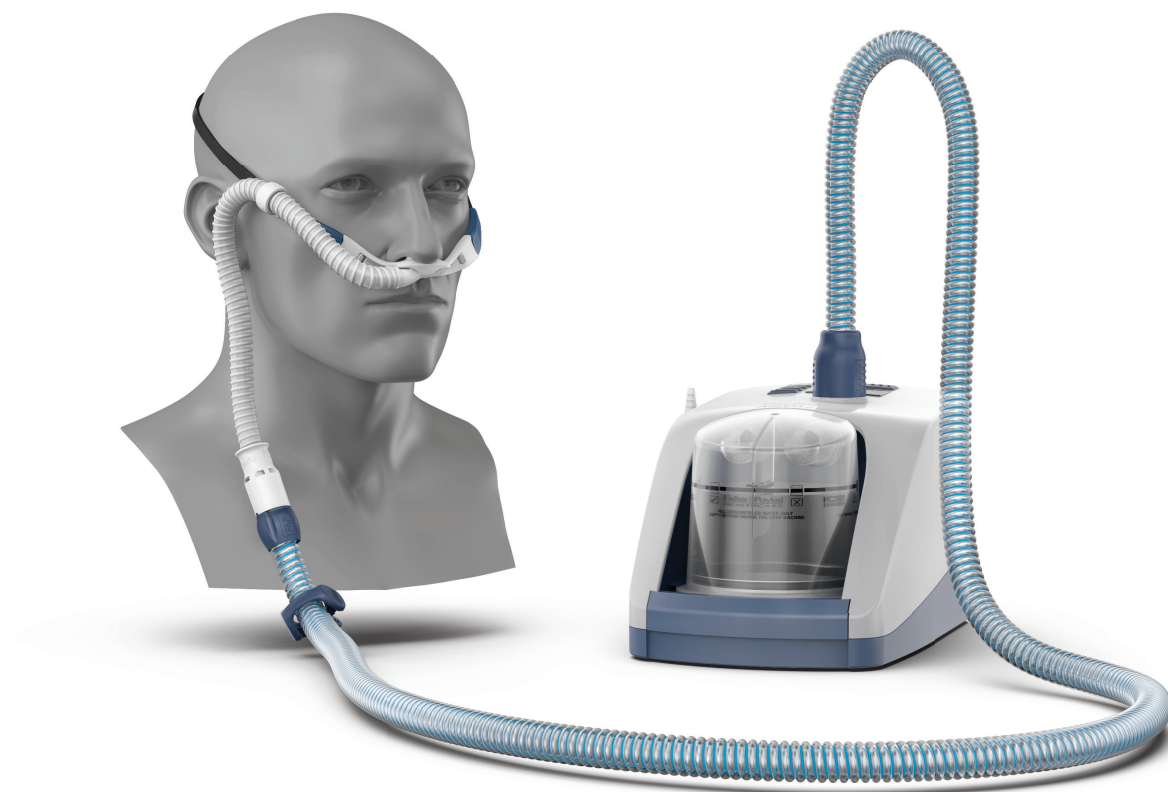

myAIRVO 2 | FUNKCJE

Dzięki wbudowanemu generatorowi przepływu oraz innowacyjnemu systemowi podawania tlenu urządzenie myAIRVO 2 jest skutecznym i wszechstronnym rozwiązaniem zapewniającym korzyści wynikające z nawilżania dla pacjentów w domach i ośrodkach opieki długoterminowej.

Wysoka wydajność

- Zaprojektowane, aby przewyższać standard ISO w zakresie nawilżania dróg oddechowych
- Ciche działanie w dzień i w nocy
- Do 15 L/min dodatkowego tlenu


Uniwersalność

- Różnorodność części kontaktujących się z pacjentem Optiflow™ przeznaczonych do dróg oddechowych oraz pominięcia dróg oddechowych
- Szeroki zakres przepływu: 2 - 60 L/min

Konfiguracja i stosowanie

- Menu ustawień na wyświetlaczu
- Zintegrowana opcja mieszania O₂ z koncentratora lub butli
- Wbudowany czujnik O₂
- Sondy lub zewnętrzne źródła powietrza nie są wymagane

AKCESORIA

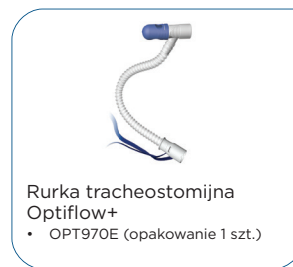

NAWILŻACZ Z WBUDOWANYM GENERATOREM PRZEPŁYWU myAIRVO 2	
Przeznaczenie	Nawilżacz myAIRVO 2 służy do leczenia samodzielnie oddychających pacjentów, którzy skorzystaliby z podania im ograniczonych i nawilżonych gazów oddechowych o wysokim przepływie. Mogą to być na przykład pacjenci z ominięciem górnych dróg oddechowych. W zależności od części kontaktującej się z pacjentem, przepływ może wynosić 2 - 60 L/min. Urządzenie myAIRVO 2 jest przeznaczone dla pacjentów przebywających w domach oraz ośrodkach opieki długoterminowej.
Wylot wilgoci	Spełnia wymogi normy ISO 8185:2007
Ustawienia prędkości przepływu	Od 10 do 60 L/min (regulacja o 5 L/min) (domyślnie) Od 2 do 25 L/min (regulacja o 1 L/min) (tryb Junior)
Części kontaktujące się z pacjentem	Kaniule donosowe F&P Optiflow+ Rurki tracheostomijne F&P Optiflow+ Maski ze standardowym stożkiem medycznym 22 mm
Modele	PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK / PT100US / PT100AN / PT100JP / PT100KR
Wymiary	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 cala x 6,7 cala x 6,9 cala)
Masa	2,2 kg (4,8 funta) - tylko urządzenie 3,4 kg (7,5 funta) - zapakowane w torbę z akcesoriami
Parametry elektryczne	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (maks. 2,4 A) 220-240 V - 1,8 A (maks. 2,0 A)

Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, myAIRVO i Optiflow to znaki towarowe firmy Fisher & Paykel Healthcare.