




## INHALATOR MESH POCKET AIR

P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.

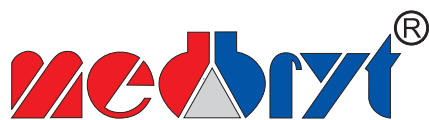

04-769 Warszawa, ul. Cylichowska 3

[www.medbryt.com.pl](http://www.medbryt.com.pl)  
e-mail: [office@medbryt.com.pl](mailto:office@medbryt.com.pl)

tel.: (+48 22) 846 55 94  
fax: (+48 22) 846 22 00

# INHALATOR POCKET AIR

**Pocket Air** to kieszonkowy inhalator, wykonany w nowoczesnej technologii mesh, zapewniający szybką i skuteczną depozycję leku w płucach. Kluczowym elementem inhalatora jest wibrująca membrana, generująca kroplę aerozolu o średnicy ok.  $<5\mu\text{m}$ . Inhalator Pocket Air w odróżnieniu od inhalatorów pneumatycznych (sprężarkowych) cechuje bezgłośna praca, możliwość prowadzenia inhalacji, także w pozycji leżącej oraz konstrukcja o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zasilanie z baterii zapewnia długi czas użytkowania oraz możliwość inhalacji w podróży.

## Zastosowanie:

- ✓ astma, mukowiscydoza, POChP, alergie
- ✓ częste infekcje dróg oddechowych
- ✓ rekonwalescencja po operacjach układu oddechowego
- ✓ zespół nieruchomych rzęsek
- ✓ zakażenia grzybicze układu oddechowego

## Zalety:

- ✓ sprawdzona, wiodąca technologia popularna na całym świecie
- ✓ skuteczna depozycja płucna - mała kropelka aerozolu
- ✓ nowoczesna membrana z materiału odpornego na zanieczyszczenia
- ✓ bezgłośna praca przyjazna dzieciom
- ✓ niska objętość rezydualna (martwa) - lek nie pozostaje w urządzeniu po inhalacji
- ✓ możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków - brak ograniczeń co do leków sterydowych
- ✓ możliwość przeprowadzenia inhalacji w podróży, na spacerze itp.
- ✓ możliwość inhalacji leżącego pacjenta
- ✓ konstrukcja wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ materiał utrudniający wyslizgnięcie się z ręki
- ✓ mały rozmiar - kieszonkowy
- ✓ łatwa obsługa
- ✓ jednoczęściowy nebulizator ułatwiający demontaż i czyszczenie
- ✓ dezynfekcja w gotowanej wodzie
- ✓ zasilacz do ładowania z sieci 230 V (opcja)
- ✓ łatwo wymienne baterie - paluszki
- ✓ wygodny pokrowiec
- ✓ niska cena i możliwość refundacji urządzenia dla chorych na mukowiscydozę
- ✓ gwarancja - 2 lata

## DANE TECHNICZNE:

- rozmiar aerozolu	$< 5 \mu\text{m}$	- wymiary DxWxH (mm)	78x41x73
- wydajność	0,25 ml / min	- waga (g)	74 (bez baterii)
- pojemność zbiorniczka	6 ml	- bateria	2 x AA lub NiMH
- częstotliwość drgania membrany	117 KHz	- tryb pracy	ciągły

## WYPOSAŻENIE:

- nebulizator	szt. 1	- pokrowiec	szt. 1
- maska dla dorosłych	szt. 1	- instrukcja obsługi	szt. 1
- maska dla dzieci (opcjonalna)	szt. 1	- zasilacz (opcjonalny)	szt. 1

**ZAPEWNIAMY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ CIĄGLĄ SPRZEDAŻ WSZYSTKICH CZĘŚCI.**