

Strzygarka chirurgiczna

Strzygarka chirurgiczna ME Medical jest bezprzewodowa i wyposażona w akumulator. Zestaw składa się ze strzygarki, stacji ładującej oraz wymiennych ostrzy jednorazowych. Strzygarka przeznaczona jest do usuwania owłosienia ze skóry pola operacyjnego.



Skuteczność i wydajność

- Dokładne i skuteczne usuwanie włosów
- Możliwość stosowania na sucho i mokro
- 2 typy ostrzy dla najwyższej jakości strzyżenia
- Czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora - 60 minut

Bezpieczeństwo


- Brak kontaktu ostrza tnącego z powierzchnią skóry - eliminacja ryzyka skaleczeń i zakażeń
- Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt - pewność strzyżenia z włosiem i pod włos
- Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja - możliwość mycia po bieżącą wodą, dezynfekcji w tym zanurzania w roztworze dezynfekcyjnym

Łatwa obsługa

- Indykator LED - ładowania, naładowania oraz rozładowania strzygarki
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicę
- Przycisk wysuwania ostrza - zdejmowanie ostrza jedną ręką
- Bateria bez efektu pamięci - możliwość doładowywania w dowolnym momencie
- Możliwość montażu stacji ładującej na ścianie

Trzyzakresowa obrotowa głowica: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo


Pozwala na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele

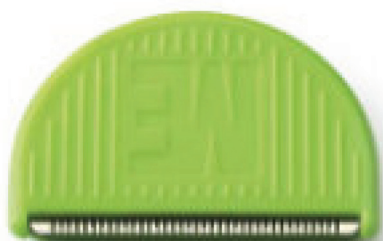

Ostrze uniwersalne

stosuje się na każdej powierzchni ciała

SC002

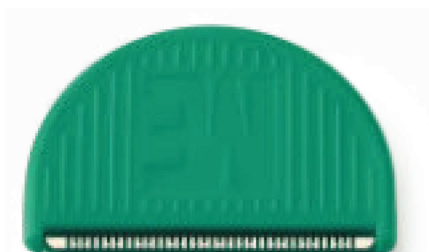

Ostrze Neuro

stosuje się do grubego i gęstego owłosienia np. na głowie lub klatce piersiowej

SC003

Nr. kat	Nazwa
SC001	Strzygarka chirurgiczna z ładowarką
SC002	Jednorazowe ostrze uniwersalne
SC003	Jednorazowe ostrze Neuro

