

ZAAWANSOWANY SYSTEM  
FRAKCYJNEJ RF MIKROIGŁOWEJ

# Secret<sup>RF</sup><sub>2.0</sub>

Secret RF<sup>®</sup> 2.0 jest światowym liderem wśród systemów medycznych wykorzystujących technologię frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej. Jest to jedyna na świecie platforma medyczna RF, która umożliwia wykorzystanie urządzenia zarówno w standardowych zabiegach frakcyjnego mikroigłowania RF, jak również na zastosowanie technik termo-koagulacyjnych, dzięki innowacyjnej głowicy Smartcure<sup>™</sup> wykorzystującej elektrody igłowe. Skuteczność i bezpieczeństwo działania systemu potwierdza certyfikat FDA.

FDA

CE



Creativeilooda

[www.euroscalemed.pl](http://www.euroscalemed.pl)



**EuroScaleMed**  
Dermatologia Estetyczna


## TECHNOLOGIA FRAKCYJNEJ RF MIKROIGŁOWEJ

**SECRET RF® 2.0** to zaawansowane technologicznie urządzenie medyczne doceniane na całym świecie, które oparte jest na synergistycznym połączeniu kontrolowanych bipolarnych fal radiowych RF z minimalnie inwazyjnym systemem mikronaktuwania.

### WYNIK BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO



### MECHANIZM DZIAŁANIA SECRET RF 2.0

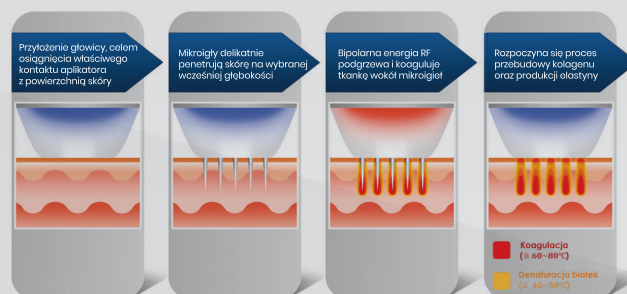

**SECRET RF® 2.0** w standardowych zabiegach liftingujących i ujędrniających doprowadza do wprowadzenia bardzo cienkich igieł na regulowaną głębokość między 0.5 mm a 3.5 mm, emitując przy tym falę radiową nagrzewającą tkankę wokół powierzchni igieł bez przegrzania skóry i bez ryzyka poparzeń. W wyniku wytworzenia energii w tkance dochodzi do powstania punktów koagulacji oraz kontrolowanych przegrzań, które zapoczątkowują proces regeneracji i tworzenia nowych struktur kolagenowych.

Doświadczenie bioinżynierów firmy ILOODA we współpracy z ośrodkami naukowymi zaowocowało stworzeniem drugiej wersji urządzenia SECRET RF 2.0, która dzięki dodatkowym funkcjom i dostępności większej ilości głowic oraz końcówek zabiegowych, umożliwia skuteczne i bezpiecznie wykorzystanie urządzenia w szerszej grupie wskazań.

### REZULTATY ZABIEGU SECRET RF® 2.0

- Bezoperacyjny lifting twarzy
- Redukcja zmarszczek i poprawa napięcia skóry
- Zmniejszenie porów
- Redukcja blizn potrądzikowych
- Leczenie rozstępów
- Leczenie nadpotliwości
- Leczenie trądziku, blizn oraz zamykanie naczyń krwionośnych

## W CZYM TKWI SECRET (RF 2.0®)

### 4 GŁOWICE ZABIEGOWE

**MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA W RÓŻNYCH WSKAZANIACH.**

**2 GŁOWICE** do zabiegów frakcyjnego mikroigłowania RF (Standard + High Speed)

**Zastosowanie:** odmładzanie, napięcie skóry, redukcja blizn, rozstępów, leczenie nadpotliwości

### Głowica Monopolarna


**Zastosowanie:** poprawa struktury skóry, redukcja zmarszczek



## Głowica SMARTCURE™

Zastosowanie:

- rozszerzone naczynia krwionośne
- trądzik
- blizny

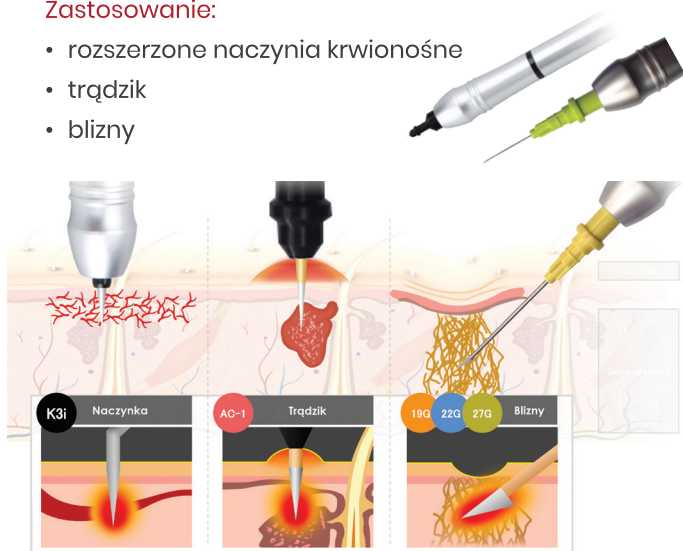

## IGŁY NIEIZOLOWANE I PÓLIZOLOWANE


Bezpieczeństwo i skuteczność działania systemu w różnych wskazaniach na różnych obszarach zabiegowych.

### IGŁY NIEIZOLOWANE

Niezwykle skuteczne i niewymagające kilku przejść nieizolowane mikroigły, pozwalają działać jednocześnie we wszystkich warstwach skóry. Wskazania: lifting, napięcie, poprawa struktury skóry, leczenie blizn potrądzikowych.

### IGŁY PÓLIZOLOWANE

Jedyny system na świecie z igłami półizolowanymi. Igły półizolowane pozwalają na wykonywanie bardzo skutecznych zabiegów w leczeniu rozstępów, blizn czy nadpotliwości przy zachowaniu wysokiego profilu bezpieczeństwa.

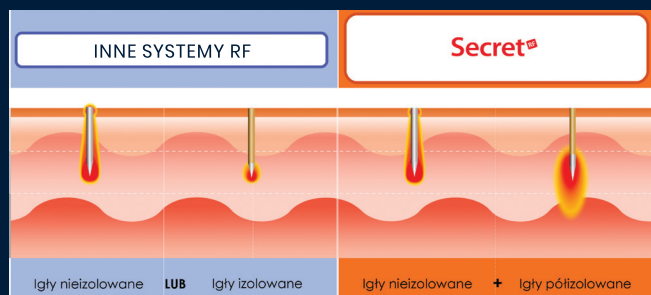

## SYSTEM SMOOTH NEEDLING™


Delikatny system wprowadzania igieł Smooth Needling™ zdecydowanie skraca okres rekonwalescencji i zmniejsza dyskomfort pacjenta podczas zabiegu.




## 3 RODZAJE TIPÓW

Możliwość wykonywania szybkich i precyzyjnych zabiegów w różnych obszarach zabiegowych na twarzy i ciele.

TIP Z 10 MIKROIGŁAMI - (1X10)

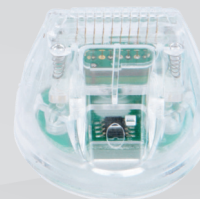

TIP Z 25 MIKROIGŁAMI - (5X5)

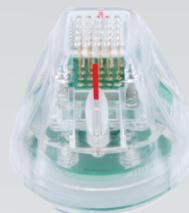


TIP Z 64 MIKROIGŁAMI - (8X8)



## OPTIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY IGŁAMI W MATRYCY ZABIEGOWEJ

Równomierna strefa przegrzania bez ryzyka niekontrolowanych poparzeń spowodowanych nakładaniem się fal radiowych.

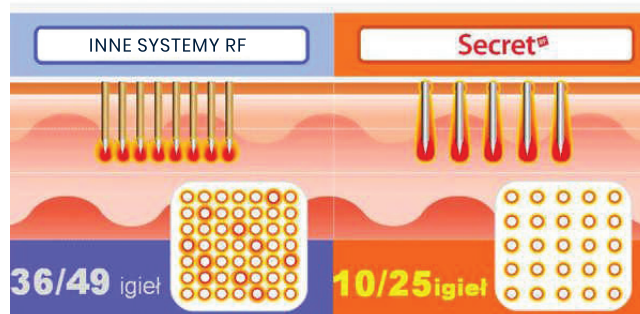

## INTUICYJNY, PROSTY W OBSŁUDZE PANEL STEROWANIA

Intuicyjny, przyjazny w obsłudze panel sterowania z predefiniowanymi parametrami zabiegowymi dla różnych obszarów i wskazań.



**Wysoka skuteczność zabiegów potwierdzona przez ekspertów z całego świata**

**Bezpieczeństwo poparte uzyskaniem certyfikatu FDA**

**Renomowany producent: ILOODA**

# SmartCure™

## SINGLE THERMO-COAGULATION TECHNOLOGY

Smartcure to inteligentne elektropióro, które umożliwia stosowanie różnych technik termo-koagulacyjnych w połączeniu z pojedynczą igłą do elektrolizy i różnymi kaniulami, w celu leczenia szerszej grupy wskazań, od rozszerzonych naczyń krwionośnych, po trądzik czy blizny przerostowe.



### K3i

Izolowana pojedyncza igła do elektrolizy (0,075 mm), K3i przeznaczona jest do leczenia rozszerzonych naczynek, pajęczaków, dostarczając energię ciepłą wyjątkowo w określone miejsce bez ryzyka uszkodzenia naskórka oraz otaczających tkanek.

Ø 0,075 (mm) izolowana igła do leczenia rozszerzonych naczynek



### AC-01

Izolowana pojedyncza igła AC-1 jest zaprojektowana specjalnie do leczenia trądziku i zmarszczek okołoooczodołowych. Jej odpowiednia długość 1,5 mm z izolowaną górną częścią igły może odpowiednio koagulować gruczoły łojowe bez uszkodzania warstwy naskórka. Dodatkowo dostarczając energię ciepłą do skóry będzie stymulować fibroblasty w celu poprawy napięcia i struktury skóry.

1,5mm izolowana igła do leczenia trądziku i zmarszczek.



### 27G/22G/19G

Technika chirurgicznego leczenia blizn i zmarszczek w połączeniu z energią RF zapewnia znaczną i długotrwałą poprawę wyglądu blizn przez wprowadzanie igły pod skórę i wykonywanie delikatnych ruchów równoległe do powierzchni skóry, między skórą właściwą, a tkanką podskórną.

Izolowane igły o różnej długości do leczenia blizn przerostowych.




# Mono-Polar

## NIEINWAZYJNA TECHNOLOGIA RF



Praca z głowicą monopolarną służy do nieinwazyjnego zabiegu odmładzania twarzy, dostarczając energię monopolarną o częstotliwości 2Mhz do płytkich i głębokich warstw skóry w celu stymulacji produkcji kolagenu.

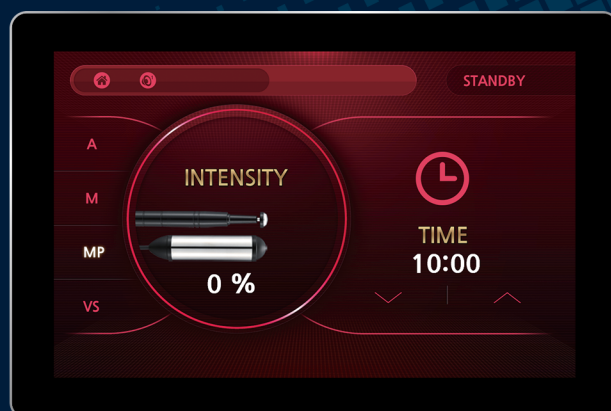

## PRZED I PO

### REDUKCJA ZMARSZCZEK



### POPRAWA NAPIĘCIA SKÓRY



### REDUKCJA BLIZN



### REDUKCJA BLIZN POTRĄDZIKOWYCH



## REFERENCJE



“Secret RF jest bardzo skuteczny w leczeniu blizn i w terapii anti-aging, z zaletami w postaci minimalnego okresu rekonwalescencji i bardzo wysokiej satysfakcji pacjenta.”

### Michael Naouri

Dermatology and Laser Center  
International Laser Skin Center  
Nogent sur Marne and Paris, France



“Secret RF to najlepsze rozwiązanie w przypadku leczenia trądziku oraz redukcji blizn. Dobrze działa na wszystkie kolory skóry, przy braku okresu wykluczenia.”

### Adrian Lim

MBBS, FACP, FACD Dermatologist and Vein Specialist  
Royal North Shore Hospital Republic Cosmetic  
Dermatology and Vein, Australia



“Wykazano, że Secret RF jest bardzo skuteczny w wielu wskazaniach, w tym w leczeniu rozstępów i nadpotliwości. Dodatkowo Secret RF okazuje się niezwykle bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem jako terapia samodzielna lub łączona z innymi zabiegami medycyny estetycznej do poprawy napięcia oraz struktury skóry.”

### Juri Kirsten

Dermatologist, Clinic for Aesthetic Operative  
Dermatology and Anti-aging Medicine,  
Berlin, Germany.

# Secret<sup>RF</sup><sub>2.0</sub>

## SPECYFIKACJA

Maskymalna moc	Max. 25W (10,25 pin); 70W (64 pin)
Częstotliwość RF	2 MHz
Intensywność	0-100% (krok co 10%)
Powtarzanie	0,2/0,5/0,8/1/2 sekundy/pojedynczy
Grubość igieł	0,25 mm
Konfiguracje igieł	10 igieł (1x10) / 25 igieł (5x5) / 64 igły (8x8)
Pole zabiegowe	25 igieł (10mmx10mm) / 64 igły (15mmx15mm)
Głębokość penetracji	0,5 - 3,5 mm (0,1 krok)
Czas emisji RF	50 ms - 950 ms

### Mono Polar RF

Częstotliwość RF	2 MHz
Typ elektrody	Monopolarna
Czas emisji RF	1-50 min (1 min krok)
Rozmiar elektrody	ø 15 mm

### SmartCure

Max. moc	9 W
Częstotliwość	2 MHz
Intensywność	0 - 100
Końcówki zabiegowe	19, 22, 27G, AC-1, K3i



Wyłączny dystrybutor: Euroscalemed Sp. z o.o.  
Łódź, ul. Szczecińska 61/67  
tel.: 42 612 20 04 / 42 652 01 28

www.euroscalemed.pl  
biuro@es-med.pl

 **EuroScaleMed**  
Dermatologia Estetyczna