



Skaner do wyszukiwania żył Vein Finder 50



**Przenośny skaner naczyń krwionośnych
umożliwiający szybką lokalizację żył w czasie
rzeczywistym.**

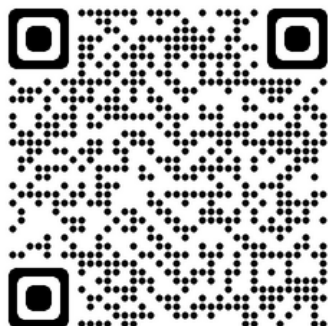

Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT SP. Z.O.O Telefon:+48 690 486 043.
Adres: Poznań ul. Abrahama 18 61-615 Polska
Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09

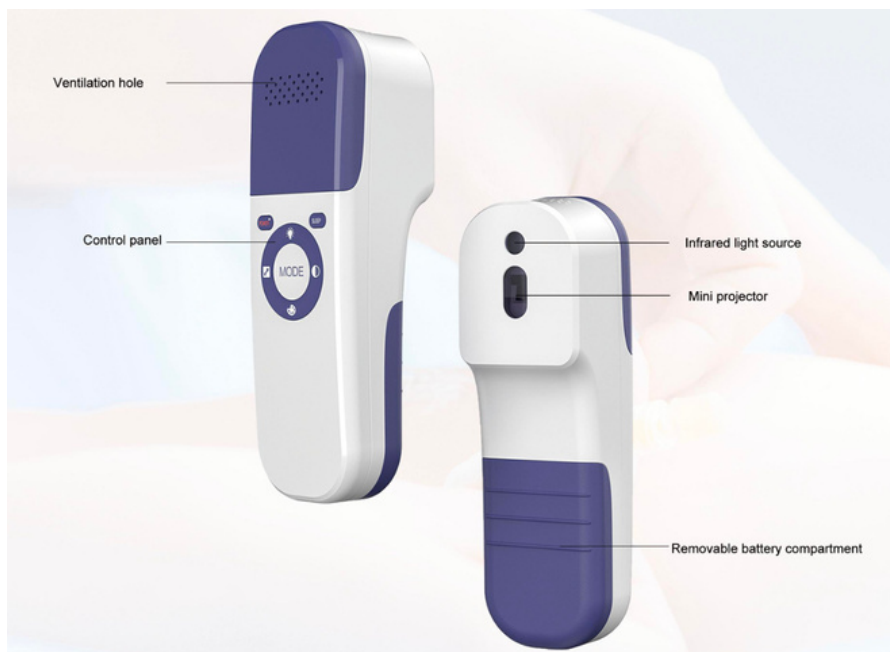

Skanery żył VEIN FINDER -to bezpieczne, bezinwazyjne, przenośne i podręczne urządzenia do iluminacji naczyń krwionośnych, które umożliwiają zlokalizowanie żył powierzchniowych. Bezdotykowe skanery naczyniowe są stosowane do uwidaczniania siatki. podskórnych naczyń krwionośnych .

Urządzenie do wykrywania naczyń krwionośnych występuje w wersji na statywie nabladowym, statywie mobilnym lub trzymanej w dłoniach.

Iluminatory naczyniowe emitują światło podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe. Światło podczerwone wykorzystywane jest do lokalizacji żył podskórnych pozycji na skórze. Wizualizacja żył skaner Vein Finder dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi. Vein Finder to nowa technologia pomagająca pracownikom służby zdrowia, kosmetologom w identyfikacji żył, która pomaga w zmniejszeniu liczby zranień igłą. Wiele pielęgniarek, kosmetologów ma trudności ze znalezieniem żyły, dlatego skaner to technologia, która eliminuje powszechne problemy w czasie diagnostyki, leczenia lub zabiegu kosmetologicznego. Zastosowani w oddziałach ratunkowych, ambulatoryjnych, pediatrii, geriatrici, OIOM, DPS-ach dermatologii, centrach hemodializy i kosmetologii.



Skaner Vein Finder posiada funkcje zdefiniowane przez użytkownika, które można dostosować do różnych grup wiekowych, kształtów ciała, koloru skóry lub wagi ciała.

- 7 dostępnych kolorów: Nadaje się do różnych kolorów skóry, tatuaży, mocno zniszczonej skóry.
- 3 dostępne rozmiary wyświetlania odpowiednie dla dorosłych, dzieci i noworodków.
- 5 poziomów jasności wyświetlany obraz ustawiamy do najbardziej komfortowej jasności.
- Odwrócenie kolorów, pozwala zmniejszyć interferencję włosów na ramionach i rozjaśnić naczynia krwionośne.
- Tryb wzmocnienia obrazu zwiększa przejrzystość wykrywania naczyń krwionośnych.

Wykrywanie światłem podczerwonym wykonywane jest bez szkody dla ludzkiego ciała.



Skaner Vein Finder jest profesjonalnym Wyrobem Medycznym posiadający min. Certyfikat FDA oraz CE. Na dziś skaner naczyń krwionośnych powinien być podstawowym narzędziem pracy w Gabinetach Medycyny Estetycznej i Placówkach Medycznych.

Zasilanie ładowania : 5V 2.0A, 100V-240V
50Hz-60Hz

Waga: 280g

Rozmiar : 20 x 6 x 6,5 cm

Poziom hałasu: < 20db

Bateria: Bateria litowa wielokrotnego działania Panasonic 3400mA

Czas pracy: 3 h

Głębokość wykrywania : 8 mm

Odległość wykrywania: 15-25 cm

Dokładność położenia naczyń :± 0,5 mm

Stan baterii :może być wyświetlany w górnej części wyświetlanego obrazu.

Komunikat o niskim stanie baterii: tak
Amerykańska technologia projekcji :DLP.

Opcjonalnie : stojak na kółkach, stojak biurkowy

Gwarancja : 12 miesięcy

Certyfikacja:

Wyrób Medyczny Klasy I 93/42 EEC ,CE
EN ISO 13485:2016



Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT SP. Z.O.O Telefon:+48 690 486 043.

Adres: Poznań ul. Abrahama 18 61-615 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09