

## 2 Version with 2 side holes



### Silaro Set

adapted to  
0.035 inch guide wire

∅ Katheter cathéter catheter	↔ Katheter cathéter catheter	∅ Füllmenge contenance capacity	∅ Dilatator dilata-teur dilator	∅ Splitschleuse gaine pelable splitsheath	∅ Bestell-Nr. référé- order-code
CH	cm	ml	CH	CH	
10	40	1,5	8 / 10	12	1340-1003
12		2,0	8 / 10 / 12	14	1340-1203
14		3,0	8 / 10 / 12 / 14	16	1340-1403

- Füllung: 10%ige Glycerinlösung (nicht enthalten) / remplissage: solution de glycérine à 10% (non comprise dans la livraison) / filling: 10% glycerine solution (not included)
- Verpackungseinheit: 5 Stück / conditionnement : 5 unités / box: 5 units

### Silaro Wechselset / Einzelkatheter Silaro kit d'échange / cathéter seul Silaro exchange set / single catheter

adapted to  
0.035 inch guide wire

∅ Katheter cathéter catheter	↔ Katheter cathéter catheter	∅ Füllmenge contenance capacity	Wechsel-Set kit d'échange exchange set	Einzelkatheter cathéter seul single catheter
CH	cm	ml	order-code	order-code
10	40	1,5	1346-1003	1347-1003
12		2,0	1346-1203	1347-1203
14		3,0	1346-1403	1347-1403
16		5,0	1346-1603	1347-1603
18		5,0	1346-1803	1347-1803

- Füllung: 10%ige Glycerinlösung (nicht enthalten) / remplissage: solution de glycérine à 10% (non comprise dans la livraison) / filling: 10% glycerine solution (not included)
- Verpackungseinheit: 5 Stück / conditionnement : 5 unités / box: 5 units

## 4 Version with 4 side holes



### Silaro Set

adapted to  
0.035 inch guide wire

∅ Katheter cathéter catheter	↔ Katheter cathéter catheter	∅ Füllmenge contenance capacity	∅ Dilatator dilata-teur dilator	∅ Splitschleuse gaine pelable splitsheath	∅ Bestell-Nr. référé- order-code
CH	cm	ml	CH	CH	
10	40	1,5	8 / 10	12	1360-1003
12		2,0	8 / 10 / 12	14	1360-1203
14		3,0	8 / 10 / 12 / 14	16	1360-1403

- Füllung: 10%ige Glycerinlösung (nicht enthalten) / remplissage: solution de glycérine à 10% (non comprise dans la livraison) / filling: 10% glycerine solution (not included)
- Verpackungseinheit: 5 Stück / conditionnement : 5 unités / box: 5 units

### Silaro Einzelkatheter Silaro cathéter seul Silaro single catheter

adapted to  
0.035 inch guide wire


∅ Katheter cathéter catheter	↔ Katheter cathéter catheter	∅ Füllmenge contenance capacity	Einzelkatheter cathéter seul single catheter
CH	cm	ml	order-code
10	40	1,5	1362-1003
12		2,0	1362-1203
14		3,0	1362-1403
16		5,0	1362-1603
18		5,0	1362-1803
20		5,0	1362-2003
22		5,0	1362-2203

- Füllung: 10%ige Glycerinlösung (nicht enthalten) / remplissage: solution de glycérine à 10% (non comprise dans la livraison) / filling: 10% glycerine solution (not included)
- Verpackungseinheit: 5 Stück / conditionnement : 5 unités / box: 5 units

10-22  
CH Ø

.035i  
guide wire

nephrostomy  
balloon catheter  
for percutaneous  
kidney drainage

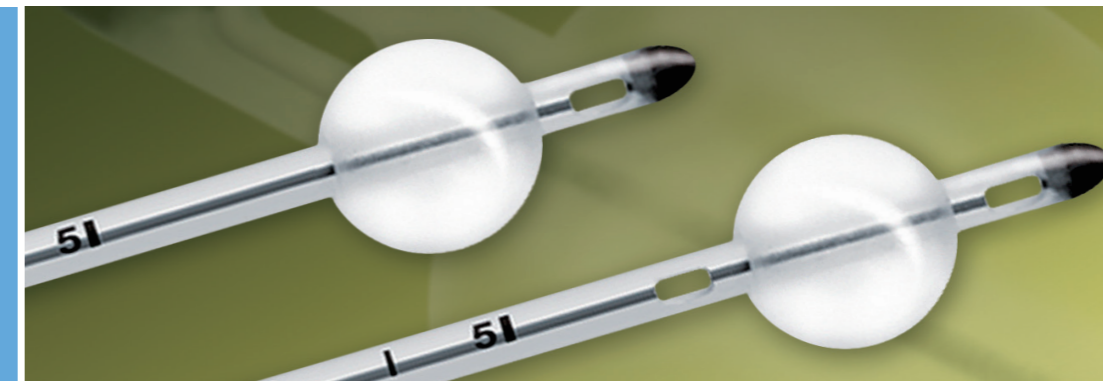

**INTEGRAL BALLOON WITH 2 OR 4 SIDE HOLES**

# Silaro





- zur perkutanen Nierendrainage
- Ballonkatheter mit Integralballon, Röntgenstreifen und konischer röntgendichter Spitze
- adaptiert auf 0,035 inch Führungsdraht



- Pour la néphrostomie percutanée
- Cathéter à ballonnet avec ballonnet intégral, graduations et extrémité distale atraumatique radio-opaques
- Guide de 0,035i



- for percutaneous kidney drainage
- balloon catheter with integral balloon, radiopaque stripes and tapered tip
- adapted to 0.035 inch guide wire

**Wechsel-Set**  
kit d'échange  
exchange set

Silaro Ballonkatheter, Silikon, Länge 40 cm  
cathéter à ballonnet Silaro, silicone, longueur 40 cm  
Silaro balloon catheter, silicone, length 40 cm

Hohlmandrin  
mandrin creux (obturateur)  
stiffening cannula

Katheterstopfen  
fasset pour sonde  
catheter plug

**Set**

2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm (17,5 G), Länge 200 mm  
aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm (17,5 G), longueur 200 mm  
puncture needle, 2-part, US-cut, Ø 1.3 mm (17.5 G), length 200 mm

Splitschleuse mit Dilatator, Länge 20 cm  
gaine pelable avec dilateur, longueur 20 cm  
split sheath with dilator, length 20 cm

Dilatator, Länge 20 cm  
dilateur, longueur 20 cm  
dilator, length 20 cm

Schüller Wechseldraht, flexibles Ende, rigider Schaft (40 cm), flexible Spitze (10 cm), 3 mm J-gebogen, .035 inch, Länge 90 cm  
fil-guide d'échange selon Schüller, extrémité flexible, gaine rigide (40 cm), pointe flexible (10 cm), recourbée en J de 3 mm, .035 inch, longueur 90 cm  
Schueller exchange wire, flexible end, rigid shaft (40 cm), flexible tip (10 cm), 3 mm J-curved, .035 inch, length 90 cm

14F - 3cc

20 15 10 5

deflated

inflated

1 cm

Röntgenstreifen  
bande radio-opaques  
radiopaque stripes

Integralballon  
ballonnet intégral  
integral balloon


konische röntgendichte Spitze  
design effilé de la pointe, radio-opaques  
tapered radiopaque tip



## Version with 2 side holes

2

- 2 große Seitenaugen vor dem Integralballon für eine hohe Drainagekapazität
- 2 grands orifices latéraux devant le ballonnet intégral pour une haute capacité de drainage
- 2 large sideholes in front of the integral balloon for high drainage capacity

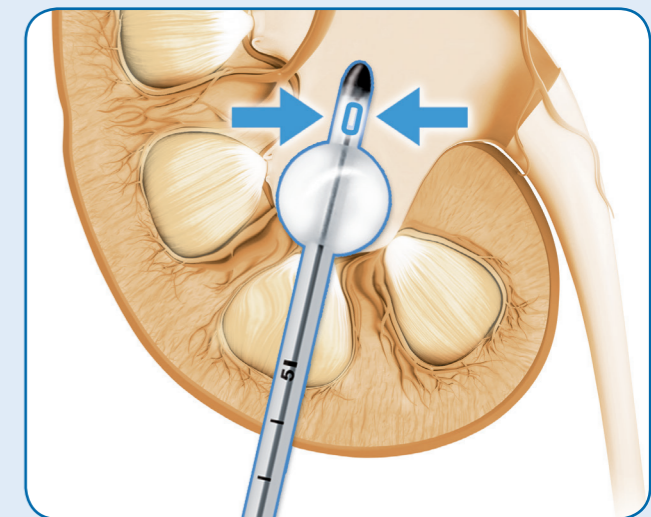

## Version with 4 side holes

4

- 2 zusätzliche große Seitenaugen hinter dem Integralballon zur besseren Kelchdrainage
- 2 grands orifices latéraux supplémentaires derrière le ballonnet intégral, pour un meilleur drainage des calices rénaux
- 2 additional large side holes behind the integral balloon for a better drainage of the renal calices

