



EYEMAX

JEDNORAZOWY WIDEOCHOLANGIOSKOP



EYEMAX JEDNORAZOWY WIEDOCHOLANGIOSKOP

WIZUALIZACJA DO DIAGNOZOWANIA I LECZENIA W CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ

- Niezawodna procedura niskiego ryzyka w diagnostyce i leczeniu ostrych lub przewlekłych chorób dróg żółciowych i trzustki
- Mniejsza ekspozycja na promieniowanie w porównaniu do standardowego ERCP
- Wysoka rozdzielczość obrazu umożliwia większą precyzję w diagnostyce, biopsji i w zabiegach związanych z usuwaniem kamieni, zwężeń, infekcji i guzów
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi urządzeniami EHL



CHOLANGIOSKOP


WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ, KĄT WIDZENIA 120

- Ulepszone pobieranie próbek i usuwanie ciał obcych
- Najlepszy widok dla łatwej i skutecznej litotrypsji
- Wąska średnica zewnętrzna ułatwiająca pokonywanie zwężeń




POLE WIDZENIA W 4 STRONY

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY

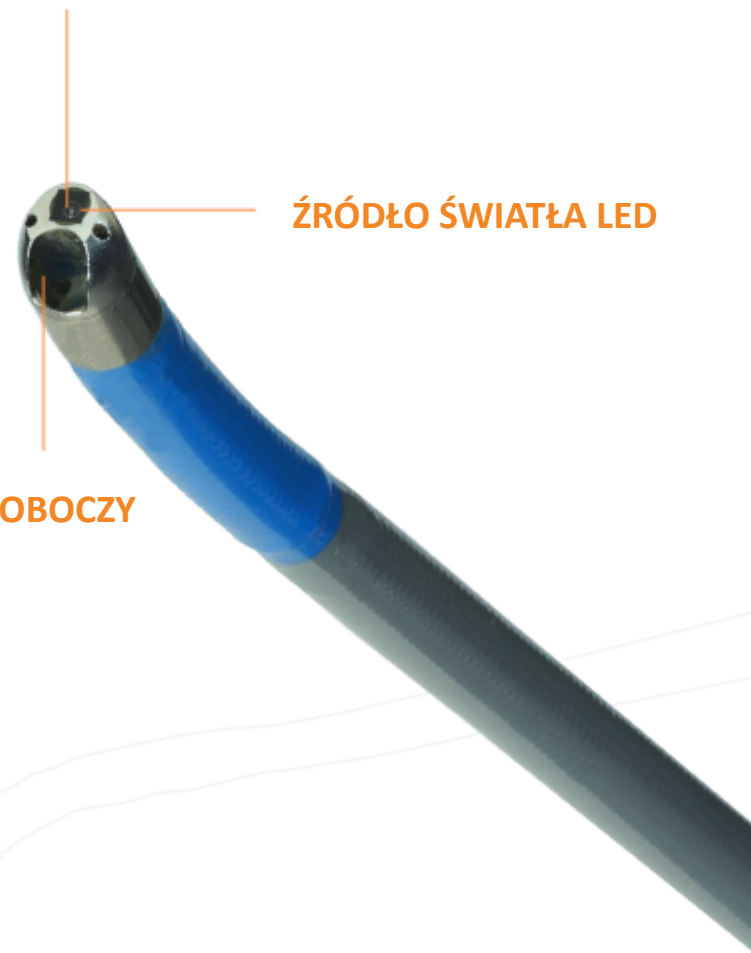

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED

DUŻY KANAŁ ROBOCZY

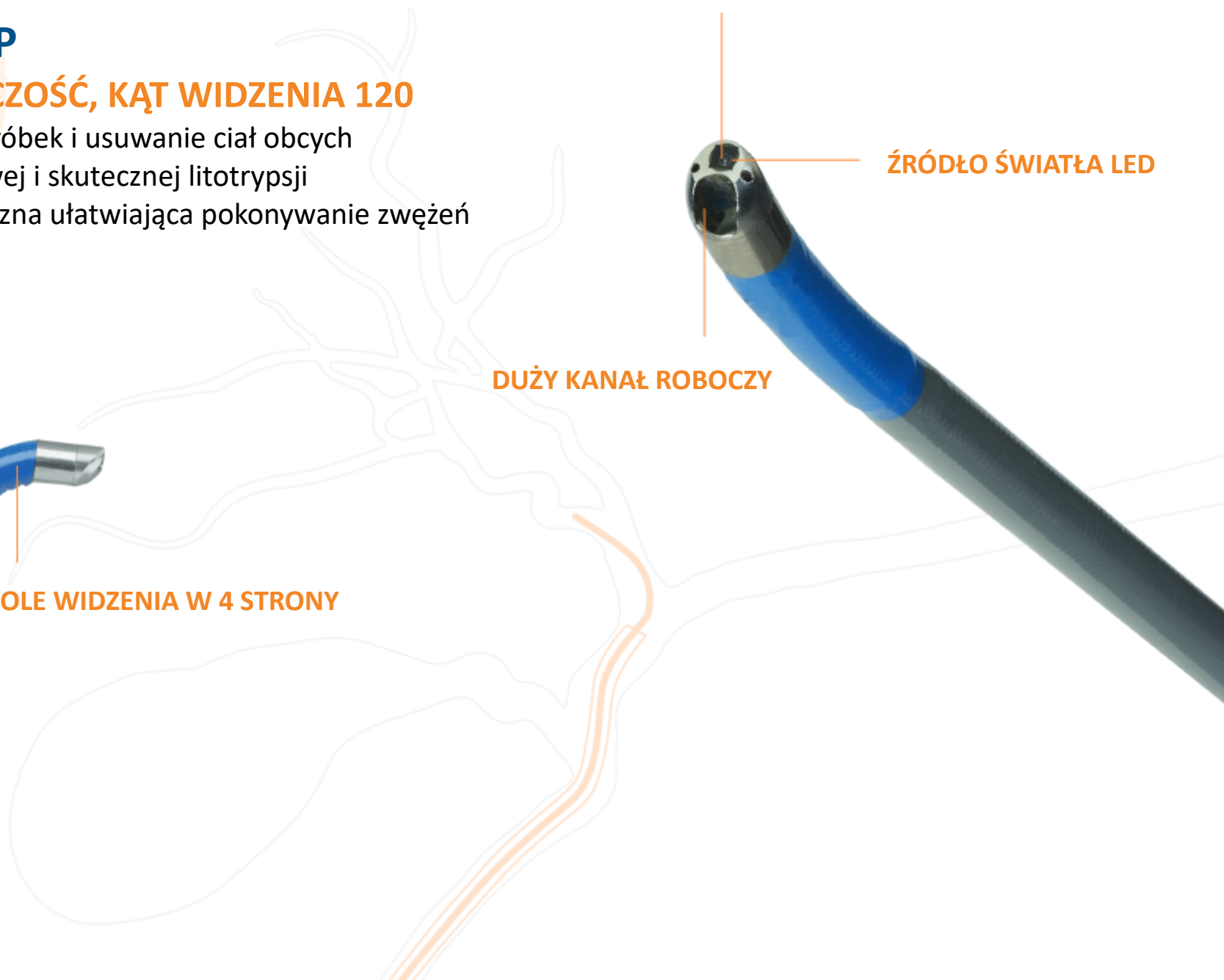



DOSTĘP DO KANAŁU
ROBOCZEGO Z
BLOKADĄ LUER-LOCK

FUNKCJA BLOKADY DO
ZABEZPIECZENIA KĄTA



MOCOWANIE
DO SZELEK

PRZYCIŚK ZAMROŻENIA OBRAZU, BY
MÓC DOKŁADNIE PRZEANALIZOWAĆ
WYŚWIETLANY OBRAZ



POKRĘTŁO USTAWIENIA KĄTA
RUCHU DYSTALNEGO
GÓRA/DÓŁ I LEWO/PRAWO




PORT PODŁĄCZENIA
ENDOSKOPU

INTUICYJNA OBSŁUGA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Cholangioskop EYEMAX zapewnia doskonałą rozdzielczość i jakość obrazu pozwalającą na wysokiej jakości wizualizację dróg żółciowych i trzustkowych, co może zmniejszyć liczbę badań.

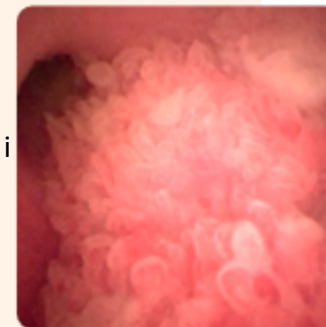

WYSOKO WYDAJNY PROCESOR

WYDAJNE PRZETWARZANIE OBRAZU

- Jakościowy transfer obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości
- Przyjazna dla użytkownika obsługa
- Powiększenie obrazu do 3x
- Regulowany wyświetlacz obrazu

SZELKI

DLA MAKSYMALNEGO KOMFORTU UŻYTKOWNIKA

- Ergonomiczna alternatywa dla standardowego uchwytu
- Ulga podczas dłuższych badań, ponieważ cholangioskop i duodenoskop nie muszą być trzymane w jednej ręce.
- Gwarantowana obsługa cholangioskopu jedną ręką



Bezpieczne mocowanie zapewnia zaczep na rękojeści cholangioskopu i mocowanie do szelek.



Cholangioskop jest zaczepiony i przymocowany do szelek, aby umożliwić obsługę jedną ręką.



KOMPATYBILNE AKCESORIA

DLA UDANEGO ZABIEGU

- Duży kanał roboczy o średnicy 1,2 mm lub 2,0 mm do pobierania wiarygodnych próbek oraz ułatwiający ich pobieranie
- Łatwe wprowadzanie kleszczyków nawet przy wygiętym endoskopie dzięki krótkiej, sztywnej końcówce dystalnej kleszczyków
- Przez kanał roboczy można przeprowadzać nie tylko irygację, ale również wstrzykiwanie płynów



SPECYFIKACJA

KOD	Max śr. kateteru	Max śr. kanału	Długość kanału roboczego w mm
CHOLANGIOSKOP Z SZELKAMI			
CDS11005-1	3,9	2	650
CDS11006-1	3,9	2	2200
CDS22005-1	3,2	1,2	650
CDS22006-1	3,2	1,2	2200

REF	Interfejs	Zasilanie	Wymiary w mm	Waga
PROCESOR				
BS-W-100	DVI-D, kompozytowy	230V	355x297x107	6kg

REF	Min. \varnothing kanału roboczego	Długość w mm	Szerokość otwarcia w mm	Szczęka \varnothing w mm	Igła	Pokrycie	Typ
AKCESORIA (KLESZCZE)							
BF10001	1,1	1200	3	1	Bez	PTFE	Aligator
BF10006	1,1	2900	3	1	Bez	PTFE	Aligator
BF16001	1,8	1200	4,5	1,6	Bez	PE	Aligator
BF16006	1,8	2900	4,5	1,6	Bez	PE	Aligator