

TRANSCEND™



Krzesło schodowe **Transcend™** zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w trakcie transportu pacjenta po schodach. Konstrukcja umożliwia przenoszenie obciążeń do 250 kg. System szyn zwiększa bezpieczeństwo transportowanego pacjenta, jednocześnie zmniejszając obciążenie personelu i ryzyko urazu.

- **5-pozycyjny wysuwany drążek i uchwyty** zmniejszają obciążenie podczas podnoszenia i zapewniają maksymalną kontrolę operatorom o różnym wzroście
- **Zestaw do konwersji PowerTraxx** umożliwia bezwysiłkowy wjazd do góry i zjazd w dół za pomocą elektrycznego systemu trakcyjnego



Technologia EZ GLIDE® zapewnia komfortową jazdę po niemal każdej powierzchni



Tylne uchwyty do podnoszenia o zwiększonej ergonomii do podnoszenia lub przenoszenia krzesła



Uchwyt na kropłówkę chowany w ramie krzesła



Składany podnóżek zapewnia dodatkowe podparcie i komfort dla pacjentów



ParaMedica
POLSKA

Autoryzowany dystrybutor i serwis

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39, e-mail: handlowy@paramedica.pl

www.paramedica.pl

Specyfikacje



WYSOKOŚĆ (MIN.)	36 in 90,8 cm
WYSOKOŚĆ (MAKS.)	60 in 151,8 cm
SZEROKOŚĆ (CAŁKOWITA)	20 in 50,5 cm
SZEROKOŚĆ (SIEDZISKO)	16 in 40,8 cm
GŁĘBOKOŚĆ (PRZÓD-TYL)	30 in 76 cm
DŁUGOŚĆ (PO ZŁOŻENIU)	36 in 91,2 cm
SZEROKOŚĆ (PO ZŁOŻENIU)	20 in 50,7 cm
GŁĘBOKOŚĆ (PO ZŁOŻENIU)	7,9 in 20 cm
WAGA (WER. Z GĄSIENICAMI)	32 lb 14,7 kg
WAGA (WER. DO PRZENOSZENIA)	28 lb 12,7 kg
LIMIT OBCIĄŻENIA	550 lb 250 kg

Cechy i zalety

- **Aluminiowa i anodyzowana konstrukcja ramy** zapewnia trwałość i długą żywotność
- **Płynnie obracające się 5-calowe przednie koła i bardzo wysokie 8-calowe koła tylne** ze zintegrowanymi oponami amortyzującymi, które poruszają się po nierównym terenie i nie zbierają zanieczyszczeń
- **Jednocalowy luz między gąsienicą a podłożem** zapewnia płynne toczenie po dywanie i nierównych powierzchniach, a także łatwiejsze zjeżdżanie po schodach
- **Wysuwany podnóżek i niższy kąt nachylenia ślizgów** zwiększają poczucie bezpieczeństwa pacjenta
- **Powierzchnia siedziska pacjenta** jest wyprofilowana i ma zdejmowane, formowane wtryskowo panele siedziska
- **Mechanizm blokowania zawiasowego** zapewnia, że krzesło jest zabezpieczone w pozycji złożonej przy przenoszeniu lub składowaniu



Jeżeli szukają Państwo **krzesła ewakuacyjnego**, a nie krzesła schodowego, przeznaczonego do używania przez profesjonalnych ratowników medycznych, prosimy zapytać przedstawiciela handlowego firmy Paramedica Polska o linię krzeseł ewakuacyjnych i rozwiązań firmy FERNO.

Akcesoria i opcje

AKCESORIA DO OBSŁUGI PACJENTÓW



Zagłówek
Nr 0822023



Tylne uchwyty do podnoszenia
Nr 0822028



Zestaw pasów
Nr 0822024



Uchwyt na tlen
Nr zestawu 0822053

OPCJE KRZESŁA SCHODOWEGO TRANSCEND



Blokady kół




Wysuwany drążek do podnoszenia



Podnóżek



Podłokietniki

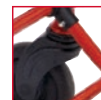

Koła trójramienne



Tylne uchwyty do podnoszenia



Prowadnica gąsienicowa



Elektryczny system płożowy o wadze 10,6 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.



ParaMedica
POLSKA

Autoryzowany dystrybutor i serwis

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39, e-mail: handlowy@paramedica.pl

www.paramedica.pl