

VX 36

Wykonuj pomiary
soczewek łatwo i
precyzyjnie



Dioptriomierz automatyczny z pomiarom transmisji światła niebieskiego


Nowa generacja dioptriomierzy mierzy transmisję światła niebieskiego i oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, umożliwiając łatwe i precyzyjne pomiary soczewek.



| vx 36

Automatyczny i łatwy


Dioptriomierz VX 36 oferuje:

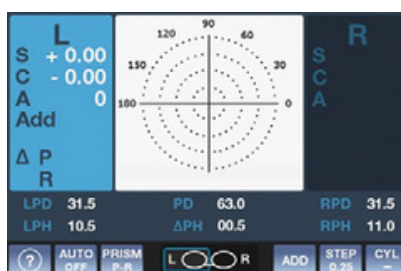

1

Tryb soczewki

- Ten tryb umożliwia pomiar mocy soczewek, zarówno oprawionych, jak i nieoszlifowanych.

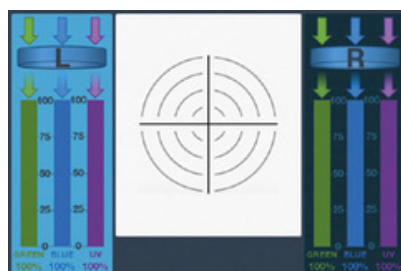

2

Tryb UV z pomiarem transmisji światła niebieskiego

- Tryb ten umożliwia pomiar przepuszczalności światła w zakresie światła niebieskiego (HEV) i ultrafioletowego.



3

Wyświetlacz soczewek

- Szablon w skali 1:1 ułatwiający dobór właściwego rozmiaru soczewki i dopasowanie do właściwego PD.

4


Elastyczną integrację

- Łączność z kompatybilnymi urządzeniami jest możliwa poprzez WIFI lub port szeregowy.

Zintegruj z systemem urządzeń Visionix i oprogramowaniem EMR*

- Pełny panel danych do zarządzania z urządzeń zewnętrznych (EMR/ARK)
- Bezprzewodowy import danych z innych urządzeń (takich jak AR/K i dioptriometry) za pośrednictwem VXbox
- Eksport danych refrakcji do systemu EMR za pomocą jednego przycisku

* Elektroniczna dokumentacja pacjenta

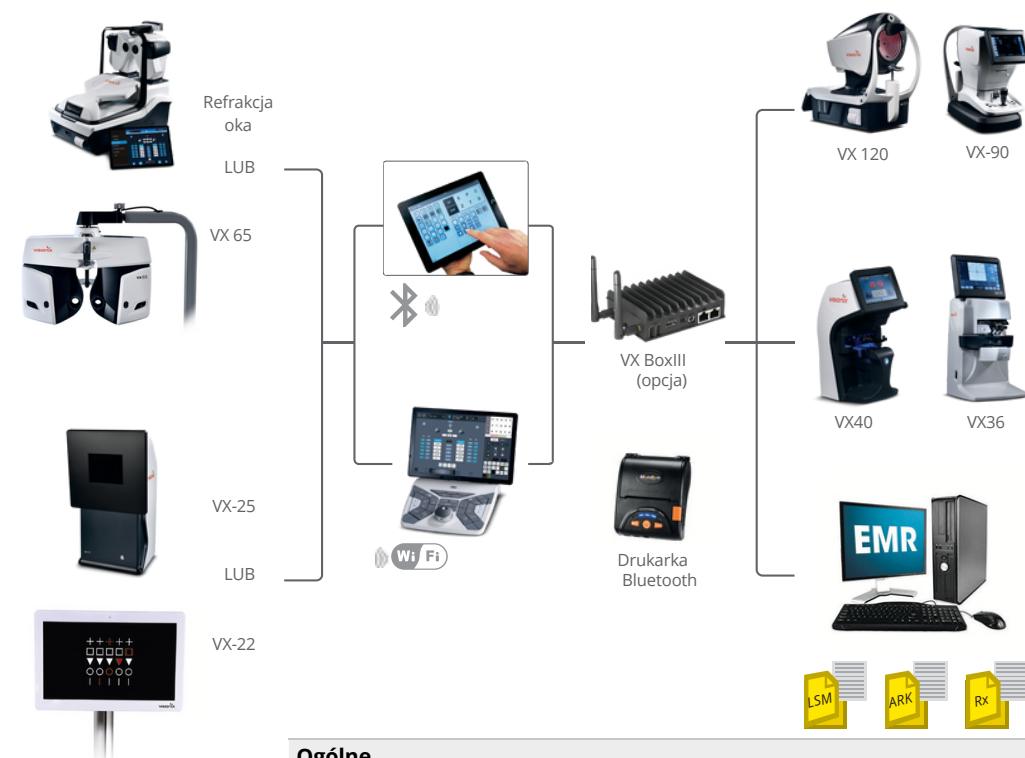

Wymiary:

SZEROKOŚĆ	233 mm (9,2 cala)
DŁUGOŚĆ	203 mm (8 cali)
WYSOKOŚĆ	471 mm (18,5 cala)
WAGA	4,5 kg (9,9 funta)

Normy:

VX 36 spełnia wymagania następujących dyrektyw:
 Dyrektywa EMC: 2014/30/UE
 Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/35/UE
 Dyrektywa ROHS2: 2011/65/UE

Ogólne

Wyświetlacz	800 x480 ekran dotykowy TFT
Drukarka	57 mm Drukarka termiczna
Źródło zasilania / pobór mocy	110 V-240 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa	35 VA

Zakres pomiaru

Zakres pomiaru sfery	-25,00 D do +25,00 D (krok: 0,01D/0,06D/0,12D/0,25D)
Zakres pomiaru cylindra	0D do +/- 10D (krok: 0,01D/0,06D/0,12D/0,25D)
Zakres pomiaru osi cylindra	0° do 180° (krok: 1°)
Zakres pomiaru addycji	0D do +10D (krok: 0,01D/0,06D/0,12D/0,25D)
Zakres pomiaru pryzmatu	0 do 20△
Tryb pomiaru	Współrzędne prostokątne X-Y Współrzędne biegunowe P-B Krok: 0,01△

Mierzalna średnica soczewki	φ10 mm do φ90 mm
Zakres pomiaru PD	42mm do 82mm
Zakres pomiaru PH	8 mm do 45 mm
Pomiar obserwacji	Transmisja UV
Długość fali pomiarowej mocy wierzchołkowej	525nm
Długość fali pomiarowej UV-A	365nm



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

VISIONIX INTERNATIONAL SAS
2 Rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l'Arche - France
Tél. + 33 232 989 132 - Fax + 33 235 020 294
contact@visionix.com

www.visionix.com



ul. Szczepankowo 158 b
61-313 Poznań
tel. 61 670 70 41
e-mail: info@medicalpartner.com.pl
www.medicalpartner.pl

