

>> **Seria niskoprzepływową o wysokiej wydajności**

Dializator kapilarny



Dystrubucja w Polsce

NTM-MED S.C.

Tel: 514 029 646 Faks: 95 783 25 52

Siedziba główna

SHANDONG WEIGAO BLOOD PURIFICATION PRODUCTS CO., LTD.

Tel: +86 631 5660598 Fax: +86 631 5660598

Międzynarodowa siedziba firmy

WEGO HEALTHCARE (SHENZHEN) CO., LTD.

19F, Building 3, Sunmax Technology Plaza, No.8 Keyuan
Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Tel: +86 755 33892500 Fax: +86 755 33892508

E-mail: info@wego-healthcare.com

www.wego-healthcare.com/en





CKD-MBD stało się kluczowym zagadnieniem w globalnej dziedzinie

Globalny wskaźnik zachorowalności na PChN stale rośnie. Zaczynamy dostrzegać, że CKD-MBD wpływa na przebieg przewlekłej choroby nerek oraz na wyniki leczenia pacjentów dializowanych. Dlatego też CKD-MBD stało się kluczowym zagadnieniem na świecie. Organizacje KDIGO i K/DOQI opublikowały wytyczne dotyczące CKD-MBD.

Hiperfosfatemia jest niezależną przyczyną zgonu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN).


Badanie międzynarodowe prowadzone w wielu ośrodkach (DOPPS) wykazuje, że ryzyko zgonu u pacjentów rośnie wraz ze wzrostem stężenia wapnia i fosforu we krwi.

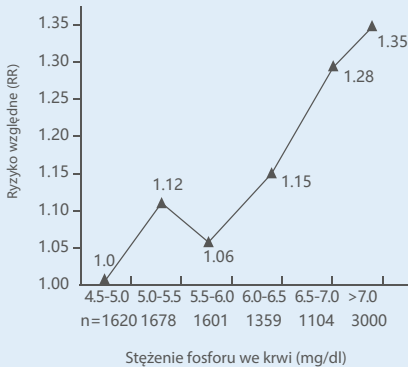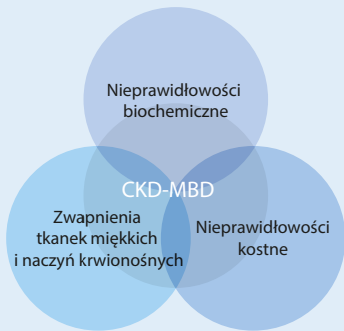

Cechy produktu


1. Lepsze usuwanie toksyn małocząsteczkowych

Lepsze usuwanie toksyn małocząsteczkowych poprawia jakość życia pacjentów oraz rokowanie.

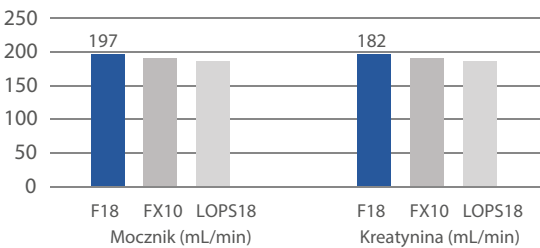


2. Mniejsza objętość napełniania

Użycie jednej torby soli fizjologicznej na zabieg może potencjalnie obniżyć koszty leczenia dializacyjnego.

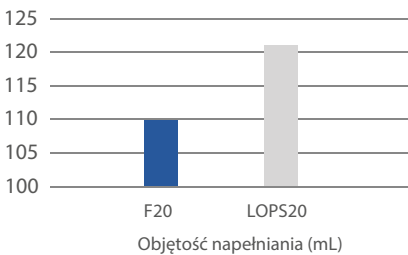

3. Skuteczna eliminacja fosforanów

Obniża poziom fosforu we krwi pacjentów i zmniejsza częstość występowania powikłań.

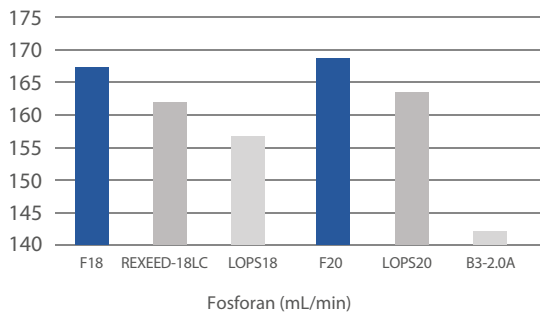

4. Doskonała biokompatybilność

Włókno membranowe z polisulfonu wykazuje doskonałą biokompatybilność oraz wysoką zdolność zatrzymywania endotoksyn.



Technical Specification

	Parametry działania in vitro	F15	F18	F20
	Współczynnik ultrafiltracji (mL/h·mmHg)	19	23	25
Q _s =200mL/min	Mocznik (mL/min)	193	197	199
	Kreatynina (mL/min)	177	182	184
	Fosforan (mL/min)	159	167	169
	Witamina B12 (mL/min)	109	121	128
	Mocznik (mL/min)	251	263	269
Q _s =300mL/min	Kreatynina (mL/min)	228	238	242
	Fosforan (mL/min)	196	208	214
	Witamina B12 (mL/min)	116	128	136
	Mocznik (mL/min)	284	302	310
Q _s =400mL/min	Kreatynina (mL/min)	252	267	273
	Fosforan (mL/min)	219	235	243
	Witamina B12 (mL/min)	124	138	146
	KoA mocznika (mL/min)	836	1010	1123
	Efektywna powierzchnia (m ²)	1.5	1.8	2.0
	Objętość komory krwi (mL)	78	100	110

Warunki testowe

Klirensy: QD = 500 mL/min, QF = 0 mL/min

KoA: QB = 300 mL/min, QD = 500 mL/min

Współczynnik ultrafiltracji: krew bydlęca, zawartość białka: 60±5 g/L, TMP: 100 mmHg

Grubość ścianki / Średnica wewnętrzna	40µm/200µm	Materiał membrany	Polisulfon
Maks. TMP	500mmHg	Obudowa	Poliwęglan
Metoda sterylizacji	Sterylizacja promieniowaniem	Związek zalewowy	Poliuretan
Opakowanie	24 szt. / karton	Pierścień uszczelniający	Medyczny silikon

Uwaga: Produkty z tej serii charakteryzują się wysoką wydajnością ultrafiltracji i przepuszczalnością. Należy stosować wyłącznie z urządzeniami do dializy wyposażonymi w funkcję kontroli ultrafiltracji.