

Jenny

**msw**  
ms westfalia

**PIERWSZY  
NA ŚWIECIE**

**MODUŁOWO  
HYBRYDOWY  
PUNKT OPIEKI**

**ROZWIĄZANIE PICK & PLUG**

WENTYLACJA. MONITORING. DEFIBRYLACJA.



**MEDIVERO**  
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



**reddot award  
winner**



**DESIGN  
AWARD**

# MODUŁOWA KONCEPCJA INTENSYWNEJ OPIEKI

WENTYLACJA. MONITORING. DEFIBRYLACJA.



RESPIRATOR

DEFIBRYLATOR

KARDIOMONITOR

RESPIRATOR KARDIOMONITOR





#### STACJA DOKUJĄCA

### CECHY

15,6" dotykowy wyświetlacz Jenny.

Pełny zestaw narzędzi łączności.

### KORZYŚCI

Jednopoziomowe sterowanie typu Cockpit Control, widok dzielonego ekranu (Split Screen), widok z dużej odległości (Wide distance view). Obsługa dotykowa w rękawicach chirurgicznych oraz sterowanie gestami. Zarządzanie i transmisja danych na żywo. Konferencje audio i wideo.



#### LIVE- Wymieniany Moduł

Amortyzowane złącze modułu.  
Ekskluzywna konstrukcja obrotowa.

Transport lądowy / lotniczy,  
stała opieka bezpieczeństwa.



#### RESPIRATOR

Pierwszy na świecie respirator typu All-Drive  
Zapassowe źródło powietrza z podwójnym źródłem przepływu. IV, NIV oraz terapia tlenem o wysokim przepływie (High Flow).  
Monitorowanie gazów wieloskładnikowych w trybie mainstream / sidestream.  
Kontrola mankietu rurki dotchawiczej.

Wysoka wydajność turbiny. Dokładność napędu pneumatycznego. Nieprzerwana wentylacja. Pełen zakres funkcji opieki oddechowej. Pomiar O<sub>2</sub> i CO<sub>2</sub>, 5 x AA dla każdej sytuacji klinicznej. Zmniejszone ryzyko VAP oraz urazów tchawicy.



#### KARDIOMONITOR

Funkcje intensywnej terapii w wygodnej formie dla Ratownictwa Medycznego. Dokładność turbiny i napędu pneumatycznego. Nieprzerwana wentylacja Pełen zakres funkcji opieki oddechowej.  
Zmniejszone ryzyko VAP i urazów tchawicy.

Zaawansowane funkcje w mobilnej konstrukcji. Przekształcanie danych w kliniczne wsparcie decyzyjne. Pomiary SpO<sub>2</sub>, PR, SpHb, SpCO, SpMet, SpOC, PVi, ORI (Masimo Rainbow) wykonywane przy pacjencie. Pomiar O<sub>2</sub> i CO<sub>2</sub> – technologia 5 x AA dla każdej sytuacji klinicznej.



#### DEFIBRYLATOR

Dwufazowy defibrylator (200 J – fala BTE)  
CPR-EasyView Defibrylacja manualna  
Kardiowersja: tryby Synch/Autosynch  
Stymulator: Fix, Demand, Overdrive  
Wersje z łyżkami i elektrodami „Dostawiany” defibrylator do działającego modułu monitorowania.

Defibrylator typu add-on do modułu monitorowania pracującego w trybie aktywnym. Pełny podgląd danych monitorujących w czasie rzeczywistym. Fizjologiczny podgląd i nadzór CPR/Funkcje obejmujące wszystkie scenariusze kliniczne.

KARDIOMONITOR - DEFIBRYLATOR

RESPIRATOR -DEFIBRYLATOR

RESPIRATOR -KARDIOMONITOR-DEFIBRYLATOR




7 TWARZY  
JENNY



**PIERWSZY NA ŚWIECIE  
MODUŁOWO - HYBRYDOWY  
PUNKT OPIEKI**

Interakcja terapii i diagnostyki.  
Wsparcie OIT zawsze wtedy i tam, gdzie jest potrzebne.

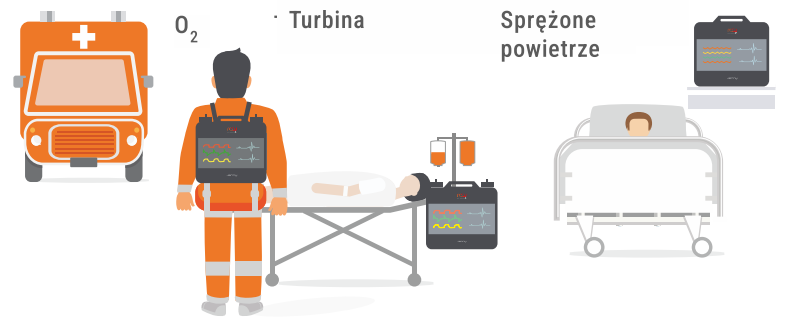

KARETKA / SAMOLOT

ZASTOSOWANIE STACJONARNE



JEDNO MIEJSCE OPIEKI NAD PACJENTEM

Zespoły Ratownictwa Medycznego

SOR

Transport interkliniczny i intrakliniczny





Dzieci



Dorośli



Noworodki


TRANSPORT PACJENTÓW



WSZYSTKIE PRE- KLINICZNE I KLINICZNE FAZY OPIEKI INTENSYWNEJ

OIT

BO

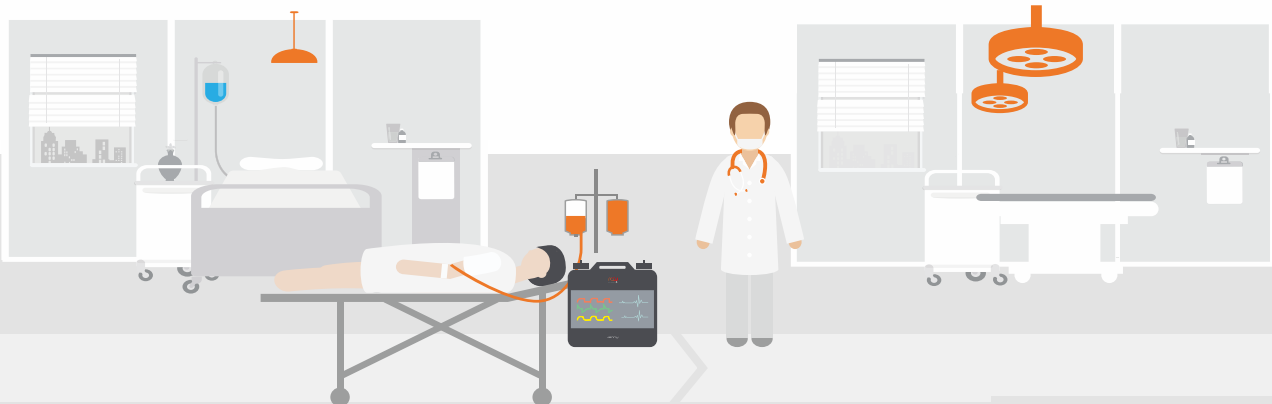



## JEDNO DLA WSZYSTKICH. WSZYSCY DLA JEDNEGO.

### Modułowe, kompleksowe rozwiązanie intensywnej terapii

- Większość funkcji intensywnej terapii jako moduły plug-in zależnie od potrzeb pacjenta
- Jedna konfigurowalna stacja intensywnej opieki dla wszystkich zastosowań – przedklinicznych i klinicznych
- Płaski, oszczędzający miejsce montaż ścienny
- Lub mobilny plecak i system do noszcy



## CENTRALNY SYSTEM STEROWANIA Dla większości funkcji ratunkowych

- Jednopoziomowy interfejs dla wszystkich funkcji intensywnej opieki
- Nieprzerwana transmisja danych pacjenta do CIS
- Wideokonferencja z miejsca zdarzenia z lekarzami szpitalnymi
- Centralna analiza danych oraz wsparcie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych

## Opieka nad pacjentem

- Ciągła opieka nad pacjentami w całej fazie przedklinicznej i klinicznej
- Jedno rozwiązanie dla wszystkich grup pacjentów: dorośli, dzieci, noworodki
- Brak utraty czasu i ryzyka podczas zmiany urządzeń
- Brak niepotrzebnego odłączania pacjenta
- Brak niespójności terapii przy przełączaniu urządzeń
- Funkcjonalność klasy premium i mobilność w jednym urządzeniu
- Jedna uniwersalna jednostka zastępująca cały zakres urządzeń medycznych





**MEDIVERO**  
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

[www.medivero.pl](http://www.medivero.pl)

Medivero Sp. z o.o. | 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 25A  
m: [biuro@medivero.pl](mailto:biuro@medivero.pl)  
t: +48 666 089 633  
t: +48 886 752 322