


# i300 ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse

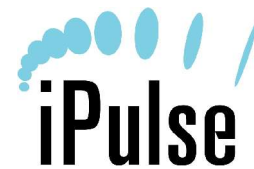

## N° 1 NA ŚWIECIE

### Aparat do zabiegów:

- depilacja
- fotoodmładzanie
- redukcja skaz pigmentowych i naczyniowych
- likwidacja trądziku i blizn potrądzikowych

# i300

Profesjonalna wersja w wygodnym wydaniu



**i300** tak jak wszystkie systemy iPulse został zaprojektowany tak, aby zapewnić najbardziej efektywne zabiegi w bardzo krótkim czasie i przy jak najmniejszych kosztach dla użytkownika.

**i300** jest wyjątkowy, ponieważ system optyczny oparty na unikalnej głowicy o powierzchni plamki 8,9 cm<sup>2</sup>, oznacza to, że jest szybszy i tańszy w eksploatacji niż konkurencyjne urządzenia.

**i300** jest zaprojektowany tak aby zapewnić prostą obsługę. Wstępnie kalibrowane zespoły lamp użytkownik może wymienić w kilka sekund.

 **optimed** PRO-OFFICE  
31-444 KRAKOW, ul. Sliczna 36  
tel.: +48/12/ 417 30 70  
e-mail: [optimed@optimedpro-office.eu](mailto:optimed@optimedpro-office.eu)  
[www.optimedpro-office.eu](http://www.optimedpro-office.eu)

# i300 ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse



# i300

Profesjonalna wersja w wygodnym wydaniu

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła: 2 lampy ksenonowe

Zakres długości fali: 530 - 1200 nm

Powierzchnia błysku: 8,9 cm<sup>2</sup>

Czas trwania błysku: 10 - 110 ms

Sekwencja błysku:  
błysk pojedynczy lub potrójny

Potrójny błysk: 5-20 ms czas błysku  
7-30 ms czas przerwy

Częstotliwość powtórzenia błysku:  
średnio co 0,25 Hz

Gęstość energii: 0-20 J/cm<sup>2</sup>

Chłodzenie: powietrzne, wentylator

Wymiary: 102,5 x 30,5 x 50,5 cm

Waga: 38 kg (z wózkiem)

## N<sup>o</sup> 1 NA ŚWIECIE



### Mocne strony urządzenia

- urządzenie posiada CE medyczne ze względu na precyzję, skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów
- limit dawek (nie pozwala na ustawienie za wysokiej mocy impulsu) wykorzystuje najmniejszą potrzebną do zabiegu dawkę energii, wbudowany filtr - nie ma konieczności wymiany filtrów przy każdym zabiegu, dzięki temu nie narażamy systemu na uszkodzenie, zawdzięczamy to doskonałej jakości lamp
- jedna głowica dla wszystkich zabiegów z unikalną wielkością powierzchni plamki 8,9 cm<sup>2</sup> czyni urządzenie jeszcze bardziej efektywniejszym
- nie wymaga specjalistycznej instalacji
- nie potrzebna jest kalibracja urządzenia i wymienianych lamp
- lampy zapewniają optymalną energię przez cały czas ich żywotności czyli 10 000 impulsów
- komputer sygnalizuje potrzebę wymiany lamp
- lekki, mobilny i przenośny
- przodujący dystrybutor urządzeń IPL firma CyDen N<sup>o</sup> 1 w świecie

### Zestaw IPL i300 zawiera:

- Jedną głowicę aplikacyjną z jednym zespołem lamp
- Jedną butelkę przezroczystego żelu przylegającego
- Dwie pary okularów ochronnych
- Kabel zasilający
- Instrukcję obsługi



CyDen Limited, Technium, Kings Road, Swansea SA1 8PU United Kingdom.  
Tel +44 1792 485766 Fax +44 1792 485524 www.cyden.co.uk

iPulse is a registered trademark and patented technology of CyDen Limited



Dystrybutor:

OPTIMED PRO-OFFICE • ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków • tel. 012 417 30 70