


ŁÓŻKO REHABILITACYJNE HAWK



Łóżko HAWK jest podstawowym łóżkiem przeznaczonym na oddziały szpitalne. Jego prosta konstrukcja pozwala na uzyskanie niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Z kolei bogate wyposażenie dodatkowe znacznie zwiększa funkcjonalność łóżka.

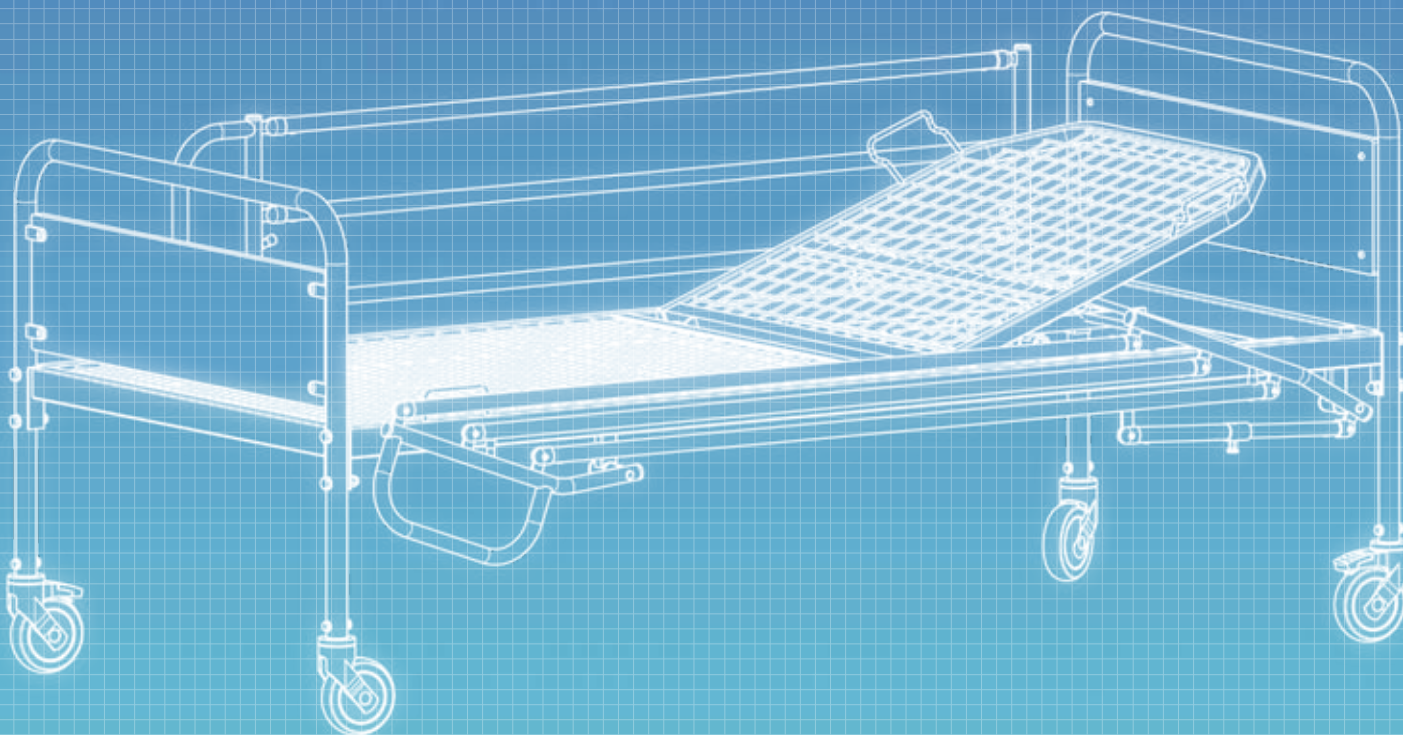

Budowa łóżka

Konstrukcja łóżka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

Leże łóżka dostępne jest w wersji dwusegmentowej z wypełnieniem z siatki lub opcjonalnie z płyty HPL. Regulacja segmentu leża odbywa się ręcznie przy pomocy mechanizmu zapadkowego lub opcjonalnie sprężyny gazowej.

Szczyty łóżka stanowią konstrukcyjną całość z nogami łóżka. Wypełnienie szczytów wykonane jest z płyty HPL lub z płyty wiórowej. Wypełnienie jest wyjmowane. Opcjonalnie łóżko może być wyposażone w krążki i listwy odbojowe.

Łóżko posiada układ jezdny składający się z 4 kół blokowanych indywidualnie (2 koła) lub centralnie (opcja).

Dane techniczne

Całkowita długość (z krążkami odbojowymi)	2150 mm
Całkowita długość (bez krążków odbojowych)	2100 mm
Całkowita szerokość (z krążkami odbojowymi)	1000 mm
Całkowita szerokość (bez krążków odbojowych)	960 mm
Wysokość leża	500 mm
Kąt pochylecia segmentu oparcia pleców	70°
Średnica kół jezdnych	125 mm
Dopuszczalne obciążenie	170 kg

Zastrzega się możliwość modyfikacji wyrobu w wyniku postępu technicznego i indywidualnych wymagań klienta

Standardowa kolorystyka płyt HPL (wypełnienie szczytów i leża)

K106 Biały	U515 Beżowy	U121 Niebieski	U125 Granatowy
U8846 Seledynowy	U8841 Turkus	U8831 Szary	D-381 Buk

Kolory prezentowane w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości z przyczyn drukarsko-technicznych.

Elementy metalowe łóżka pokryte są standardowo lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035 odpornym na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję łóżka. Możliwe jest pomalowanie elementów łóżka na dowolny kolor z palety RAL.

Możliwe wyposażenie łóżka

materac szpitalny w pokrowcu bawełnianym
materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym
materac przeciwdleżynowy pasywny
podpórka ręki
poręcz boczna składana (lakierowana, chromowana lub ze stali nierdzewnej)
wieszak kroplówki (lakierowany, chromowany lub ze stali nierdzewnej)
uchwyt ręki (lakierowany, chromowany lub ze stali nierdzewnej)
uchwyt na kaczkę
uchwyt na basen
uchwyt na woreczki fizjologiczne
podwójna rama wyciągowa
ramka na kartę gorączkową
tabliczka imienna pacjenta
uniwersalny uchwyt na wyposażenie dodatkowe
półka (pod aparaturę, do pisania)

przedstawiciel regionalny

Producent:
FORMED-PRO Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

Dystrybutor generalny:
FORMED Sp. z o. o. Sp. k.
Al. Legionów 21 A 34-300 Żywiec
tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21
e-mail: formed@formed.eu.pl, www.formed.eu.pl



Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC oraz Ustawą o wyrobach medycznych