

OKO


Podświetlana tablica okulistyczna

łatwa obsługa • wygodne badanie • komfort użytkownika • zdalne sterowanie



PRODUCENT:

MEDEN-INMED Sp. z o. o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel. +48 94 347 10 49
fax: +48 94 345 40 55
kom: 693 540 106
hw@meden.com.pl
www.meden.com.pl

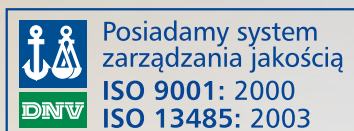

OKO

Podświetlana tablica okulistyczna

Elektroniczna tablica okulistyczna **OKO** służy do badania ostrości wzroku. Sterowanie pracą tablicy odbywa się bezprzewodowo - przy pomocy niewielkiego pilota na podczerwień.

Lekarz za pomocą pilota z sześcioma przyciskami, steruje pracą tablicy **OKO** i nie wychodząc z za biurka ma możliwość:

- podświetlić wszystkie znaki w jednym rzędzie,
- podświetlić tylko jeden, dowolnie wybrany znak w rzędzie,
- włączenia tablicy,
- wyboru podświetlenia wybranego znaku,
- wyboru podświetlenia wybranego wiersza znaków,
- przełączania trybu pracy (cały wiersz / wybrany znak),
- wyboru kierunku przemieszczania się kursora,
- wygaszania tablicy.

Samoczynne wyłączenie źródła światła - w przypadku niewykorzystywania tablicy przez czas dłuższy niż 5 minut.

Tablica okulistyczna **OKO** to:

- łatwość montażu w gabinecie,
- komfort obsługi,
- skrócenie czasu badania,
- wysoka niezawodność,
- estetyczny wygląd,
- możliwość wymiany optotypu podczas badania pacjenta.

Dane techniczne:

Nazwa handlowa	tablica okulistyczna OKO
Wymiary wys. x szer.	526 x 457 mm
Zasilanie	230V AC, 40 VA
Wykonanie	tyb B, klasa I
Obsługa	bezprzewodowa, na podczerwień
Optotypy	5-cio metrowe cyfry i litery

