





MEDUMAT TRANSPORT

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY
RESPIRATOR TRANSPORTOWY

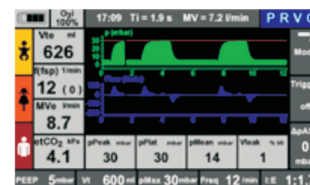

Podświetlenie ekranu w trybie nocnym

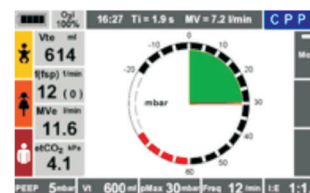

Widok ekranu w trybie ratunkowym

Najnowszy na rynku respirator ciśnieniowo i objętościowo zmienny przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt

Zastosowanie:

- **Ratownictwo medyczne**
 - działania ratunkowe w miejscu zdarzenia i transport do SOR
- **Transport poza szpitalny**
 - transport pacjenta do innych placówek służby zdrowia
- **Transport wewnątrz szpitalny**
 - SOR
 - Oddział intensywnej terapii
 - Opieka przed i pooperacyjna
 - Sala wybudzeń

Tryby wentylacji:

- za pomocą ciśnienia (PCV, CPAP+ASB, BiLevel, PRVC)
- za pomocą objętości (IPPV, S-IPPV, SIMV)
- NIV (z możliwością podłączenia dla wszystkich trybów wentylacji)

- W trybie CPAP+ASB aparat umożliwia oddychanie spontaniczne z ciągłym dodatnim ciśnieniem powietrza i dodatkowym wspomaganie oddechu. Po wystąpieniu bezdechu aparat automatycznie kontynuuje wentylację w trybie BiLevel lub SIMV

Monitoring:

- Pomiar objętości i przepływu oddechu (BiCheck)
- Pomiar ciśnienia w drogach oddechowych
- Kapnografia (opcjonalnie) mierzona w strumieniu bocznym
- Pomiar ciśnienia szczytowego, średniego, plateau
- Pomiar nieszczelności maski w trybie NIV

Regulacja parametrów zaawansowanych

- Tempo wzrostu ciśnienia
- Zmiana przebiegu przepływu
- Czas plateau
- Triggery wdechowy i wydechowy

Zasilanie:

Wymienny akumulator, z możliwością ładowania zewnątrz lub wewnątrz z sieci 12 - 15 Volt DC lub 100-240 V AC, 50/60 Hz



SYSTEM PRZENOŚNY
LIFE BASE 4 NG



SYSTEM PRZENOŚNY
LIFE BASE 1 NG



SYSTEM PRZENOŚNY
LIFE BASE LIGHT

**MEDUMAT
TRANSPORT**



WENTYLACJA PODCZAS TRANSPORTU
NOWA JAKOŚĆ - NOWE MOŻLIWOŚCI