

AED G3 AUTOMATIC

OXFORD


DEFIBRYLATOR AED



Automatyczny defibrylator AED



Technologia Rescue Ready®

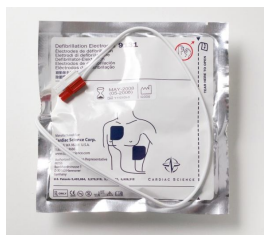

Samoprzylepne elektrody



Torba (opcja)

GWARANCJA JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI!

7 lat gwarancji na aparat

4 lata gwarancji na baterię



Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, bezpłatna infolinia: 800 43 90 10
www.oxford.com.pl, email: info@oxford.com.pl

AED G3 AUTOMATIC

Defibrylator AED G3 Automatic jest w pełni automatycznym urządzeniem do przeprowadzania resuscytacji. W przypadku nagłego zatrzymania akcji serca każda sekunda jest krytyczna. Urządzenie mogą obsługiwać nawet osoby bez przygotowania medycznego. Komendy głosowe poprowadzą użytkownika przez cały proces resuscytacji. Jediną czynnością, jaką musi wykonać osoba ratująca jest naklejenie elektrod. Po umieszczeniu elektrod na klatce piersiowej pacjenta, defibrylator AED automatycznie dokona analizy rytmu serca i jeśli zajdzie taka potrzeba automatycznie wyzwoli wstrząs.

Cechy aparatu:

- **Rescue Ready** – opatentowana technologia gwarantująca sprawność i gotowość do pracy aparatu dzięki wykonywaniu automatycznego testu baterii, elektrod oraz podzespołów elektronicznych w odstępach: dziennym, tygodniowym i miesięcznym
- bateria litowa IntelliSense® (4 lata gwarancji)
- jednorazowe, samoprzylepne, niespolaryzowane elektrody z przewodami o długości 1,3m (2 lata gwarancji)
- w pełni automatyczny tryb pracy
- dwurzędowy wyświetlacz LCD do prezentacji tekstowych instrukcji dla użytkownika
- wskaźnik stanu baterii
- wskaźnik elektrod
- wskaźnik serwisu
- cykl wyłączeń zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC
- komendy głosowe dla operatora prowadzące przez proces resuscytacji
- detekcja stymulatora
- elektromagnetyczny wskaźnik gotowości do pracy
- alarmy głosowe i dźwiękowe
- wbudowana funkcja automatycznej synchronizacji wyłączenia
- pamięć wewnętrzna pozwalająca zapisać 60 minut sygnału EKG wraz ze zdarzeniami
- możliwość odtworzenia akcji ratowniczej za pomocą programu RescueLink® na PC (interfejs i oprogramowanie w zestawie z defibrylatorem)
- możliwość programowania aparatu za pomocą programu MDLink®

Opcje (za dodatkową opłatą):

- elektrody pediatryczne (redukcja energii defibrylacji do 50VE)
- akumulator z zewnętrzną ładowarką (1 rok gwarancji)
- torba, plecak lub wodoszczelna walizka ochronna
- zestaw pierwszej pomocy ReadyKit
- metalowa szafka naścienna (podtynkowa, półpodtynkowa, natynkowa) z alarmem i możliwością podłączenia do centralnej instalacji alarmowej lub bez

Dane techniczne:

- wymiary aparatu: 80mm×310mm×270mm
- waga: 3,1kg
- dwurzędowy tekstowy wyświetlacz LCD
- port do komunikacji z PC
- tryb pracy: automatyczny
- typ: dwufazowy
- zakres energii wyłączenia: 95J-351J (nominalne ustawienia: 200VE, 300VE, 300VE)
- 5 protokołów energii
- protokół energii wyłączenia dla elektrod pediatrycznych 50VE-50VE-50VE (przy wybraniu protokołu 200VE-200VE-200VE)



ISO 9001

Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, bezpłatna infolinia: 800 43 90 10
www.oxford.com.pl, email: info@oxford.com.pl



OXFORD

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.