

SEHZEICHENPROJEKTOR CP-50

Spezialanfertigung der Optotypen, ein hochauflösendes Linsensystem und Halogenbeleuchtung ergeben eine brillante Wiedergabe der Testfelder.

Insgesamt 40 Prüffelder und Blenden ermöglichen Ihnen eine enormes Spektrum an Test-Möglichkeiten.



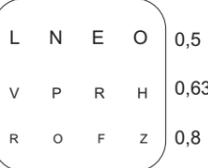
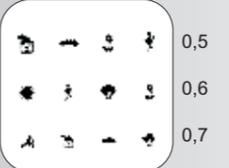
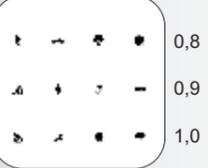
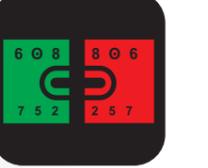
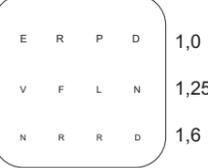
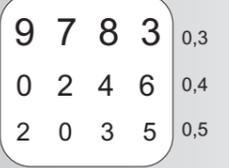
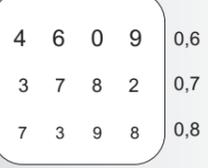
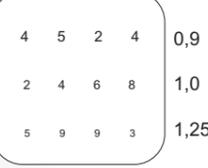
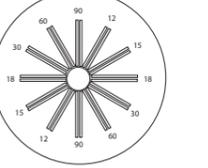
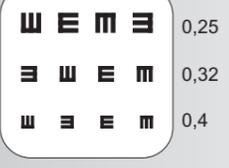
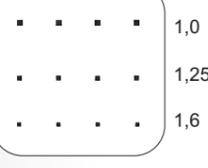
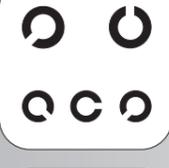
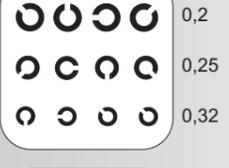
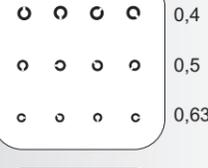
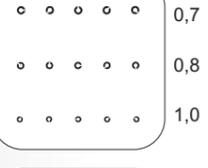
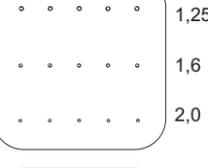
- Sehr schneller Testwechsel, durchschnittlich innerhalb 0,03 Sekunden.
- Einzel- oder zeilenweise Darbietung der Optotypen möglich.
- Zwei Test-Reihenfolgen mit je 30 Testen individuell programmierbar.
- Jeder Test durch Vorschalten von Filtern in einen Rot/Grün-Test wandelbar.
- Frei zuschaltbarer Pol-Filter für alle monokularen Tests.
- Zeitgemäße Kinderbilder.
- Infrarot-Fernbedienung für eine komfortable, reibungslose Refraktion.
- Automatische Abschaltung nach 10 Min. ohne Betätigung (Energiesparfunktion).
- Wahlweise mit Wandhalterung, für Montage auf einer Refraktionseinheit oder mit Standfuß lieferbar.

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):	205 mm x 210 mm x 340 mm
Gewicht:	5,5 kg
Projektionsabstand:	2,5m bis 6,5 m
Leuchtmittel:	12 V / 30 W Halogen
Neigung:	ca. +/- 15°
Leistungsaufnahme:	40 W
Stromanschluß:	110 / 220 V 50 / 60 Hz
Sicherung:	2 x 0,25 A



OPTOTYPEN UND BLENDEN CP-50

 0,05	 0,1 0,125	 0,16 0,2	 0,25 0,32 0,4	 0,5 0,63 0,8
 0,2 0,3 0,4	 0,5 0,6 0,7	 0,8 0,9 1,0		 1,0 1,25 1,6
 0,1 0,2	 0,3 0,4 0,5	 0,6 0,7 0,8	 0,9 1,0 1,25	
 0,16 0,2	 0,25 0,32 0,4	 0,5 0,63 0,8	 1,0 1,25 1,6	
 0,125 0,16	 0,2 0,25 0,32	 0,4 0,5 0,63	 0,7 0,8 1,0	 1,25 1,6 2,0
				
				
			