

Przenośny aparat USG do oceny pęcherza moczowego w czasie rzeczywistym

Urolodzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki często opierają się na badaniu obrazowym pęcherza moczowego w celu oceny wskazań do leczenia. Portascan+ zaprojektowano z myślą o pracownikach ochrony zdrowia, wykonujących badania przyłóżkowe w sytuacjach, w których niezbędna jest natychmiastowa, wiarygodna ocena obrazowa.

Portascan+ jest wyjątkowy, ponieważ pracuje w czasie rzeczywistym, posiada duży ekran dotykowy, bazę danych pacjentów oraz możliwość zestawienia wyników badania obrazowego z wynikami badania uroflometrycznego za pomocą bezprzewodowego połączenia przez Bluetooth.

Prosta obsługa sprawia, że Portascan+ jest aparatem z wyboru w warunkach codziennej pracy klinicznej. Portascan+ automatycznie oblicza objętość pęcherza, Korzystając z obrazu USG. Wbudowana drukarka umożliwia natychmiastowy wydruk wyniku, co ułatwia gromadzenie danych.


Zintegrowane bezprzewodowo wyniki badania obrazowego i badania uroflometrycznego

Uniwersalność Portascan została w Portascan + zwiększona poprzez możliwość zestawienia wyników USG i badania uroflometrycznego z użyciem aparatu Portaflow. Wyniki mogą być wydrukowane za pomocą wbudowanej drukarki lub przesłane przez Bluetooth i wydrukowane w formie obszernego raportu, zawierającego:

- obrazy pęcherza
- dane z badania uroflometrycznego i zalegania moczu po mikcji
- wykres badania uroflometrycznego
- wyniki badania moczu i PSA

Akcesoria

Opis	Numer części
Pełen zestaw Portascan+ z sondą brzuszną 3,5-5,0 MHz	U-0007
Zastępcza sonda brzuszną konwekcyjną 3,5-5,0 MHz	PA-00251
Żel do badania USG	U-0208
Statyw jezdny	PA-00148
Papier termiczny do drukarki	PA-00144
Możliwość podłączenia myszki	PS-00068
Dodatkowe baterie	PA-00250
Klawiatura na wejście USB	PS-00069
Połączenie monitora z drukarką za pomocą Bluetooth	PS-00070

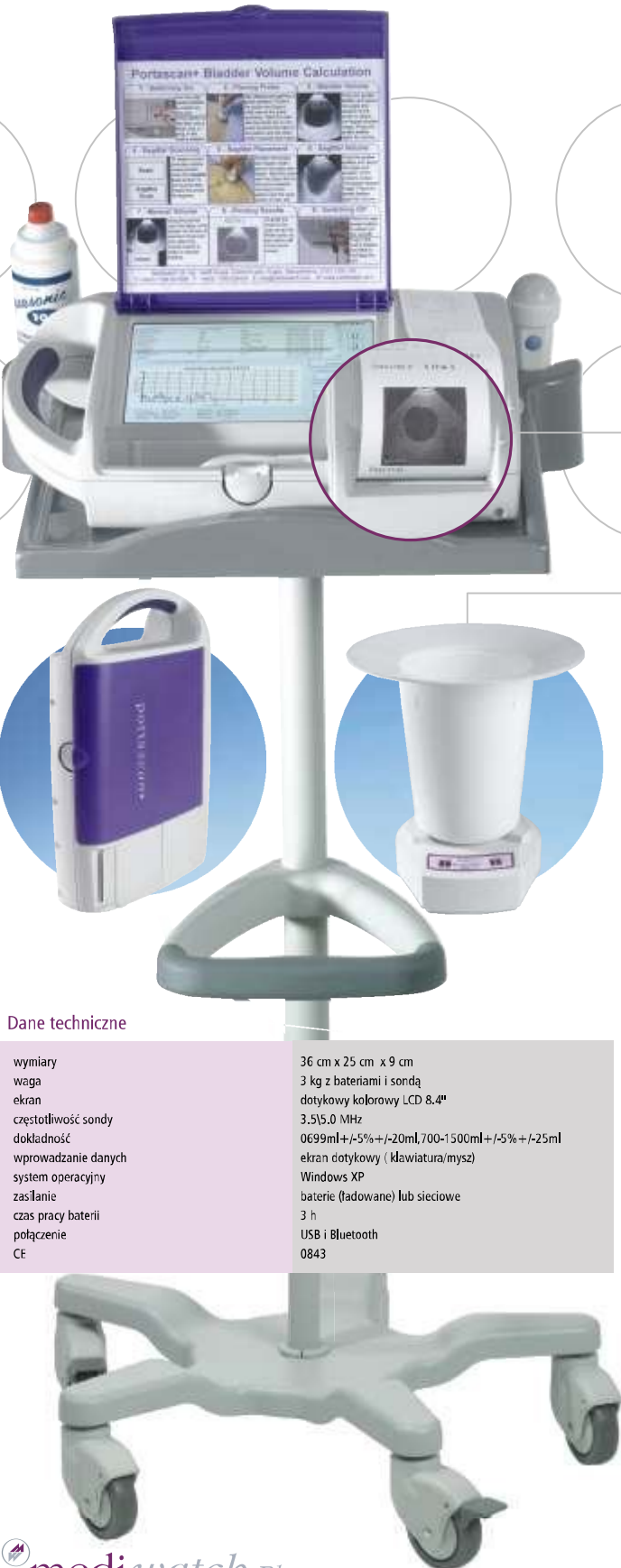

Dane techniczne

wymiary	36 cm x 25 cm x 9 cm
waga	3 kg z bateriami i sondą
ekran	dotykowy kolorowy LCD 8,4"
częstotliwość sondy	3,5/5,0 MHz
dokładność	0699ml +/-5% +/ -20ml, 700-1500ml +/-5% +/ -25ml
wprowadzanie danych	ekran dotykowy (klawiatura/mysz)
system operacyjny	Windows XP
zasilanie	baterie (ładowane) lub sieciowe
czas pracy baterii	3 h
połączenie	USB i Bluetooth
CE	0843



CE 0843