

Wydajna i bezpieczna profilaktyka przeciwodleżynowa



- materac z wysokoelastycznej pianki z sekcjami różnej gęstości
- pianka przycięta na kształt kostek, pozwalających na indywidualne dopasowanie się do kształtu ciała pacjenta oraz redukcję ucisku i tarcia w obszarze styczności z jego naskórkiem
- przycięta na kształt kostek pianka ułatwia przepływ powietrza pod powierzchnią materaca, tym samym przeciwdziałając nagromadzeniu się wilgoci, co z kolei redukuje macerację i ścieranie się naskórka oraz skóry właściwej pacjenta
- strefa pięt z pianki niskiej gęstości, co zapewnia łagodne oparcie dla pięt i kostek
 - materac łatwy w czyszczeniu i nadzwyczaj higieniczny
 - boki wykonane z pianki wysokiej gęstości, zaprojektowane dla bezpieczeństwa pacjentów oraz ułatwienia im schodzenia z materaca
- pasuje do większości ram łóżek i dopasowuje się do wszystkich pozycji ułożenia pacjenta w łóżku



Materac Hill-Rom NP100 z sekcjami różnej gęstości

Materac z pianki wysokoelastycznej



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Materac Hill-Rom NP100 z sekcjami różnej gęstości

Materac z pianki wysokoelastycznej



Dzięki piance wysokoelastycznej z sekcjami różnej gęstości, przyciętej na kształt kostek, materac Hill-Rom NP100 redukuje ucisk i tarcie w obszarze styczności z naskórkiem pacjenta, indywidualnie dopasowując się do kształtu jego ciała. Przycięta na kształt kostek pianka ułatwia przepływ powietrza pod powierzchnią materaca, tym samym przeciwdziałając nagromadzeniu się wilgoci, co z kolei redukuje macerację i ścieranie się naskórka oraz skóry właściwej pacjenta. Materac z pianki wysokoelastycznej z sekcjami różnej gęstości Hill-Rom NP100 jest atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, pomagającym zapobiegać utracie integralności powłok skórnych i powstawaniu odleżyn. Dzięki niskiej gęstości pianki w strefie pięt materac zapewnia również łagodne oparcie dla pięt i kostek. Pasuje on do większości ram łóżek i dopasowuje się do wszystkich pozycji ułożenia pacjenta w łóżku.

Materac zaopatrzony jest w wodoszczelną, jednak przepuszczalną dla pary wodnej, poliuretanową powłokę o właściwościach bakterio- i grzybobójczych (hamujących podziały komórkowe bakterii i grzybów), łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zapewniając pacjentom i ich opiekunom maksimum higieny. Materac z pianki wysokoelastycznej z sekcjami różnej gęstości Hill-Rom NP100 jest dostępny w dwóch wersjach: z powłoką o zszywanych lub zgrzewanych krawędziach. Powłoka o zgrzewanych krawędziach zaopatrzona jest w uchwyty do transportu.

Dane techniczne

Materac

(możliwość dostosowania wielkości do wymagań klienta):

Długość 198 cm lub 203 cm

Szerokość 85 cm (tylko przy dł. 198 cm) lub 90 cm

Wysokość 14 cm

Waga 7,2 kg

Gęstość 40 kg/m³ w strefie tułowia i głowy

..... 30 kg/m³ w strefie pięt

Funkcjonalność:

Firma Hill-Rom zapewnia 5-letnią ochronę gwarancyjną na funkcjonalność pianki i 4-letnią gwarancję na powłokę.

Nośność (maksymalna masa ciała pacjenta) 150 kg

Dezynfekcja:

Powłokę należy dezynfekować przez przetarcie szmatką nasączoną roztworem podchlorynu o stężeniu 1000 ppm (milionowych części molowych).

Zgodność z normami:


EN 597 1 i 2, crib 5, BS 6807, BS 7177 : 1996, GPEM D1-90, UNI 9175

Materac z kombinacji dwóch pianek Hill-Rom NP100:

przepuszcza promienie Roentgena i nie zawiera lateksu.

CE MDD (Dyrektywa dotycząca Urządzeń Medycznych) 93/42/EWG dla urządzeń medycznych klasy 1

Materac Hill-Rom NP100 dostępny w 2 dodatkowych wersjach o większej długości

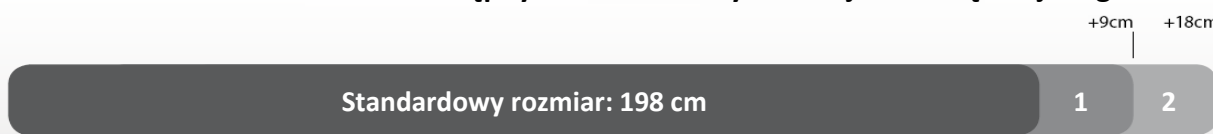

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem firmy Hill Rom.



www.hill-rom.com

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia w zakresie projektowania, dostępnych modeli i ich parametrów technicznych. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom jest pisemna gwarancja rozszerzona o sprzedaż i wynajem jej produktów.
Producent: Hill-Rom SAS - Pluvigner, Francja.
© 2008 Hill-Rom Services, Inc. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Francja	+33 (0)2 97 50 92 12
Wielka Brytania	+44 (0)1530 411000
Niemcy	+49 (0)211/16450-0
Holandia	+31 (0)347 32 35 32
Włochy	+39 02-950541
Szwajcaria	+41 (0)21/706 21 30
(j. niemiecki)	021/706 21 38
Austria	+43 (0)2243 / 28550
Irlandia	+353 (0)1 413 6005
Hiszpania	+34 (0)93 6856000
Państwa skandynawskie	+46 (0)8 564 353 60

Ekspert:
Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy Hill-Rom lub właściwym dyrektorem regionalnym za pośrednictwem firmowej witryny internetowej lub dzwoniąc pod numer+1 812 934 8173