

Wydajne dostosowanie do Twoich codziennych potrzeb



Materac:

- stanowiący trwałe i atrakcyjne cenowo wsparcie dla pacjenta
 - funkcjonalny także po odwróceniu na drugą stronę
- zbudowany z jednorodnej pianki o wysokim stopniu elastyczności
 - łatwy w czyszczeniu i nadzwyczaj higieniczny
- pasuje do większości ram łóżek i dopasowuje się do wszystkich pozycji ułożenia pacjenta w łóżku



Materac Hill-Rom NP50 z jednorodnej pianki

Materac z pianki wysokoelastycznej



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Materac Hill-Rom NP50 z jednorodnej pianki

Materac z pianki wysokoelastycznej

Materac z jednorodnej pianki wysokoelastycznej NP50 firmy Hill-Rom zapewnia pacjentowi pełną wygodę. Możliwość korzystania z materaca także po odwróceniu go na drugą stronę sprawia, że staje się on tańszy i trwalszy w użytkowaniu. Materac Hill-Rom NP50 z jednorodnej pianki pasuje do większości ram łóżek i dopasowuje się do wszystkich pozycji ułożenia pacjenta w łóżku.



Materac zaopatrzony jest w wodoszczelną, przepuszczalną dla pary wodnej, poliuretanową powłokę o właściwościach bakterio- i grzybobójczych (hamujących podziały komórkowe bakterii i grzybów), łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zapewniając pacjentom i ich opiekunom maksimum higieny.

Dane techniczne

Materac

(możliwość dostosowania wielkości do wymagań klienta):

Długość 198 cm

Szerokość 85 cm lub 90 cm

Wysokość 14 cm

Waga 8,6 kg

Gęstość 40 kg/m³

Funkcjonalność:

Firma Hill-Rom zapewnia dwuletnią ochronę gwarancyjną na funkcjonalność pianki i powłoki.

Nośność (maksymalna masa ciała pacjenta) 150 kg

Dezynfekcja:

Powłokę należy dezynfekować przez przetarcie szmatką nasączoną roztworem podchlorynu o stężeniu 1000 ppm (milionowych części molowych).

Zgodność z normami:

EN 597 1 i 2, crib 5, BS 6807, BS 7177 : 1996, GPEM D1-90, UNI 9175


Materac z jednorodnej pianki Hill-Rom NP50:

przepuszcza promienie Roentgena i nie zawiera lateksu.



MDD (Dyrektywa dotycząca Urządzeń Medycznych) 93/42/EWG dla urządzeń medycznych klasy 1

Materac Hill-Rom NP50 dostępny w 2 dodatkowych wersjach o większej długości

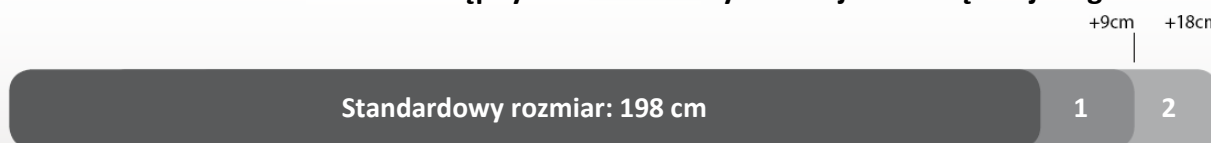

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem firmy Hill Rom.



www.hill-rom.com

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia w zakresie projektowania, dostępnych modeli i ich parametrów technicznych. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom jest pisemna gwarancja rozszerzona o sprzedaż i wynajem jej produktów.
Producent: Hill-Rom SAS - Pluvigner, Francja.
© 2008 Hill-Rom Services, Inc. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Francja +33 (0)2 97 50 92 12
Wielka Brytania +44 (0)1530 411000
Niemcy +49 (0)211/16450-0
Holandia +31 (0)347 32 35 32
Włochy +39 02-950541
Szwajcaria +41 (0)21/706 21 30
(j. niemiecki) 021/706 21 38
Austria +43 (0)2243 / 28550
Irlandia +353 (0)1 413 6005
Hiszpania +34 (0)93 6856000
Państwa skandynawskie +46 (0)8 564 353 60
Eksport:
Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy Hill-Rom lub właściwym dyrektorem regionalnym za pośrednictwem firmowej witryny internetowej lub dzwoniąc pod numer +1 812 934 8173