

Thermo contour®

Seria produktów wysokiej jakości, wykonanych z polimerów wiskozowo-elastycznych obejmuje: materace, nakładki na materace, materace do wózków transportowych, poduszki siedzeniowe i podkładki pod nogi.



Odpowiednie do wszystkich rodzajów ram łóżkowych



W skrócie:

- Zaprojektowany w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka¹.
- Lekki, viscoelastyczny (termoelastyczny) piankowy materac dostosowujący się do masy i temperatury ciała, powoduje równomierne rozłożenie nacisku.
- Zwiększa komfort pacjenta^{1,2}.
- 10-letnia gwarancja na materac i 5-letnia gwarancja na nieprzemakalność poszycia materaca.
- Na ekonomiczną zasadność zakupu wpływają długi czas eksploatacji produktu i długi okres gwarancji.
- Zgrzewane poszycie: wodoszczelne, przepuszczalne dla pary wodnej, bakterio- i grzybobójcze, spód materaca przeciwpoślizgowy, łatwy w czyszczeniu i przenoszeniu.
- Nie ma potrzeby odwracania czy obracania materaca.

Ekonomika jakości.

Nowa generacja lekkich, piankowych termoelastycznych materaców, zaprojektowana w celu zapobiegania odleżynom, gwarantuje obniżenie nacisku w miejscach predylekcyjnych i podniesienie komfortu pacjenta.

Produkty Thermo contour pozwalają na wysoce efektywną i ekonomiczną opiekę nad pacjentami o zwiększonym ryzyku powstawania odleżyn.

Thermo contour®

Seria produktów wysokiej jakości, wykonanych z polimerów viskozowo-elastycznych obejmuje: materace, nakładki na materace, materace do wózków transportowych, poduszki siedzeniowe i podkładki pod nogi.

Piankowe, termoelastyczne produkty obniżające ryzyko powstawania odleżyn.


Gama produktów Thermo contour pomaga personelowi medycznemu w zapobieganiu powstawaniu odleżyn u pacjentów z grupy podwyższonym ryzykiem.

Konwencjonalne, viscoelastyczne materace piankowe mogą być ciężkie, wolno reagujące na zmiany nacisku i nieoddychające, co prowadzi do niezadowolenia pacjentów i personelu.

Produkty serii Thermo contour zbudowane są z nowej generacji, oddychającej termoelastycznej pianki.

Wrażliwość pianki na temperaturę powoduje jej zmiękczenie i dostosowywanie do pacjenta, co powoduje tworzenie konturu ciała w każdej pozycji.

Nacisk na powierzchnię jest redystrybuowany co pozwala na najlepsze odciążenie miejsc o zwiększonym nacisku i wzrost komfortu pacjenta.

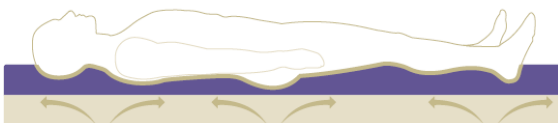

■ Górna warstwa pianki termoelastycznej
■ Warstwa pianki wysokoplastycznej

Łatwe do czyszczenia, całkowicie szczelne poszycie poliuretanowe jest całkowicie wodoodporne, paroprzepuszczalne, bakterio- i grzybobójcze. Rozciągliwy materiał dostosowuje się do kształtu ciała pacjenta nie powodując otarć i nie ulegając zagnieceniom.

Piśmiennictwo

1. Hampton S. (1999) Efficacy and cost-effectiveness of the Thermo contour mattress. *British Journal of Nursing*. Vol. 8:15 990-996
2. Bevington J. (2001) Prevention of pressure ulcers: a case study. *Nursing & residential Care*. Vol. 3:2 76-77.



Specyfikacja techniczna

Materac (możliwość dopasowania rozmiaru):

Długość: 199 cm
Szerokość: 85 cm
Wysokość: 14 cm
Masa: 12,5kg

Gęstość:

Pianka viscoelastyczna/termoelastyczna 55 kg/m³

Wykonanie:

Hill-Rom zapewnia 10 letnią gwarancję na materac piankowy i 5 letnią na pozostałe produkty serii. Hill-Rom zapewnia również 5-letnią gwarancję na poszycia poliuretanowe.

Rekomendowana maksymalna masa pacjenta: 160 kg
Rekomendowana minimalna masa pacjenta: 40 kg

Dezynfekcja:

Pokrycie dezynfekuje się poprzez przemycie ściereczką nasączoną w podchlorynie o stężeniu 1000 ppm.

Stosowane standardy:

EN 597 1&2, BS 6807 crib 5, BS 5852 część 2, GPEM/CP D1 bis-89, GPEM/CP D1 90, UNI 9175 Class UNO EMME, Öko Tex standard 100, Tropical test BS 3424 część 12 metoda 14 C.

CE MDD 93/42/EEC klasy 1 sprzętu medycznego.

Wszystkie produkty są wykonane zgodnie ze standardem jakości ISO 13485-2003 oraz kontrolowane przed opuszczeniem fabryki.

Wszystkie powierzchnie serii Thermo contour są:

Przepuszczalne dla promieni RTG, antystatyczne, wolne od lateksu i nie alergizujące.

Hill-Rom zastrzega sobie prawo do zmian wyglądu, specyfikacji i modelu bez uprzedzenia. Gwarancja Hill-Roma jest pisemną gwarancją obejmującą produkty przeznaczone do sprzedaży i wynajmu. © 2006 Hill-Rom Services, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.