

Wygoda i bezpieczeństwo




**Aktywna powietrzna nakładka na materac
Hill-Rom P280**

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Nakładka Hill-Rom P280: Dobra wiadomość dla bezpieczeństwa skóry pacjentów.

W oparciu o zalecenia National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) i European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) firma Hill-Rom dostarcza najwyższej jakości produkty i systemy terapeutyczne zapewniające środki odpowiednie do prowadzenia leczenia zgodnie z założeniami programu terapeutycznego Safe Skin™

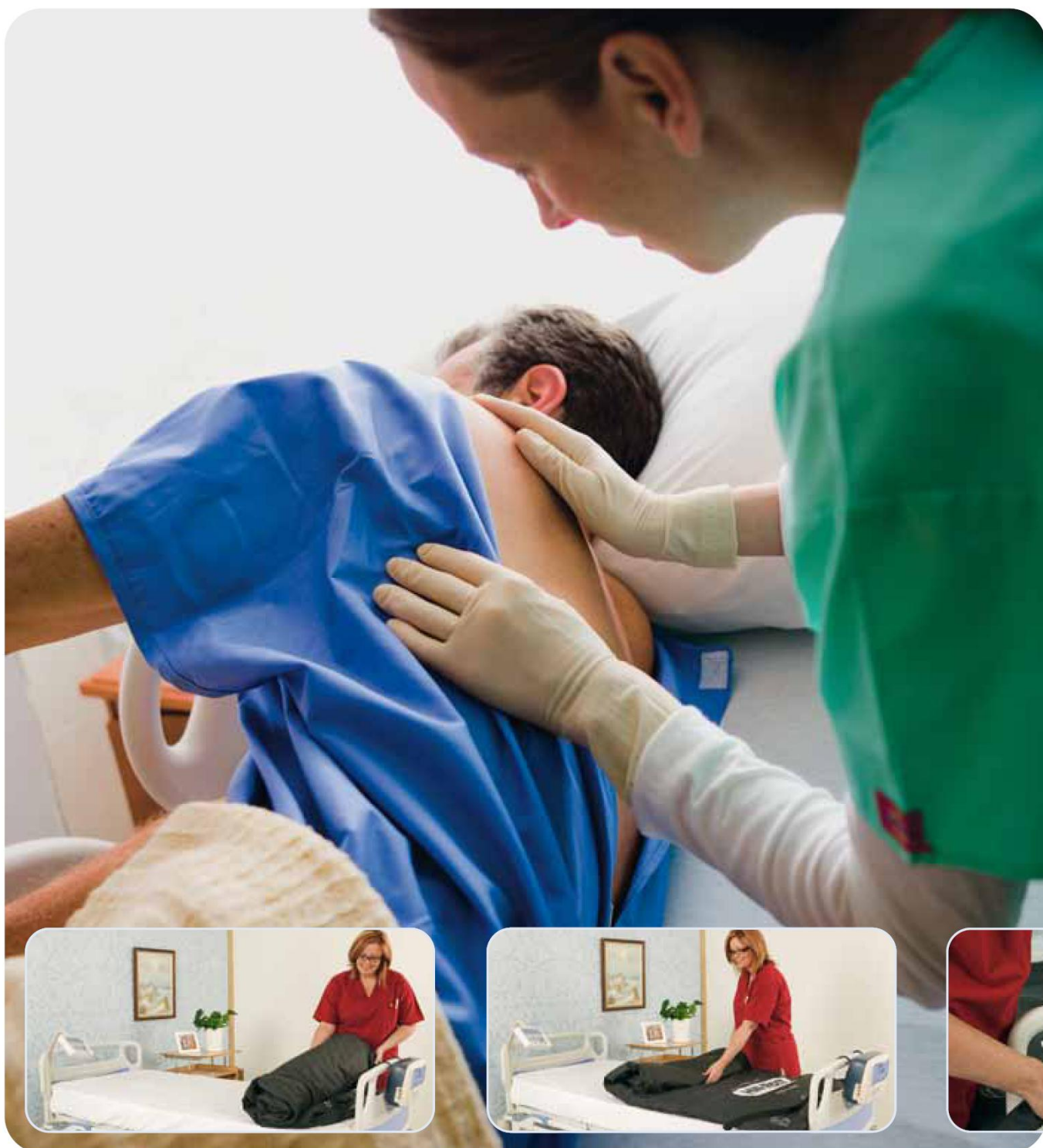

Łatwa w użyciu nakładka Hill-Rom P280:

Rozłożyć i umocować na powierzchni materaca...

...podłączyć i aktywować

Zapobieganie odleżynom u pacjentów z grupy ryzyka jest już znacznie prostsze.

Aktywna 3-strefowa nakładka P280 wykorzystująca technologię Hill-Rom I-mmersion™

- pozwala zmniejszyć częstość występowania odleżyn poprzez redystrybucję zmiennego niskiego ciśnienia oraz zapewnienie optymalnego zanurzenia pacjenta
- zaspokajają indywidualne potrzeby pacjenta dzięki możliwości wyboru terapii (tryby naprzemiennie zmiennego i ciągłego niskiego ciśnienia)
- skutecznie chroni przed powstawaniem odleżyn i wspomaga ich leczenie
- zapewnia zmienny niski poziom ciśnienia dzięki zastosowaniu niezwykle elastycznych uretanowych komór powietrznych
- poprawia komfort pacjenta dzięki regulacji czasu cyklu oraz stopnia twardości/miękkości materaca
- zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i opiekuna dzięki automatycznej blokadzie funkcji, alarmom o niesprawności czy konieczności interwencji serwisowej
- pozwala pacjentowi zachować mobilność



Mniejsze zanurzenie powoduje większy ucisk na tkanki.



Terapia zanurzeniowa Hill-Rom I-mmersion™ pozwala na redystrybucję ciśnienia na większym obszarze znacząco zmniejszając ucisk na tkanki.



„Pacjenci bardziej narażeni na odleżyny powinni leżeć na aktywnych powierzchniach nośnych (podkładce lub materacu), kiedy częsta ręczna zmiana ich pozycji nie jest możliwa.”

Profilaktyka odleżyn – podręczny przewodnik EPUAP/NPUAP 2009



moduł zasilający i przykryć prześcieradłem – nakładka P280 jest gotowa do użytku!

Wynik: Wygoda i bezpieczeństwo skóry pacjenta.

**Wygoda i bezpieczeństwo:
Aktywna nakładka na materac
Hill-Rom® P280**



Wyniki kliniczne dowodzą skuteczności zapobiegania powstawaniu odleżyn u pacjentów z grupy ryzyka dzięki stosowaniu nakładki powietrznej P280

Trzy strefy: statyczna strefa głowy, strefa krzyżowa z trybami ciągłego i naprzemiennie zmiennego niskiego ciśnienia, specjalna strefa pięt pochylona pod kątem 5°

W odróżnieniu od podobnych rozwiązań, nakładka P280 posiada kilka stref, które mają za zadanie spełniać indywidualne potrzeby pacjenta w najbardziej wrażliwych na powstawanie odleżyn obszarach.

P-max

Usztyniony obszar materaca w strefie krzyżowej wspomaga mobilizację pacjenta oraz ułatwia wstawanie z łóżka.

Łatwy w obsłudze zawór CPR

W przypadku nakładki Hill-Rom® P280 wystarczy odłączyć urządzenie od jednostki sterującej, by błyskawicznie spuścić powietrze z nakładki.

Alarmy bezpieczeństwa

Personel jest informowany o wszelkich nieprawidłowościach.

Regulowany czas cyklu oraz ustawienia komfortu

Czas cyklu można dostosować do stanu zdrowia pacjenta i zapewnić mu komfort podczas snu. Ustawienia komfortu pozwalają dostosować stopień twardości/miękkości materaca zgodnie z preferencjami pacjenta.

Automatyczna blokada funkcji

Ta funkcja bezpieczeństwa pozwala zachować ustawienia właściwe dla danego pacjenta i zapobiega przypadkowym modyfikacjom.

Zdemontowana powłoka materaca ze zgrzewanymi krawędziami zasuwana na suwak 360°

Zapobiega przedostawaniu się płynów, a możliwość jej zdjęcia znacznie ułatwia

czyszczenie i konserwację.

Dziesięciogodzinny tryb transportowy

Podstawowa zaleta ułatwiająca opiekunom wykonywanie codziennych obowiązków: tryb statyczny zapewnia odpowiednie podłoże dla pacjenta w czasie transportu, np. do pracowni rentgenowskiej lub innych pomieszczeń szpitala.

Regulacja manualna – pięć ustawień

Redystrybucja ciśnienia może odbywać się w trybach naprzemiennie zmiennego i ciągłego niskiego ciśnienia; możliwe jest dostosowanie czasu cyklu do stanu pacjenta, które pozwala także poprawić jego komfort.

Ustawienia komfortu pozwalają dostosować stopień twardości materaca do preferencji pacjenta. Funkcja silnego napompowania materaca w pozycji siedzącej wspomaga mobilizację pacjenta. Funkcja P-max ułatwia wykonywanie czynności pielęgniarstkich.

Dane techniczne

Nakładka na materac

Długość: 203 cm
Szerokość: 90 cm
Wysokość: 10 cm
Waga: ± 7,8 kg
Maksymalna waga pacjenta: 140 kg
Minimalna waga pacjenta: 30 kg

Powłoka wierzchnia: poliuretan

Moduł zasilający

Długość: 29,1 cm
Szerokość: 20 cm
Wysokość: 11,7 cm
Waga: 2,2 kg
Poziom hałasu: < 45 dB (A)

Zasilanie:

AC 220-240 V, 50 Hz, AC 120 V, 50 + 60 Hz

Zużycie: 9,64 W (220-240 V, 50 Hz)

8,46 W (120 V, 60 Hz)
10,28 W (120 V, 50 Hz)



93/42/EWG
Zgodność z normami:
EN IEC 60601-1
EN IEC 60601-1-2
EN ISO 13485

Hill-Rom and Design i Hill-Rom są zarejestrowanymi markami lub znakami towarowymi firmy Hill-Rom Services, Inc. Safe Skin™ i I-mmersion™ są zarejestrowanymi markami lub znakami towarowymi firmy Hill-Rom Services, Inc.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
Deutschland _____ +49 (0)211 16450-0
Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
Italia _____ + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) _____ +41 (0)21 706 21 38

Österreich _____ +43 (0)2243 28550
Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
Iberia _____ +34 (0)93 6856000
Nordic Countries _____ +46 (0)920 47 47 11
Export _____ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Firma Hill-Rom zastrzega prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, danych technicznych oraz modelach bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją udzielaną przez firmę Hill-Rom jest wyraźna pisemna gwarancja, udzielana przy sprzedaży lub wypożyczeniu jej produktów.
© 2010 Hill-Rom SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone.