

## Partner **Finansowy**

Potrzebujesz nowoczesnej aparatury medycznej, wyposażenia gabinetu lub samochodu?

### Sfinansujemy je dla Ciebie!

Dla gabinetów, aptek i przychodni o obrotach nie przekraczających 1 mln EUR rocznie proponujemy leasing lub pożyczkę RL-MED w Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

#### RL-MED to:

- ✓ atrakcyjne warunki finansowe
- ✓ ekspresowa procedura - minimum formalności
- ✓ finansowanie do 100% inwestycji (brutto dla pożyczki)
- ✓ wygoda i oszczędność czasu

Nie ograniczaj rozwoju swojego gabinetu, skorzystaj z gotowej recepty na finansowanie!



Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Zapytaj o RL-MED leasing lub pożyczkę

Infolinia: 801 57 57 57

e-mail: leasing@raiffeisen.pl  
www.rl.com.pl

## kontakt:

🏠 ul. Gen. J. Sowińskiego 50  
40-018 Katowice

☎ tel.: +48 (32) 350 04 18  
tel.: +48 (32) 350 04 19  
fax: +48 (32) 251 18 35

@ sprzedaz@gemed.info.pl  
relias@adomed2.com.pl

## o firmie

Od 2003 roku firma GEMED jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu medycznego największych producentów tego typu aparatury na świecie – SKYTRON oraz GE Healthcare. Aktualnie nasza oferta obejmuje kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych i przychodni w stoły i lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anesteziologiczne, pełną gamę łóżek szpitalnych, jak i cały wachlarz aparatury medycznej poczynając od ultrasonografów poprzez echokardiografy, mammografy, rentgeny, inkubatory, densytometrię po najnowocześniejsze systemy służące do radioterapii nowotworowej.

Szeroka oferta, partnerzy handlowi i wykonawcy oraz nasze doświadczenie dają Państwu gwarancję skorzystania z kompleksowej oferty usługowo – produktowej.

Oferując sprzęt z zakresu medycyny zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży i wiemy, że wszelkie produkty przez nas oferowane jak i usługi z zakresu serwisu i przeglądu sprzętu, muszą być najwyższej jakości.

Jako firma będąca jednym z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce, mamy możliwość zaoferowania Państwu bardzo atrakcyjnych warunków cenowych na interesujące Państwa produkty.

*Laufanie  
w medycynie*



W razie powstałych pytań bądź wątpliwości pozostajemy do dyspozycji


Z poważaniem



# taurus MED

NAJTAŃSZE  
W PEŁNI ELEKTRYCZNE  
ŁÓŻKO NA RYNKU



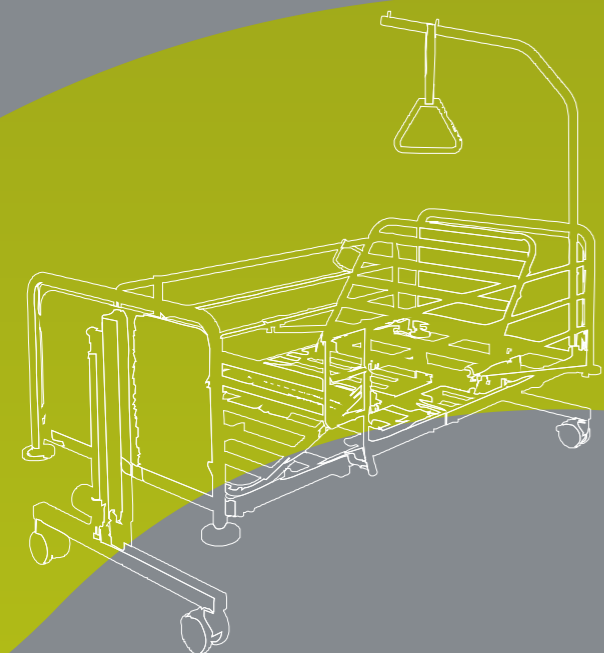

# taurus MED

Wielofunkcyjne w pełni elektryczne łóżko **taurus MED** przeznaczone do pielęgnacji i leczenia chorych. Stanowi podstawę wyposażenia oddziałów intensywnej opieki medycznej, oddziałów rehabilitacyjnych i kardiologicznych.

Konstrukcja oparta na siłownikach kolumnowych ułatwiająca dezynfekcję ze względu na brak trudno dostępnych powierzchni.

Łóżko i barierki w kolorze srebrnym. Leże 4 segmentowe z 3 segmentami ruchomymi zabezpieczone krążkami odbojowymi.

Minimalna wysokość leża poniżej 40 cm umożliwiająca łatwe i bezpieczne wchodzenie i schodzenie pacjenta.

Czterosegmentowe leże wypełnione płaskownikami o szerokości 40mm ułatwia utrzymanie łóżka w czystości i dezynfekcję leża.

Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. Przechyły Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywane są przy użyciu silników elektrycznych znajdujących się przy systemie kolumnowym.

Regulacja wysokości i sekcji leża odbywa się za pomocą pilota wyposażonego w klucz magnetyczny, za pomocą którego blokujemy wszystkie funkcje dostępne w łóżku.

**NOWOŚĆ**

Pilot wyposażony w trzy diody informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji na pilocie.

Łóżko szpitalne Taurus Med wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. Ułatwia to uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej z wyprostowanymi plecami, jednocześnie zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w kierunku szczytu nóg.

Szczyty łóżka wykonane są z rur pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, wypełnione wkładem z płyty dwustronnie laminowanej, wodoodpornej.

Układ jezdny stanowią cztery podwójne koła tworzywowe o średnicy 100 mm w kolorze ramy łóżka szpitalnego, każde z kół wyposażone jest w hamulec

Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe. W narożnikach leża znajdują się tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego, jak wysięgnik, kroplówka itp.

Barierki boczne trzyczęściowe składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601-2-52:2010.



PRODUKT  
POLSKI

- wymiary leża 2000 - 900 mm
- regulacja wysokości 400 - 800 mm
- ANTY / Trendelenburg 15°
- blokada kół indywidualna
- odchylenie op. pleców 70°
- wymiary zewn. 2180 - 950 mm
- automatyczny pilot przewodowy
- blokada magnetyczna blokada zbliżeniowa
- odchylenie op. uda 40°
- obciążenie 210 kg
- funkcja autokonturu
- barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża
- materac z pianki poliuretanowej



kolorystyka

