

ŁÓŻKO PEDIATRYCZNE



CE




2 sekcyjne łóżko pediatryczne z manualną regulacją wysokości oraz pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga

- Manualna regulacja wysokości
- Bariery boczne pokryte bezpiecznym i miękkim poliuretanem
- Przeziernie szczyty łóżka pozwalające na obserwację dziecka



Regulacja wysokości leża

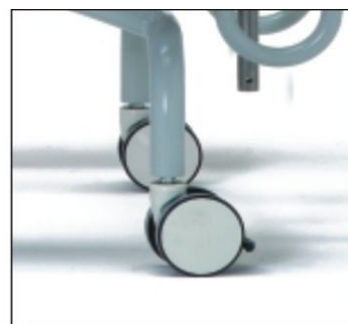

Podwójne koła skrętne



ISO 9001

Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, bezpłatna infolinia: 800 43 90 10
www.oxford.com.pl, email: info@oxford.com.pl

Cechy:

- Konstrukcja wykonana z rur stalowych, od strony głowy wyposażona w dwie tuleje do mocowania statywu kroplówki (opcja) lub wysięgnika ręki (opcja)
- Cała konstrukcja malowana proszkowo farbą epoksydową i suszona w tunelu termicznym w temperaturze 200°C
- 2 sekcyjne leże wyprodukowane według ścisłych norm bezpieczeństwa przy użyciu okrągłych rur pozbawionych ostrych krawędzi
- Leże wyposażone w uchwyty zapobiegające zsuwaniu się materaca
- Wypełnienie leża odejmowane, przymocowane za pomocą zatrzasków, w formie kratownicy z galwanicznie ocynkowanych prętów
- Narożniki łóżka posiadają plastikowe listwy pełniące funkcję odbojników
- Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową uruchamianą za pomocą dźwigni umieszczonych pod leżem od strony głowy; sekcja nóg nieruchoma
- Manualna regulacja wysokości leża, pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga za pomocą metalowych uchwytów umieszczonych na szczytach łóżka
- Szczyty łóżka wykonane z rur stalowych pokrytych miękką pianką poliuretanową, w centralnej części wypełnione przezroczystą płytą z pleksi umożliwiającą ciągłą obserwację pacjenta
- Szczyty boczne z regulowaną wysokością, wykonane z rur stalowych pokrytych miękką pianką poliuretanową, po opuszczeniu chowają się pod platformą leża, zabezpieczone podwójnym zamkiem, w celu uniknięcia przypadkowego zwolnienia blokady
- Podstawa wykonana z rur stalowych, wyposażona w 4 podwójne koła (Ø 100mm); 2 koła z hamulcem

Spełniane normy:

- UNI EN 980
- UNI EN 1041
- UNI CEI EN ISO 14971 UNI 6141

Wyposażenie standardowe:

- Pneumatyczna regulacja sekcji pleców
- 2 tuleje do mocowania akcesoriów
- Podwójne koła Ø 100 mm

Dane techniczne:

- Nośność: 80kg
- Waga łóżka: 85kg
- Koła: Ø 100mm
- Trendelenburg: 12°
- Anty-Trendelenburg: 12°
- Regulacja wysokości: 60÷80cm
- Regulacja sekcji pleców: 0÷70°
- Wysokość barierki bocznej (od leża): 50cm h
- Wymiary leża: 160x70cm
- Wymiary zewnętrzne: 190x82x140cm h

