



ELANSA

TABLE GYNÉCOLOGIQUE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC GYNECOLOGICAL TABLE



L'alliance de l'esthétique et de l'efficacité
When simplicity serves efficiency



Une table facile à utiliser - *Easy-use table*

Une fois votre position de travail réglée grâce au vérin à gaz du dossier, une seule pédale vous permettra simplement le contrôle de la hauteur de la table ELANSA à partir de sa position d'accueil très basse (46 cm). Le confort est renforcé par une nouvelle gestion électronique qui permet des mouvements souples et des démarrages sans à coups.

Once your working position has been adjusted by the gas-spring assisted backrest, a single pedal allows to control the height of the ELANSA table from its very low welcome position (46 cm). The comfort is reinforced with a new electronic control that ensures smooth movements.



Accueil
Welcome



Gynécologie
Gynecology



Examen général
General examination




Position d'urgence
Emergency position



11614-01 + 81036



11610-01 + 81036

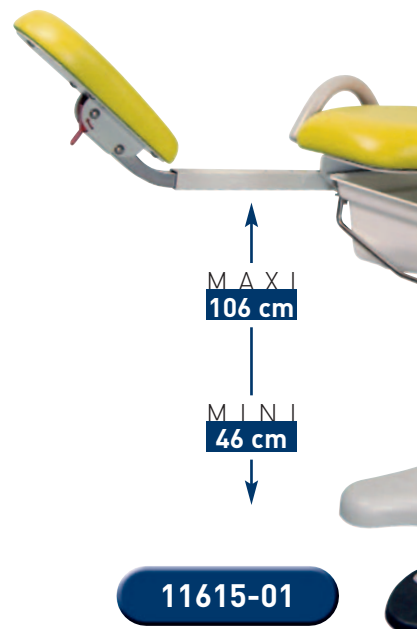

MAXI
106 cm

MINI
46 cm



11615-01

Hygiène - Hygienic

La table Elansa est facile à nettoyer grâce à une sellerie amovible et sans couture et un carter ABS recouvrant. Les repose-pieds (11615-01) sont munis d'une protection plastique pour favoriser le nettoyage et pour une plus grande longévité.

The Elansa table is easy to clean due to its removable and seamless upholstery and formed ABS base. The footrests (11615-01) are equipped with a protective plastic cover to facilitate cleaning and ensure a longer life span.



Sellerie amovible
Removable upholstery



Sellerie sans couture
Seamless upholstery

Le confort « sur mesure » Custom-made comfort

Les repose-pieds (modèle 11615-01) sont ajustables en longueur et en inclinaison ; ils permettent ainsi des positions de jambes pliées ou horizontales (appréciable pour les personnes âgées).

The length and inclination of the footrests (11615-01 model) are adjustable allowing for patient's legs to be placed in a bent or straight position (appreciated by elderly patients).



D'autres modèles
de supports colposcopes
sur demande
Other colposcope holders
available on request

CARACTÉRISTIQUES STANDARD STANDARD FEATURES

Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
Electric height adjustment from 46 to 106cm

Mouvements combinés de l'élévation et du dossier (1 moteur)
Combined height and backrest movements (1 actuator)

Inclinaison du dossier par vérin à gaz
Gas-spring assisted backrest adjustments

Commande par pédale / Pedal control

Patins de réglage sous piètement / Adjustable levelers under base

Bac en plastique sur rail (capacité 6 litres)
Sliding plastic pan (6 liters capacity)

Ancrage bilatéral pour option support colposcope
Bilateral receptacle for optional colposcope holder

Structure supérieure inox (AISI 304) avec finition époxy gris nuage
Stainless steel upper structure (AISI 304) with light grey epoxy finish

Carter ABS gris clair / Light grey ABS base

Sellerie anatomique amovible sans couture
Removable seamless upholstery

Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm - ø 12,5 cm)
Paper roll holder (max. length 50cm - ø 12,5cm)

**Poids maximum du patient autorisé 170 kg
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)
170kg patient weight capacity (tested at a dynamic
weight of 210kg and a static weight of 680kg)**

OPTIONS

1739



Commande par pédale programmable
Programmable pedal control

81036



4 roulettes ø 5 cm avec freins
(Hauteur + 5 cm)
4 castors ø 5cm with brakes
(Height + 5cm)


ACCESSOIRES - ACCESSORIES

11910-01



Support accessoire ø 16 mm
Accessory holder ø16mm

999-81+11910-01

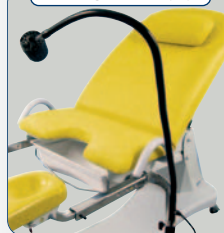

Lampe LED noire
avec fixation ø 16 mm
Black LED lamp
with ø16mm fixation

999-85+11910-01



Lampe LED blanche
avec fixation ø 16 mm
White LED lamp
with ø16mm fixation

2985-01+11910-01



Porte-sérum autobloquant
2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole

11679-01



Appui-tête
Headrest

11372-01



Coussin d'obturateur avec
support (pour 11615-01)
Fill-in cushion with support
(for 11615-01)

12677-01




Grille anti-éclaboussure
Splash guard cover

11272-01



Coussin de pied amovible
avec son support mural
(pour 11610-01 et 11614-01)
Removable leg cushion
with wall support
(for 11610-01 & 11614-01)

11810-01

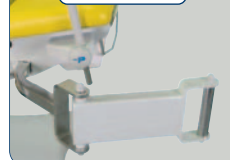

Support colposcope Leisegang
Colposcope holder Leisegang

11830-01




Support colposcope Kaps ø 30
Colposcope holder Kaps ø 30

11840-01



Support colposcope Zeiss ø 38
Colposcope holder Zeiss ø 38

DIMENSIONS (mm)

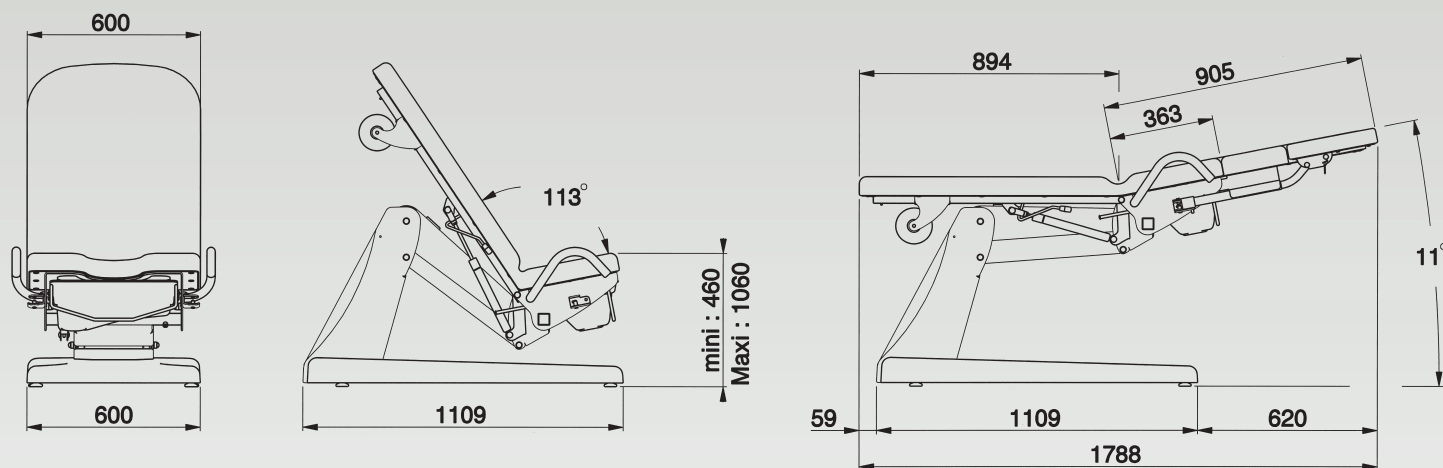

Poids net / Net weight95 kg Poids brut / Gross weight.....135 kg Volume.....0,92 m³

CHOIX DES COULEURS DE SELLERIES - CHOICE OF UPHOLSTERY COLORS

REVÊTEMENT NON-FEU M1 / M1 UPHOLSTERY

Basic



32 - BLEU / BLUE



33 - VERT / GREEN



34 - JAUNE / YELLOW



35 - ROUGE / RED




36 - ORANGE / ORANGE

Trendy




62 - AZUR / AZURE

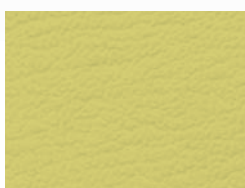

63 - CEDRAT / CEDRAT



64 - RAISIN / GRAPE

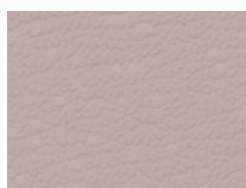

65 - LILAS / LILAC



66 - BONBON / SWEET

Classic




92 - MARINE / MARINE




93 - COTTAGE / COTTAGE



94 - MUSCADE / NUTMEG

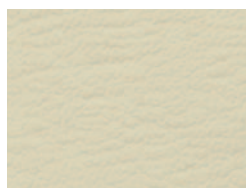

95 - NÉVÉ / FIRN

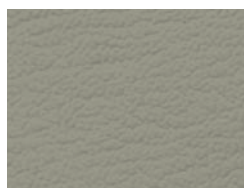


96 - ÉTAİN / TIN

Noirs



56 - OBSCURE / DARKNESS

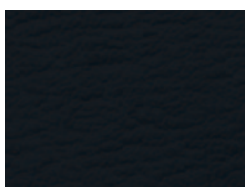

57 - ANTISTATIC*/ANTISTATIC*

* Non classé M1
Not classified M1

REVÊTEMENT RITTER** RITTER UPHOLSTERY**



C1 - NAVY



C2 - DUSTY BLUE



C3 - MOSS

** Uniquement pour certains produits de la gamme Promotal.
Only for some products from Promotal range.



PROMOTAL

C004/FE-21/10

PROMOTAL - FRANCE | www.promotal.com

MIDMARK