

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL




Cena od 4 427,00 €



● przewodnice kaset RTG



● kasetę RTG, uchwyt na butle z tlenem

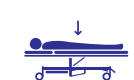

Charakterystyka wózka:

Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjny przeznaczony do przewozu chorych w placówkach służby zdrowia. Wózek posiada dwusegmentowe leże przezierne dla promieni RTG. Pod leżem znajdują się przewodnice na kasetę RTG umożliwiające swobodne wykonanie zdjęć na całej długości leża. Regulację wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz segmentów leża uzyskuje się za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem. Funkcja CPR jest dodatkową zaletą wózka. Wózek wyposażony został w dwie wymienne baterie akumulatorów, pozwalające na nieprzerwaną pracę. Konstrukcja wózka jest oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach, umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C oraz przeprowadzenie reanimacji. Wózek wyposażony został w odejmowalny, tapicerowany materac dostępny w różnych kolorach. Bariereki boczne wykonane są ze stali kwasoodpornej, składane wzdłuż ramy leża. Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożach pełnią funkcję ochronną podczas transportu pacjenta. Podwozie zabudowane jest tworzywem ABS. Metalowe części konstrukcji zostały polakierowane proszkowo. Powierzchnie wózka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.


Parametry techniczne:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Wymiary zewnętrzne: | 750 x 2 100 mm (lub inne) |
| Regulacja wysokości: | 460 ÷ 860 mm (lub inna) |
| Regulacja segmentu pleców: | 75° |
| Przechyłki wzdłużne: | +/- 17° |
| Nośność: | 230 kg (możliwa większa) |
| Średnica kół jezdnych: | 150 lub 200 mm |
| Czas ciągłej pracy baterii: | 6 godzin |

Wyposażenie opcjonalne:

- Poręcze: lakierowane lub chromowane
- Uchwyt prześcieradła jednorazowego
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Półka na kasetę RTG
- Kosz na podręczne rzeczy pacjenta
- Kosz na butlę z tlenem
- Pasy do unieruchamiania pacjenta
- Dodatkowe piąte koło

Przykładowe kolory tapicerki leża

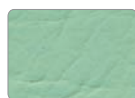


zielony



niebieski



żółty

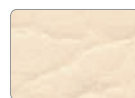

kremowy



bordowy

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:

KENDROMED Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00

e-mail: kendromed@kendromed.pl



KENDROMED

www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25

e-mail: warszawa@kendromed.pl

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 TR






● kasetę RTG

● zdejmowany materac z uchwytem

Cena od 1 884,00 €

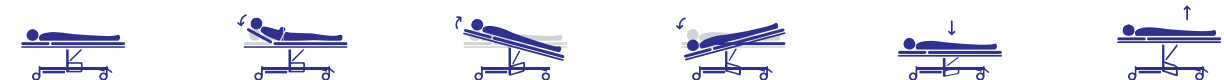

Charakterystyka wózka:

Hydrauliczny wózek transportowo - reanimacyjny, przeznaczony do przewozu chorych w placówkach służby zdrowia. Wózek posiada dwusegmentowe leże przezierne dla promieni RTG. Pod leżem znajdują się prowadnice na kasetę RTG umożliwiające swobodne wykonanie zdjęć na całej długości leża. Hydrauliczna regulacja wysokości uzyskiwana jest za pomocą dwustronnego pedału nożnego. Regulacja segmentu pleców oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane są za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Funkcja CPR jest dodatkową zaletą. Wózek wyposażony został w odejmowalny, tapicerowany materac dostępny w różnej kolorystyce. Barierki boczne wykonane ze stali kwasoodpornej składają się wzdłuż ramy leża. Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożach pełnią funkcję ochronną podczas transportu pacjenta. Podwozie zabudowano tworzywem ABS. Metalowe części konstrukcji zostały polakierowane proszkowo. Powierzchnie wózka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Wymiary zewnętrzne: | 750 x 2 100 mm (lub inne) |
| Regulacja wysokości: | 460 ÷ 860 mm (lub inna) |
| Regulacja segmentu pleców: | 75° |
| Przechyły wzdłużne: | +12°/-16° |
| Nośność: | 180 kg (możliwa większa) |
| Średnica kół jezdnych: | 125, 150 lub 200 mm |

Wyposażenie opcjonalne:

- Poręcze: lakierowane lub chromowane
- Uchwyt prześcieradła jednorazowego
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Kosz na podręczne rzeczy pacjenta
- Kosz na butlę z tlenem
- Pasy do unieruchamiania pacjenta
- Dodatkowe piąte koło
- Półka na kasetę RTG

Przykładowe kolory tapicerki leża



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212






● najprostsza wersja wózka

● pedał sterowania nożnego

Cena od 1 334,00 €

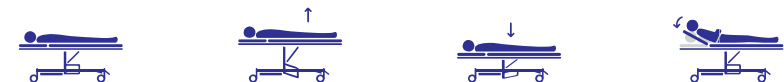

Charakterystyka wózka:

Wózek transportowy przeznaczony do przewozu chorych w placówkach służby zdrowia. Wózek posiada dwusegmentowe leże. Hydrauliczna regulacja wysokości uzyskiwana jest za pomocą dwustronnego pedału nożnego. Regulacja segmentu pleców realizowana jest ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego. Konstrukcja została wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Wózek wyposażono w tapicerowane leże dostępne w różnych kolorach. Materac w tym przypadku jest montowany na stałe. Bariery boczne wykonane ze stali kwasoodpornej są składane wzdłuż ramy leża. Cztery krawki odbojowe umieszczone w narożach pełnią funkcję ochronną podczas transportu pacjenta. Wózek posiada układ jezdny z czterema kołami blokowanymi centralnie. Podwozie zabudowano tworzywem ABS. Metalowe części konstrukcji zostały polakierowane proszkowo. Powierzchnie wózka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 750 x 2 100 mm (lub inne)
 Regulacja wysokości: 460 ÷ 860 mm (lub inna)
 Regulacja segmentu pleców: 75°
 Nośność: 180 kg (możliwa większa)
 Średnica kół jezdnych: 125, 150 lub 200 mm

Wyposażenie opcjonalne:

Poręcze lakierowane lub chromowane
 Uchwyt prześcieradła jednorazowego
 Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
 Kosz na podręczne rzeczy pacjenta
 Kosz na butle z tlenem
 Pasy do unieruchamiania pacjenta
 Dodatkowe piąte koło
 Półka na kasetę RTG
 Zdejmowalny materac

Przykładowe kolory tapicerki leża



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 213



Cena od 592,00 €



● wózek z materacem o grubości 120 mm



● indywidualna blokada kół



Charakterystyka wózka:

Prosty wózek transportowy przeznaczony do przewozu chorych w placówkach służby zdrowia. Wózek ze stałą wysokością leża. Konstrukcja została wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Wózek wyposażono w dwusegmentowe, tapicerowane leże dostępne w różnych kolorach. Regulacja segmentu pleców jest realizowana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego. Wózek wyposażony został w barierki boczne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo - składane wzdłuż ramy leża. Cztery kółka odbojowe w narożach wózka pełnią funkcję ochronną podczas transportu. Układ jezdny tworzą cztery koła blokowane indywidualnie. Metalowe części konstrukcji lakierowane proszkowo mogą być dostępne w kolorystyce tapicerki leża. Powierzchnie wózka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 750 x 2 100 mm (lub inne)
 Regulacja wysokości: 650 mm (lub inna)
 Regulacja segmentu pleców: 65°
 Nośność: 180 kg (możliwa większa)
 Średnica kół jezdnych: 125, 150 lub 200 mm

Wyposażenie opcjonalne:

Poręcze ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
 Uchwyt prześcieradła jednorazowego
 Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
 Kosz na podręczne rzeczy pacjenta
 Kosz na butlę z tlenem
 Pasy do unieruchamiania pacjenta
 Materac o grubości 120 mm

Przykładowe kolory tapicerki leża



zielony



niebieski



żółty



kremowy




bordowy

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

WÓZEK DO MYCIA PACJENTÓW TYP 512 EL

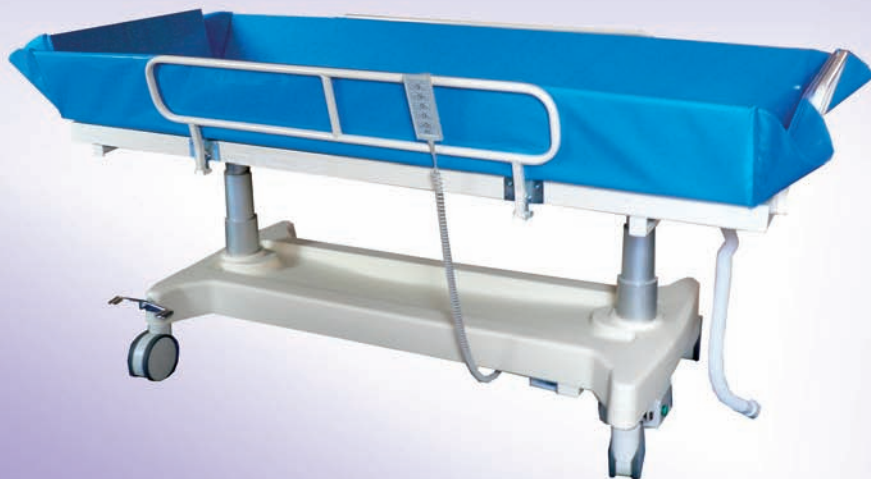


● poręcz boczne zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem



● poduszka (opcja)

Cena od 4 230,00 €

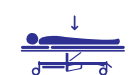

Charakterystyka wózka:

Wózek przeznaczony do mycia i transportu osób w pozycji leżącej. Stanowi on podstawowe wyposażenie szpitalnego oddziału ratownictwa medycznego. Wersja elektryczna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. Zmiana pozycji wózka odbywa się za pomocą siłowników elektrycznych. Wózek wyposażony został w dwa zamienne akumulatory pozwalające na sześciogodzinną bezprzerwową pracę. Konstrukcja wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo została zabezpieczona antykorozyjnie. Jednosegmentowe leże wózka w całości pokryte płytą posiadającą otwór odpływowy. Elektryczna regulacja wysokości leża oraz przechyły wzdłużne realizowane są za pomocą pilota przewodowego. Odchylane poręcz boczne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo zabezpieczono antykorozyjnie. Podwozie wózka obudowano tworzywem ABS. Nakładany materac w formie wanny wykonano z tworzywa odpornego na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Spust wody wyposażono w rurę odpływową dostępną w różnej długości. Powierzchnie wózka są odporne na ścieranie, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Wymiary zewnętrzne: | 700 x 2 050 mm (lub inne) |
| Regulacja wysokości: | 460 ÷ 860 mm (lub inna) |
| Przechyły wzdłużne: | +/- 17° |
| Nośność: | 230 kg (możliwa większa) |
| Średnica kół jezdnych: | 150 lub 200 mm |
| Czas pracy baterii: | 6 godzin |

Wyposażenie opcjonalne:

- Poręcz ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
- Kosz na podręczne rzeczy pacjenta
- Kosz na butlę z tlenem
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Dodatkowe piąte koło
- Poduszka pod głowę pacjenta

Przykładowe kolory materaca - wanny:



ciemnoniebieski



niebieski



jasnoniebieski

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:

KENDROMED Sp. z o.o.

ul. Sołtysovicka 25a, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00

e-mail: kendromed@kendromed.pl



KENDROMED

www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25

e-mail: warszawa@kendromed.pl

WÓZEK DO MYCIA PACJENTÓW TYP 512 TR




Cena od 2 604,00 €



• wózek z odchyloną barierką boczną



• wózek w najniższej pozycji

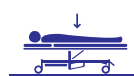

Charakterystyka wózka:

Wózek przeznaczony do mycia i transportu pacjenta w pozycji leżącej. Stanowi on podstawowe wyposażenie szpitalnego oddziału ratownictwa medycznego. Hydrauliczna regulacja wysokości jest uzyskiwana za pomocą dwustronnego pedału nożnego. Wózek standardowo wyposażono w przechyły wzdluzne. Funkcja Anty i Trendelenburga realizowana jest za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Konstrukcja wózka wraz z jednosegmentowym leżem wykonana została ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Całość zabezpieczono antykorozyjnie. Leże wózka posiada funkcjonalny otwór odpływowy. Odchylane poręcze boczne stanowią zdecydowane ułatwienie dla personelu medycznego przy przemieszczaniu pacjenta. Wykonane są ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Podwozie obudowano tworzywem ABS. Nakładany materac w formie wanny wykonano z tworzywa odpornego na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Spust wody wyposażono w rurę odpływową dostępną w różnych długościach.

Parametry techniczne:

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Wymiary zewnętrzne: | 700 x 2 050 mm (lub inne) |
| Regulacja wysokości: | 460 ÷ 860 mm (lub inna) |
| Przechyły wzdluzne: | +12/ -16° (opcja) |
| Nośność: | 180 kg (możliwa większa) |
| Średnica kół jezdnych: | 125, 150 lub 200 mm |

Wyposażenie opcjonalne:

Poręcze ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
Kosz na podręczne rzeczy pacjenta
Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
Dodatkowe piąte koło
Poduszka pod głowę pacjenta
Kosz na butlę z tlenem

Przykładowe kolory materaca - wanny:



ciemnoniebieski



niebieski



jasnoniebieski

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.