

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 SW



Cena od 4 434,00 €

- dodatkowe sterowanie w barierce bocznej (opcja)
- dodatkowe sterowanie nożne (opcja)



Charakterystyka łóżka:

Specjalistyczne łóżko szpitalne przeznaczone dla oddziałów intensywnej opieki medycznej. Wersja mobilna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. Łóżko z pełnym sterowaniem elektrycznym. Regulacje: wysokości segmentu pleców i uda oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane są za pomocą pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (również mechaniczny), pozycja antyszokowa. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe leże wypełnione jest płytą laminatową przezierną dla promieni RTG. Układ jezdny z kołem kierunkowym wyposażony został w blokadę centralną. Barierki boczne dzielone poruszają się wraz z segmentami leża. Podwozie łóżka obudowano tworzywem ABS. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	980 x 2 250 mm (lub inne)
Regulacja wysokości:	460 ÷ 860 mm (lub inna)
Przedłużenie leża:	150 mm (lub inne, opcja)
Przechyły wzdłużne:	+/- 17°
Regulacja segmentu pleców:	75°
Regulacja segmentu uda:	45°
Regulacja segmentu podudzia:	35°
Nośność:	230 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	150 mm

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt ręki, uchwyt pompy
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Wypełnienie leża: tworzywo ABS
- Półka na pościel
- Półka na kasetę RTG
- Sygnal informujący o braku hamulca
- Dodatkowe sterowanie nożne
- Pięte koło zwiększające mobilność łóżka

Łóżko typ Medi Lux SW występuje również w **wersji z przechyłami bocznymi**.



● Dostępne kolory laminatu - wypełnienia szczytów i barierki:



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 PLAST





● łóżko w pozycji Trendelenburga

● precyzyjny system ważenia (opcja)

Cena od 4 896,00 €



Charakterystyka łóżka:

Specjalistyczne łóżko szpitalne przeznaczone dla oddziałów intensywnej opieki medycznej. Wersja mobilna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. Łóżko z pełnym sterowaniem elektrycznym. Regulacje: wysokości segmentu pleców i uda oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane są za pomocą pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Regulacja wysokości może opcjonalnie odbywać się za pomocą sterowania nożnego. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (również mechaniczny), pozycja antyszokowa. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe leże wypełnione jest odejmowalną płytą z tworzywa ABS. Układ jezdny z kołem kierunkowym wyposażony został w blokadę centralną. Szczyty i barierki boczne wykonano z tworzywa ABS. Barierki boczne dzielone, poruszają się wraz z segmentami leża. Podwozie łóżka obudowano tworzywem ABS. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	980 x 2 250 mm (lub inne)
Regulacja wysokości:	460 ÷ 860 mm (lub inna)
Przedłużenie leża:	150 mm (lub inne, opcja)
Przechyły wzdłużne:	+/- 17°
Regulacja segmentu pleców:	75°
Regulacja segmentu uda:	45°
Regulacja segmentu podudzia:	35°
Nośność:	230 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	150 mm

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt ręki, uchwyt pompy
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Leże przeziernie dla promieni RTG
- Półka na pościel
- Półka na kasetę RTG
- Sygnal informujący o braku hamulca
- Dodatkowe sterowanie nożne
- Pięte koło zwiększające mobilność łóżka

Łóżko typ Medi Lux Plast występuje również **w wersji z przechyłami bocznymi.**



● Dostępne kolory laminatu - wypełnienia szczytów i barierek:



pomarańczowy jasnyniebieski niebieski zielony

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE TYP MEDI LUX 410 S



Cena od 4 115,00 €

- tunel kasety RTG
- Autoregresja – ruch wsteczny segmentów pleców i uda podczas regulacji, Autokontur – równoczesna regulacja segmentów pleców i uda



Charakterystyka łóżka:

Specjalistyczne łóżko szpitalne przeznaczone dla oddziałów intensywnej opieki medycznej. Wersja mobilna oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. Łóżko z pełnym sterowaniem elektrycznym. Regulacje: wysokości segmentu pleców i uda oraz funkcja Anty i Trendelenburga realizowane są za pomocą pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (również mechaniczny), pozycja antyszokowa. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe leże jest wypełnione płytą laminatową, przezierną dla promieni RTG. Układ jezdny z kołem kierunkowym został wyposażony w blokadę centralną. Szczyty i barierki boczne wykonano ze stali kwasoodpornej. Szczyty wypełniono płytą z laminatu, dostępną w różnych kolorach. Chromowane barierki boczne składają się wzdłuż ramy leża. Podwozie łóżka obudowano tworzywem ABS. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	980 x 2 250 mm (lub inne)
Regulacja wysokości:	460 ÷ 860 mm (lub inna)
Przedłużenie leża:	150 mm (lub inne, opcja)
Przechyły wzdłużne:	+/- 17°
Regulacja segmentu pleców:	75°
Regulacja segmentu uda:	45°
Regulacja segmentu podudzia:	35°
Nośność:	230 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	150 mm

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt ręki, uchwyt pompy
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Wypełnienie leża: tworzywo ABS
- Półka na pościel
- Półka na kasetę RTG
- Sygnal informujący o braku hamulca
- Dodatkowe sterowanie nożne
- Pięte koło zwiększające mobilność łóżka

Łóżko typ Medi Lux S występuje również **w wersji z przechyłami bocznymi.**



● Dostępne kolory laminatu - wypełnienia szczytów i barierek:



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE TYP MEDI S



Cena od 2 355,00 €



Cena od 3 308,00 €

● NOVA - wersja na kolumnach



● najwyższa pozycja leża



Charakterystyka łóżka:

Elektryczne łóżko Medi S przeznaczone jest do szpitalnej opieki medycznej. Regulacje: wysokości segmentu pleców i uda realizowane są elektrycznie za pomocą pilota przewodowego i/ lub panelu centralnego. Segment podudzia oraz pozycja Anty i Trendelenburga realizowane są mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur. Funkcja CPR realizowana jest mechanicznie. Konstrukcja łóżka wykonana została z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe leże wypełniono odejmowalnym tworzywem ABS. Układ jezdny z kołem kierunkowym wyposażony został w blokadę centralną. Szczyty i barierki boczne wykonane są ze stali kwasoodpornej. Szczyty wypełniono płytą z laminatu, dostępną w różnych kolorach. Chromowane barierki boczne składają się wzdłuż ramy leża. Podwozie łóżka obudowane jest tworzywem ABS. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 960 x 2 060 mm (lub inne)
Regulacja wysokości: 460 ÷ 860 mm (lub inna)
Przedłużenie leża: 150 mm (lub inne, opcja)
Przechyły wzdłużne: +12° /- 16°
Regulacja segmentu pleców: 75°
Regulacja segmentu uda: 45°
Regulacja segmentu podudzia: 35°
Nośność: 180 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych: 150 mm (lub inna)

Wyposażenie opcjonalne:

Uchwyt ręki, uchwyt pompy
Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
Materac dopasowany do wymiarów leża
Półka na kasetę RTG
Piąte koło zwiększające mobilność łóżka
Półka na pościel

Łóżko typ Medi S występuje również w **wersji hydraulicznej oraz pełnej elektrycznej.**



● Dostępne kolory laminatu - wypełnienia szczytów i barierki:



kremowy



pomarańczowy



jasnoniebieski



niebieski




zielony

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE TYP MEDI T

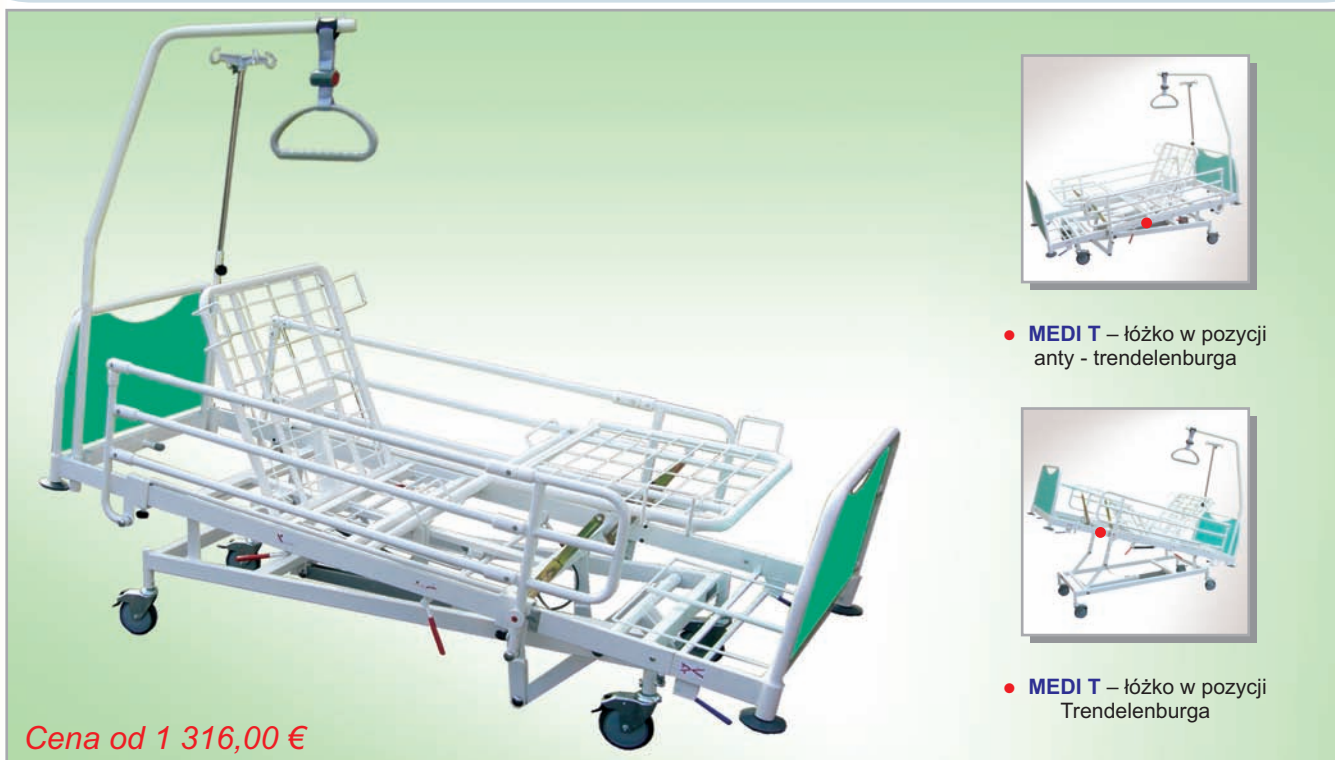

Cena od 1 316,00 €



● MEDI T – łóżko w pozycji anty - trendelenburga



● MEDI T – łóżko w pozycji Trendelenburga



Charakterystyka łóżka:

Proste łóżko rehabilitacyjne z przeznaczeniem dla oddziałów szpitalnych. Łóżko o stałej wysokości leża, wyposażone w funkcję przechyłów wzdłużnych. Regulacja segmentów leża oraz przechyłów wzdłużnych realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego. Funkcja CPR segmentu pleców i uda realizowana jest mechanicznie za pomocą dźwigni oznaczonej na czerwono (opcja). W narożach leża znajdują się tuleje do mocowania wysięgnika oraz wieszaka kroplówki. Konstrukcja łóżka została wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, czterosegmentowe leże wypełniono metalową siatką. Układ jezdny tworzą cztery koła z indywidualną blokadą. Szczyty i barierki boczne wykonano ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Barrierki boczne wyposażone zostały w funkcję bezpiecznego składania wzdłuż ramy leża. Odejmowane szczyty wypełniono płytą z laminatu, dostępną w różnych kolorach. Powierzchnie łóżka odporne są na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 920 x 2 060 mm (lub inne)
 Wysokość leża: 500 mm (lub inna)
 Regulacja segmentu pleców: 75°
 Regulacja segmentu uda: 45°
 Regulacja segmenty podudzia: 35°
 Przechyły wzdłużne: +12°/-15°
 Nośność: 180 kg (możliwa większa)
 Średnica kół jezdnych: 125 mm (lub inna)

Wyposażenie opcjonalne:

Uchwyt ręki
 Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
 Materac dopasowany do wymiarów leża
 Półka na pościel
 Centralna blokada kół
 Szczyty ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
 Poręcze ze stali kwasoodpornej lub chromowanej



● Dostępne kolory laminatu - wypełnienia szczytów i barierek:




kremowy pomarańczowy jasnoniebieski niebieski zielony


Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE TYP KLASIK L 410




Cena od 706,00 €



Cena od 1 018,00 €

- **KLASIK LUX 410** – łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką



Cena od 706,00 €

- **KLASIK 410** – łóżko w wersji, w której rama szczytów i nogi stanowią całość



Charakterystyka łóżka:

Proste łóżko rehabilitacyjne z przeznaczeniem dla oddziałów szpitalnych, domów pomocy społecznej jak również do domu chorego. Łóżko o stałej wysokości leża z mechaniczną regulacją segmentu pleców, uda i podudzia. Funkcja CPR realizowana mechanicznie (opcja). W narożach leża znajdują się tuleje do mocowania wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki oraz ramy ortopedycznej. Konstrukcja łóżka wykonana została z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Czterosegmentowe leże wypełniono metalową siatką, opcjonalnie siatkę można zastąpić odejmowalnym tworzywem ABS. Układ jezdny stanowią koła z indywidualną blokadą. Szczyty wykonane zostały ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Szczyty wypełnione są płytą z laminatu, dostępną w różnych kolorach. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	920 x 2 060 mm (lub inne)
Wysokość leża:	500 mm (lub inna)
Regulacja segmentu pleców:	75°
Regulacja segmentu uda:	45°
Regulacja segmentu podudzia:	35°
Nośność:	180 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	125 mm (lub inna)

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt ręki
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Półka na pościel
- Podwójna rama ortopedyczna
- Indywidualna blokada kół
- Szczyty ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
- Poręcze ze stali kwasoodpornej lub chromowanej
- Barierki boczne



● Dostępne kolory laminatu - wypełnienia szczytów i barierek:



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE DLA DZIECI TYP KIDS TR






● **KIDS TR** – dwustronny pedał nożny ułatwiający opuszczanie poręczy bocznych łóżeczka

● **KIDS TR** – łóżko w wersji z zaokrąglonymi narożnikami

Cena od 1 270,00 €

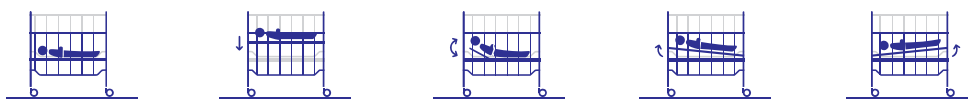

Charakterystyka łóżka:


Łóżko szpitalne KIDS TR przeznaczone jest dla dziecięcych oddziałów szpitalnych. Łóżko o mechanicznej regulacji wysokości leża, wyposażone w funkcję przechyłów wzdłużnych. Dwusegmentowe leże wykonane z metalowej siatki montowanej na stałe. Regulacja segmentu pleców realizowana jest za pomocą mechanizmu zapadkowego, funkcja CPR mechanicznie. W narożach leża znajdują się tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Konstrukcję łóżka wykonano z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Układ jezdny tworzą cztery podwójne koła z tworzywa wyposażone w indywidualną blokadę. Szczyty i bariery boczne wykonane są ze stalowych rurek i prętów lakierowanych proszkowo. Bariery boczne posiadają trzystopniową regulację wysokości. Opuszczanie barierki odbywa się przy pomocy dwustronnego pedału nożnego. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	950 x 1 830 mm (lub inne)
Wysokość leża:	750 ÷ 1 050 mm (lub inna)
Wysokość całkowita:	1 450 mm (możliwa inna)
Regulacja segmentu pleców:	do 70°
Przechyły wzdłużne:	+/- 12°
Nośność:	80 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	75 mm / 100 mm / 125 mm (lub inna)

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Wysięgnik z uchwytem ręki
- Półka/ kosz na drobne rzeczy pacjenta
- Łóżko bez regulacji wysokości leża
- Szczyty wypełnione płytą z laminatu

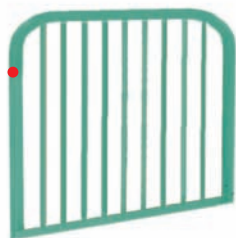

● Dostępne kolory szczytów i barierek:



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO SZPITALNE DLA DZIECI TYP KIDS





● **KIDS** – łóżko dla dzieci z leżem dwusegmentowym. Podstawa łóżka wyposażona w dwa blokowane koła oraz w dwie stopki

● Dodatkowa półka/ koszyk na drobne rzeczy małego Pacjenta

Cena od 976,00 €



Charakterystyka łóżka:

Łóżko szpitalne KIDS przeznaczone jest dla najmłodszych pacjentów oddziałów szpitalnych. Łóżko ze stałą wysokością leża. Wersja podstawowa łóżka posiada leże jednosegmentowe z możliwością regulacji przechyłu wzdłużnego, tak by dziecko nie leżało zupełnie na płasko. Opcjonalnie łóżeczko może posiadać leże dwusegmentowe, regulacja segmentu pleców realizowana jest za pomocą mechanizmu zapadkowego. W narożach leża znajdują się tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Konstrukcję łóżka wykonano z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Leże wypełnione zostało metalową siatką lakierowaną proszkowo. Układ jezdny tworzą cztery podwójne koła z tworzywa wyposażone w indywidualną blokadę. Szczyty i bariereki boczne wykonane są ze stalowych rurek i prętów lakierowanych proszkowo. Bariereki boczne posiadają trzystopniową regulację wysokości. Pod leżem łóżeczka znajduje się półka/ koszyk przeznaczona na drobne rzeczy pacjenta. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	760 x 1 460 mm (lub inne)
Wysokość leża:	700 mm (lub inna)
Wysokość całkowita:	1 450 mm (możliwa inna)
Regulacja segmentu leża :	45° (możliwa większa)
Nośność:	75 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	75 mm / 100 mm/ 125 mm (lub inna)

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Wysięgnik z uchwytem ręki
- Szczyty wypełnione płytą z laminatu
- Łóżko z regulacją wysokości



● Dostępne szczytów i bariererek:



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

SZAFKA TYP 316

- Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
- Błat boczny posiada regulację wysokości i kąta nachylenia (opcja)
- Szuflada i drzwiczki z zatraskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie
- Cztery koła jezdne z blokadą
- Dodatkowa półka na obuwie
- Szeroka gama kolorystyczna
- Wymiary (szer. x gł. x wys.):
46 x 41 x 95 cm (lub inne)

*Cena od 496,00 € z blatem bocznym
od 251,00 € bez blatu bocznego*



SZAFKA TYP 314



- Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
- Błat boczny wspomagany sprężyną gazową posiada regulację wysokości i pochylenia
- Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie
- Cztery koła jezdne z blokadą
- Szeroka gama kolorystyczna
- Wymiary (szer. x gł. x wys.):
52 x 40 x 85 cm (lub inne)

*Cena od 696,00 € z blatem bocznym
od 315,00 € bez blatu bocznego*

SZAFKA TYP Szl 201

- Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
- Błat boczny posiada tylko regulację wysokości
- Szuflada i drzwiczki z zatraskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie
- Cztery koła jezdne z blokadą nie pozostawiające śladów bieżnika
- Szeroka gama kolorystyczna
- Wymiary (szer. x gł. x wys.):
42 x 42 x 80 cm

Cena od 229,00 €



SZAFKA TYP Szl 201o



- Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
- Laminowany błat boczny chowany w obrysie szafki
- Regulacja wysokości oraz kąta nachylenia, wspomagana mechanizmem sprężynowym
- Szuflada i drzwiczki z zatraskiem magnetycznym, otwierane jedno lub dwustronnie
- Cztery koła jezdne z blokadą
- Wymiary (szer. x gł. x wys.):
59,5 x 41,5 x 94,5 cm


Cena od 502,00 €

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

MATERACE PIANKOWE

Materace do łóżek szpitalnych wykonane z wysokogatunkowej pianki. Materace składają się z jednego, dwóch, trzech lub czterech segmentów. W zależności od potrzeb klienta materace wyposażone są w odpowiednio dobrany pokrowiec. Pokrowce są szyte z tkanin paroprzepuszczalnych-oddychających, zmywalnych, nie przepuszczających płynów, odpornych na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę prania. Pokrowce zamykane są na suwak, rzep lub troki wg życzenia użytkownika.

PRZECIWDLEŻYNOWY MATERAC PIANKOWY TYPU SEMA/ SEMA PLUS

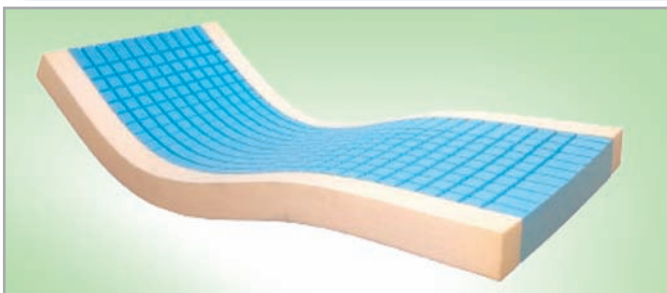


Materac jedno lub dwustronnie nacinany, wersja ze wzmocnionymi krawędziami zwiększającymi komfort pacjenta.

Materac **SEMA**
Materac **SEMA PLUS**

Cena od 150,00 €
Cena od 219,00 €

PRZYKŁADOWE POZOSTAŁE RODZAJE MATERACY PIANKOWYCH

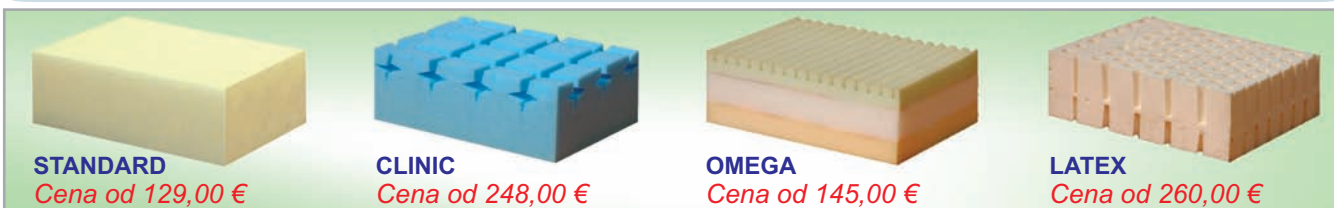

STANDARD

Cena od 129,00 €

CLINIC

Cena od 248,00 €

OMEGA

Cena od 145,00 €

LATEX

Cena od 260,00 €

MATERACE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ



Model	M.300PU	M.500	M.550
Air mikrootworowy	opcja	opcja	opcja
Wyłogi	0	0	0
Komory główne	2	2	3
Komory poprzeczne	18	17	17
Wymiary leża [cm]	90 x 200	90 x 200	90 x 200
Pompa P.22	opcja	opcja	opcja
Przewody do podłączenia z pompą	opcja	0	0
Pokrowiec	Półprzepuszczalny	Membranowy mambraMED®	Membranowy mambraMED®
Stabilny zagłówek	-	0	0
Zawór reanimacyjny CPR	-	0	0
Funkcja transportowa	-	-	0
Cena	<i>od 280,00 €</i>	<i>od 360,00 €</i>	<i>od 360,00 €</i>



DOSTĘPNE MODELE POMP DO MATERACY



P.supra

Cena od 88,00 €

P.lux 2/ P.lux 3

Cena od 118,00 €

P.dyna 2/ P.dyna 3

Cena od 172,00 €

P.dynaBest

Cena od 239,00 €

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE TYP HANA 411 LUX



Cena od 2 717,00 €



Cena od 1 586,00 €

- HANA 411 - wersja z pozycją anty- i Trendelenburga



Cena od 1 368,00 €

- HANA 411 - wersja podstawowa bez przechyłów wzdłużnych



Charakterystyka łóżka:

Łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej wykonanej z litego drewna. Jego przeznaczeniem są oddziały rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej oraz bezpośrednio dom chorego. Konstrukcja łóżka została oparta na dwóch cylindrycznych kolumnach. Łóżko z pełnym sterowaniem elektrycznym. Regulacja wysokości oraz segmentów leża odbywa się za pomocą siłowników elektrycznych, sterowanych pilotem przewodowym, natomiast regulacja segmentu podudzia realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych z blokadą. Dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR (również mechaniczny), pozycja antyszokowa. Rama łóżka wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Łóżko HANA 411 Lux posiada czterosegmentowe leże wypełnione odejmowalnym tworzywem ABS oraz układ jezdny z kołem kierunkowym wyposażony w blokadę centralną. Regulowane w pionie, drewniane barierki boczne zintegrowane są z obudową. Podwozie łóżka obudowane jest tworzywem ABS. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 960 x 2 060 mm (lub inne)
 Regulacja wysokości: 460 ÷ 860 mm (lub inna)
 Przechyły wzdłużne: +/- 17° (opcja)
 Regulacja segmentu pleców: 75°
 Regulacja segmentu uda: 45°
 Regulacja segmentu podudzia: 35°
 Nośność: 180 / 230 kg (możliwa większa)
 Średnica kół jezdnych: 125 lub 150 mm

Wyposażenie opcjonalne:

Uchwyt ręki
 Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
 Materac dopasowany do wymiarów leża
 Krążki odbojowe w narożach łóżka
 Dodatkowy blat do posiłków

● Przykładowe szczyty łóżka w obudowie drewnianej



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE TYP GAMA 911 TR



● system bezpiecznych barierek bocznych



● łóżko elektryczne sterowane pilotem

Cena od 1 395,00 €



Charakterystyka łóżka:

Łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej z przeznaczeniem dla oddziałów rehabilitacyjnych, domów pomocy społecznej, jak również do domu chorego. Łóżko z pełnym sterowaniem elektrycznym. Konstrukcja łóżka wykonana została z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Obudowę konstrukcji nośnej wykonano z litego drewna. Łóżko GAMA 911 TR posiada czterosegmentowe leże wypełnione drewnianymi sprężystymi listwami. Regulacje: wysokości, przechyłów wzdłużnych, segmentu pleców i uda odbywają się za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem. Regulacja segmentu podudzia realizowana jest za pomocą mechanizmu zapadkowego. Łóżko posiada system regulowanych w pionie bezpiecznych barierek bocznych. System ten zabezpiecza kończyny pacjenta przed przypadkowym złożeniem się barierki. Metalowe części konstrukcji łóżka polakierowano proszkowo. Powierzchnie łóżka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	960 x 2 060 mm (lub inne)
Wysokość leża:	400 ÷ 800 mm (lub inna)
Przechyły wzdłużne:	+/- 16°
Regulacja segmentu pleców:	75°
Regulacja segmentu uda:	45°
Regulacja segmentu podudzia:	35°
Nośność:	180 kg (możliwa większa)
Średnica kół jezdnych:	125 lub 150 mm

Wyposażenie opcjonalne:

- Uchwyt ręki
- Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
- Dodatkowy blat do posiłków
- Materac dopasowany do wymiarów leża
- Krażki odbojowe w narożach łóżka
- Wypełnienie leża: laminat, metalowa siatka, tworzywo ABS



● Przykładowe szczyty łóżka w obudowie drewnianej:



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

• - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE TYP SARA 409



• wersja łóżka bez barierki bocznych



• wersja łóżka z barierkami bocznymi opuszczonymi pod ramę leża



Charakterystyka łóżka:

Łóżko rehabilitacyjne w obudowie wykonanej z litego drewna. Powszechnie stosowane na oddziałach rehabilitacyjnych, w domach pomocy społecznej oraz bezpośrednio w domu chorego. Łóżko o stałej wysokości z mechaniczną regulacją segmentów leża. Regulacja: segmentu pleców, uda i podudzia odbywa się za pomocą mechanizmu zapadkowego. Rama łóżka wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Standardowo segmenty leża wypełnione są metalową siatką. Opcjonalnie wypełnieniem leża może być tworzywo ABS lub płyta z laminatu. Drewniane barierki boczne zintegrowane z obudową są regulowane w pionie. W narożach leża znajdują się tuleje do mocowania wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki oraz ramy ortopedycznej. Powierzchnie łóżka odporne są na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 960 x 2 060 mm (lub inne)
 Wysokość leża: 500 mm (lub inna)
 Regulacja segmentu pleców: 75°
 Regulacja segmentu uda: 45°
 Regulacja segmentu podudzia: 35°
 Nośność: 180 kg (możliwa większa)
 Średnica kół jezdnych: 125 lub 150 mm

Wyposażenie opcjonalne:

Uchwyt ręki
 Uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne
 Materac dopasowany do wymiarów leża
 Krążki odbojowe w narożach łóżka
 Dodatkowy blat do posiłków
 Wypełnienie leża: tworzywo ABS/ laminat

• Przykładowe szczyty łóżka w obudowie drewnianej



błękit



zieleń



mahoń



pastelowy róż



turkus

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:
 KENDROMED Sp. z o.o.
 ul. Sołtysovicka 25a, 51-168 Wrocław
 tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
 e-mail: kendromed@kendromed.pl

KENDROMED
www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:
 ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
 tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
 e-mail: warszawa@kendromed.pl

● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

SZAFKA TYP 411



- Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty meblowej
- Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie (opcja)
- Cztery koła jezdne z blokadą
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 42 x 42 x 80 cm (lub inne)

Cena od 110,00 €

SZAFKA TYP 412

- Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty meblowej
- Dodatkowy obrotowy blat boczny do spożywania posiłków
- Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie (opcja)
- Cztery koła jezdne z blokadą
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 52 x 42 x 80 cm

Cena od 180,00 €



SZAFKA TYP 313



- Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty meblowej, z blatem bocznym posiadającym regulację wysokości i kąta nachylenia
- Szuflada i drzwiczki otwierane jedno lub dwustronnie (opcja)
- Dodatkowa półka na obuwie wykonana z metalowej siatki
- Cztery koła nie pozostawiające śladów bieżnika
- Szeroka gama kolorystyczna
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 62 x 42 x 92 cm

Cena od 480,00 €

STOLIK TYP 410

- Stolik wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo
- Blat stolika wykonany z płyty meblowej
- Cztery koła, w tym dwa z blokadą
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 70 x 40 x 80 cm (lub inne)
- Opcje:
 - regulacja wysokości blatu
 - regulacja kąta nachylenia blatu
 - dodatkowy stały blat

Cena od 104,00 €



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.