

SCHILLER

DEFIGARD 4000

Potęga w reanimacji i ratowaniu życia.

Z DEFIGARDEM 4000 defibrylacja staje się tak prosta jak ABC...

Tylko jedno pokrętko, które daje dostęp do wszystkich głównych funkcji urządzenia: wybór energii defibrylacji w trybie manualnym, łatwe ustawienia stymulatora, prosty dostęp do funkcji AED.


DEFIGARD 4000 jest defibrylatorem dwufazowym z falą impulsową o energii do 200 J.

DEFIGARD 4000 to urządzenie przyjazne użytkownikom, o ładnym wyglądzie, niewielkich wymiarach i małej wadze, które perfekcyjnie sprawdza się w każdym nagłym przypadku.



Charakterystyka:

- ✓ Monitor 5,9" przedstawiający stany pracy urządzenia oraz wartości i krzywe EKG i SpO₂
- ✓ Defibrylacja ręczna
- ✓ Tryb AED
- ✓ Monitorowanie EKG
- ✓ Monitorowanie SpO₂
- ✓ Stymulator zewnętrzny
- ✓ 3 kanałowa drukarka wewnętrzna
- ✓ Transmisja danych przez GSM
- ✓ Wbudowany port USB do przenoszenia danych z zewnętrznych urządzeń oraz aktualizowania oprogramowania

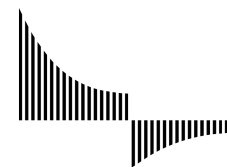

M U L T I P U L S E

B I O W A V E



Dane techniczne DEFIGARD 4000

Defibrylator	Fala defibrylacji – impulsowa, dwufazowa – <i>MULTIPULSE BIOWAVE®</i> Defibrylacja przy użyciu elektrod wiosełkowych (wielorazowych) lub elektrod jednorazowych Wartości energii defibrylacyjnej: 2 do 200 J Tryb AED z elektrodami jednorazowymi; rozpoznanie i automatyczny dobór energii przy dziecięcych elektrodach jednorazowych
Zasilanie	Sieciowe 100-240 V 50/60 Hz Akumulator: ołowiowo-kwasowy Kontrola poziomu naładowania baterii: informacja o naładowaniu i rozładowaniu wyświetlana na ekranie Czas ładowania akumulatora: 1 godz. (do 80%)
EKG	Odprowadzenia: I, II, III, aVR, aVL, aVF (odpowiednio do kabla pacjenta) Wejście: Kabel pacjenta klasy CF, 3 lub 4 odprowadzenia (opcja)
Alarmy	Alarmy systemowe: monitora, defibrylatora, ładowania akumulatora, zapisu i pamięci Alarmy fizjologiczne: EKG, SpO ₂ Alarmy techniczne: wszystkie parametry
Pomiar SpO₂ (opcja)	Technologia Masimo lub Nelcor Włączany i wyłączany poprzez detekcję kabla
Drukarka (opcja)	3 kanałowa drukarka termiczna, papier składany typu „Z” o szerokości 72 mm Prędkości przesuwu: 25 mm/s Tryb pracy automatyczny lub ręczny Wydruk: krzywe, pomiary, zdarzenia, trendy, data i godzina, alarmy
Stymulacja zewnętrzna (opcja)	Tryby pracy: FIX (stały), DEMAND (na żądanie) Używane te same elektrody jednorazowe co w defibrylacji
Pamięć	Wewnętrzna pamięć umożliwiająca przechowywanie 30 minut zapisu EKG, 30 minut zapisu głosowego i 500 zdarzeń (czasu trwania i liczby wstrząsów, daty i godziny wstrząsów)
Wymiary	270 mm x 310 mm x 160 mm
Waga z wyposażeniem	5,3 kg ze wszystkimi opcjami, z bateriami i elektrodami wiosełkowymi

Dane techniczne mogą podlegać zmianie bez uprzedzenia.

Wyposażenie standardowe/opcjonalne

DEFIGARD 4000 z	elektrodami wiosełkowymi	elektrodami jednorazowymi
Wyświetlacz (monitor)	●	●
Alarmy	●	●
Zasilanie: sieciowe i akumulatorowe (SLA)	●	●
Defibrylacja ręczna	●	●
Kabel EKG 3 odprowadzeniowy	●	●
Drukarka	○	○
Tryb AED	○	○
SpO ₂	○	○
Kabel pacjenta 4 odprowadzeniowy	○	○
Stymulator	○	○
Modem	○	○

- standard
- opcja

Dystrybucja:
SCHILLER POLAND Sp z o.o.
UL. ROLNA 157
02-729 WARSZAWA
TEL/FAX +48 22 8432089
+48 22 6473590 do 92
www.schiller.pl e-mail: schiller@schiller.pl
www.schiller.ch

SCHILLER