



Podnośnik wannowy AKILA

Z regulowanym oparciem, kontrolowanym za pomocą jednego przycisku podnośnik wannowy Akila jest mile widzianym uzupełnieniem gamy kąpielowej Lift Plus PL. Szczególnie pomocny dla użytkowników, których specyficzne warunki umożliwiają korzystanie z otwarcia kąta siedziska do tyłu.

Ważący niemal 10kg, solidny i zwarty podnośnik oferuje szereg akcesoriów, co czyni go elastycznym w użytku przez dzieci i osoby starsze w różnych stylach kąpieli.

Podtrzymujące oparcie ze sterowaniem ręcznym

Przyciski kontrolujące nachylenie oparcia


- Zwiększa komfort dla użytkowników sztywnych bioder lub problemów z kręgosłupem (np. skolioza, kifoza)
- Lepszy dostęp higieny dla użytkowników o większych brzuchach

Opływowe kształty

- Podnosi ramiona, szyję i / lub wsparcie głowy
- Pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zagłówkami

Kompaktowa konstrukcja optymalizuje przestrzeń na nogi

- Duża przestrzeń kąpielowa
- Niska wysokość siedziska zapewnia dobre zanurzenie

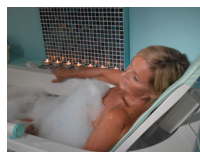

Dostosowany do indywidualnych potrzeb

Wybór akcesoriów

- Umożliwia zastosowanie Akila w szerokim zakresie kąpeli
- Multipozycyjne akcesoria pediaryczne zapewniają wsparcie dla dzieci i mniejszych użytkowników
- Poszycia oferują dopełnienie dla większego komfortu



Akcesoria



Wyścielenie poszycie



Pasy miednicy i klatki piersiowej



Klin poprzeczny



Klin pod nogi



Dysk obrotowy pomocny przy transferze do/z podnośnika

Łatwy w demontażu i przenoszeniu

Lekki, płasko składany

- Kompaktowa konstrukcja podnośnika
- Oszczędność miejsca składowania

Dzieli się na 2 części

Solidny uchwyt zwalniający i ryglowane siedzisko

- Eliminacja niebezpieczeństwa wiążącego się z nagłym otwarciem podbudowy




Higieniczny i łatwy w czyszczeniu

Wyjątkowa, otwarta rama podstawy z ograniczonymi szczelinami

- Łatwy dostęp w czyszczeniu powierzchni podnośnika
- Brud i woda nie osadzają się w szczelinach

Pokrycie cząsteczkami srebra

- Chroni przed szkodliwymi bakteriami i pleśnią

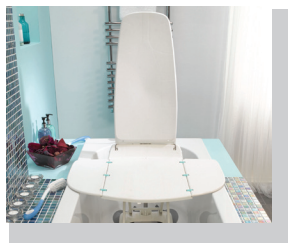

Bezpieczny i łatwy w użyciu

4 duże, obracające przyssawki


- Stabilne dopasowanie na zakrzywionych powierzchniach kąpeli
- Umożliwiają pozycjonowanie daleko w łazni dla zwiększenia miejsca na nogi

Pilot sterowania z dużymi przełącznikami

- Łatwe w obsłudze przez użytkowników o ograniczonej sprawności lub wzroku


Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- Informuje o konieczności naładowania
- Nie obniży użytkownika bez wystarczającej ilości energii akumulatora

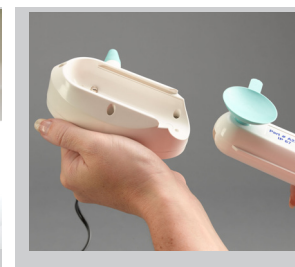

Specyfikacja techniczna:


Siedzisko - 6kg
Oparcie - 3.6kg

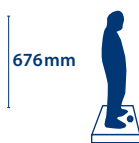

max
140kg












Nie stosować środków
czyszczących na bazie
rozpuszczalnika

Ochrona
antybakteryjna

Produkt pokryty
cząsteczkami
srebra


charge time
2h
ładowania

AKILA

Max. waga użytkownika 	Wysokość 	Szerokość siedziska 	Szerokość skrzydła bocznego 	Wysokość siedziska w górze 	Wysokość siedziska w dole 	Pobór mocy	Cykl pracy
140kg	676mm	360mm	179mm	440mm	75mm	14.4V DC	1 kąpiel 15 min
Waga netto 	Siedzisko 	Oparcie 	Kąt nachylenia oparcia	Pilot sterujący i bateria	Moc wejściowa	Moc wyj ciowa	Stopie ochrony
9.6kg	6kg	3.6kg	35°		14.4V dc	14.4V dc	IP 68
Ładowarka	Moc wejściowa	Moc wyj ciowa	Praca i ładowanie	Max temp	Min temp		
	100-240V ac	14.4V dc		40°C (104°F)	0°C (32°F)		

LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp.j.
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
k. Częstochowy
tel./fax: +48 34 314 03 10,
e-mail: biuro@liftplus.pl

