

# Podnośniki sufitowe WS 200/WS 300

Kompleksowe rozwiązania dla:

· TWOJEGO DOMU · DOMÓW OPIEKI · SZPITALI



Radość życia bez barier

INFOLINIA: **801 90 00 88**





## Sufitowy zakres podnoszenia serii WS 200 i WS 300

Jeden unikalny zakres, sześć różnych opcji modelu. Każdy inteligentnie zaprojektowany, aby spełnić oczekiwania klienta, jak i opiekuna. Przedstawiamy gamę WS 200 i WS 300 - bezpiecznych i wydajnych rozwiązań.



Elastyczna konstrukcja oznacza również że WS 200 i WS 300 można z łatwością podłączyć do sufitu lub do wolno stojącej jednostki (z zastrzeżeniem badania konstrukcji miejsca).

Estetycznie zaprojektowane podnośniki zapewniają dyskretny system kontrolowanego transferu z łóżka, wózka lub podłogi.

WS 200 i WS 300 pasują do niemal każdego miejsca, nawet w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak multi oddziały szpitalne, gdzie ograniczona przestrzeń może utrudnić korzystanie z mobilnego podnośnika.



Samodiagnostyka -  
sygnał dźwiękowy, jeśli  
pojawi się problem

Wskaźnik ładowania LED  
i sygnał dźwiękowy  
wskazujący niski stan  
baterii

Wolnobieżny lub napędzany silnik

Montowany do sufitu lub  
wolnostojący

▶ Miękki start / stop dla  
sprawnego i  
bezpiecznego  
transferu na  
wszystkich osiach

Estetycznie  
zaprojektowana  
skrzynka

▲ Zmienna prędkość  
na wszystkich osiach

+ Ogranicznik  
przeciążenia

★ Funkcja  
zatrzymania  
awaryjnego i  
awaryjnego  
opuszczania

Prosty w ładowaniu

Drążek z hakami  
bezpieczeństwa i  
projektem zwrotnicy

● Przejrzysty i  
prosty sposób  
użycia słuchawki

Opcja montażu X-Y  
umożliwia całkowite  
pokrycie pokoju.

Solidnie zaprojektowane  
haki bezpieczeństwa



## Opcje modeli i udźwig

- WS 200: 200kg
- WS 300: 272kg
- Bariatryczny model suwnicy: 445kg



## ● **Przejrzyste sterowanie ręczne dla łatwej obsługi**

- 24V dla ciągłej i niezawodnej pracy
- Opcja sterowania na podczerwień

## Rzetelnie testowane

- Podnośniki WS 200/WS 300 zostały przetestowane w sekcji trwałości British Standard BS EN ISO 10535: 1998 z tysiącami testów ciągłego podnoszenia i opuszczania.

## ★ Zatrzymanie awaryjne i opuszczanie podnośnika

- W małoprawdopodobnych sytuacjach awarii akumulatora podnośniki zostały wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania/opuszczania, które są dogodnie zlokalizowane na spodzie urządzeń. Wszystko w celu ułatwienia dostępu do bezpiecznego i kontrolowanego zejścia.
- W przeciwieństwie do innych podnośników WS 200/WS 300 posiadają osobne baterie opuszczania awaryjnego.

- Estetycznie zaprojektowana pokrywa jest dobrze zabezpieczona przez śrubę zwiększającą bezpieczeństwo urządzenia.

## + Ogranicznik przeciążenia

Zatrzymuje urządzenie gdy waga maksymalna zostanie przekroczona.

W sytuacji gdy opiekun jest rozproszony przy obsłudze urządzenia wyłącznik kreńcowy zabezpiecza podniesionego pacjenta gdy zostanie podniesiony zbyt wysoko lub obniżony zbyt nisko.

## Instalacja i serwis

Zespół wykwalifikowanych inżynierów może szybko zainstalować sprzęt, zapewniając obsługę i utrzymanie go dla przestrzegania przepisów.



- Wolnobieżny lub zasilany silnik oraz rozwiązanie XY dla pełnego pokrycia pomieszczenia.

## ▶ **Gładki start/stop** –

Podnośniki mają łagodny start/stop dla kontrolowanego ruchu i pozycjonowania.

- ▲ **Zmienna predkosc** – regulowana za pomocą słuchawki. Prędkość jazdy można ustawić indywidualnie dla osoby.

## ● **Prosty w ładowaniu**

także podczas długich odstępów czasowych, działanie akumulatora nawet dla 250 kolejnych wyciągów z pacjentem o wadze 75kg.



### **Elastyczne opcje i akcesoria do toru jazdy**

Talerz obrotowy: Dodaje elastyczność toru jezdnego  
Opcje modelu manualnego lub mechanicznie napędzanego.  
System X-Y: Pełne pokrycie pomieszczenia.  
Łuki: Dostępne w 15°, 30°, 45° i 90° sekcjach.

### **Kompleksowy zakres temblaków/nosideł**

Lekkie, o podwyższonej ognioodporności, z trwałego materiału. Dostępne rozmiary dziecięce.

### **Rozwiązania bariatryczne z podwojną kasetą**

Bezpieczne obciążenie robocze: 445 kg.  
Wolnostojące systemy bramowe.

### **Przenosny podnosnik Wispa Lite i układ bramowy Lite Track**


Tymczasowe, awaryjne lub pół-trwałe rozwiązanie wolnostojące. System bez instalacji. Łatwy montaż w 5 minut bez użycia narzędzi lub drabiny. 210 kg maksymalnego obciążenia (łącznie z podnośnikiem).

### **Badanie, instalacja i obsługa**

Zespół wykwalifikowanych inżynierów wraz z technikami może szybko zainstalować sprzęt, zapewniając obsługę i utrzymanie go dla przestrzegania przepisów.


### **Rozszerzone programy gwarancyjne**

Gwarancja Supercare obejmująca pełne koszty awarii na okres do pięciu lat.

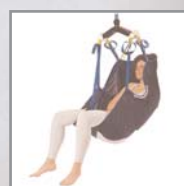


### Uniwersalny system pokrycia X-Y

System "XY" zapewnia całkowite pokrycie pokoju. Na przykład użytkownik może być przenoszony pomiędzy łóżkami szpitalnymi (patrz rysunek A).

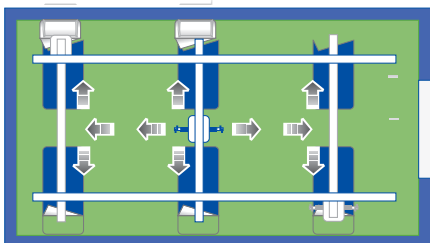

Rysunek A

Poruszanie się pomiędzy pokojami jest również proste. Wispa umożliwia łatwe przenoszenie, otwór sufitowy może być wyposażony w większości pomieszczeń w całym domu (patrz rysunek B).

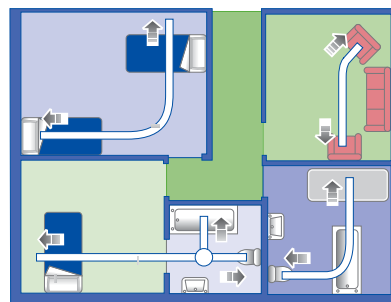

Rysunek B

