

unity okulistyczne Classic / Classic SIMPLE / Mini
stoliki okulistyczne SE-1/SE-2/SE-2A

Jakość
ergonomia
design




Unit okulistyczny Classic

Unit okulistyczny CLASSIC składa się z bazy, blatu przesuwanego na 2 urządzenia [1], miejsca na rzutnik [2] oraz fotela podnoszonego elektrycznie [3].

Fotel wyposażony jest w wysokiej jakości siłownik szwajcarskiej firmy Schumo [4], podnóżek [5] oraz podłokietniki [6](opcja). Siedzenie fotela obite jest skajem w kolorach wg wzornika.

Blat przesuwany blokowany jest elektromagnetycznie. Wyposażony jest on w gniazdo niskonapięciowe 6V do zasilania lampy szczelinowej oraz gniazdo zasilające o napięciu 230V.

Ponadto na unicie mocowane jest oświetlenie w postaci lampki halogenowej [7] z regulacją natężenia światła oraz opcjonalne balansowe ramię foroptera. Unit obsługuje się w wygodny i łatwy sposób z podręcznego panelu sterowania [8].

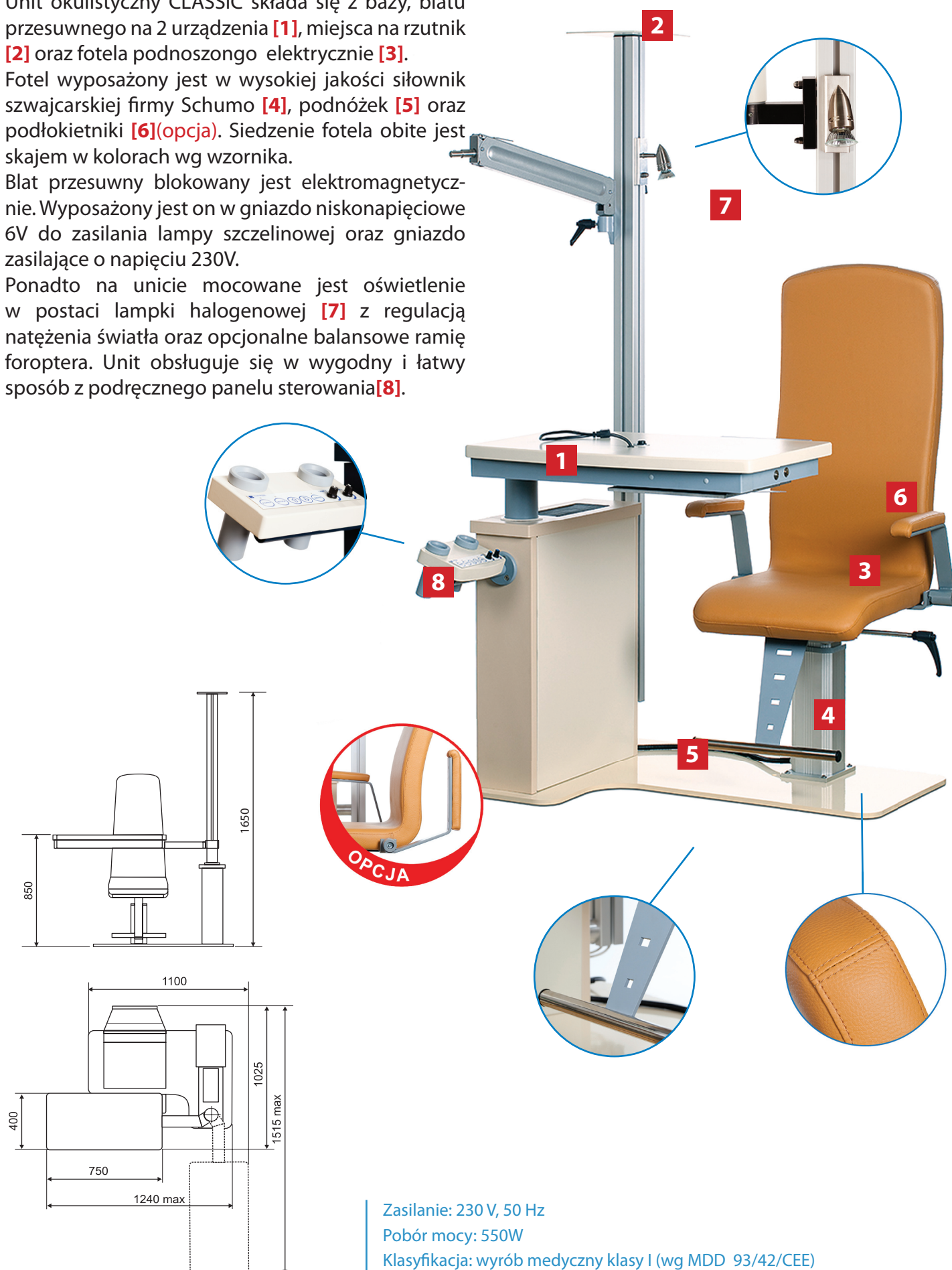

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Pobór mocy: 550W



Klasyfikacja: wyrób medyczny klasy I (wg MDD 93/42/CEE)

Unit okulistyczny Classic SIMPLE



Unit okulistyczny CLASSIC Simple składa się z bazy, blatu na 2 urządzenia (nieprzesuwanego), półki na rzutnik oraz fotela podnoszonego elektrycznie. Do fotela zamocowany jest podnóżek oraz podłokietniki (opcja). Unit ten posiada wygodny i łatwy w obsłudze panel sterowania, który wbudowany został w blat unitu.

Blat blokowany jest elektromagnetycznie. Znajdują się w nim 2 gniazdka zasilające, w tym jedno niskonapięciowe. Opcjonalnie unit ten wyposażony może być w lampkę halogenową oraz ramię foroftera.

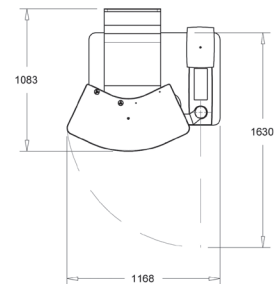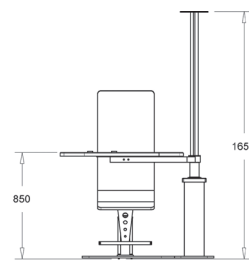

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Pobór mocy: 300W

Klasyfikacja wyrób medyczny klasy I (wg MDD 93/42/CEE)



Unit okulistyczny Mini

Unit okulistyczny Mini składa się z bazy, blatu na 2 urządzenia, mocowania rzutnika lub półki na rzutnik oraz fotela podnoszonego elektrycznie.

Blat nieprzesuwany mocowany jest rękojeścią umiejscowioną z boku korpusu bazy. Unit obsługuje się w łatwy i wygodny sposób za pomocą panelu znajdującego się na blacie unitu.

Blat wyposażony jest również w gniazdko zasilające o napięciu 230V.

Opcjonalnie unit może być wyposażony w lampkę halogenową oraz ramię foroftera.

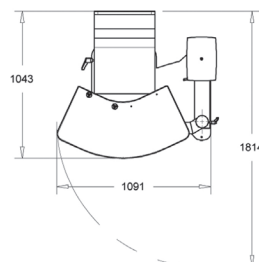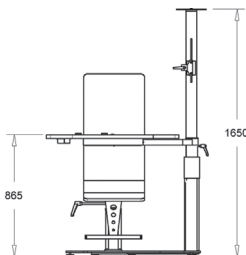

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Pobór mocy: 300W

Klasyfikacja wyrób medyczny klasy I (wg MDD 93/42/CEE)



Unity dostępne są we wszystkich kolorach palety RAL.



Stoliki okulistyczne typ: SE-1, SE-2, SE-2A


Stoliki elektryczne **SE-1, SE-2, SE-2A** przeznaczone do współpracy z urządzeniami okulistycznymi. Produkowane są w wersjach: jedno i dwustanowiskowej. Wyposażone są w elektryczny siłownik szwajcarskiej firmy Schumo o dużym zakresie regulacji wysokości. Posiadają stabilną, trwałą i odporną na zarysowania podstawę z regulowanymi stopkami.

W wyposażeniu opcjonalnym dostępne są kółka z blokadą zamiast stopek oraz podwieszona szuflada na komputer. Błat stolika jest standardowo w kolorze szarym lub opcjonalnie w dowolnym kolorze wg palety RAL.

Standardowe modele stolików:


SE-1

Stolik z kolumną centralną na jedno urządzenie.

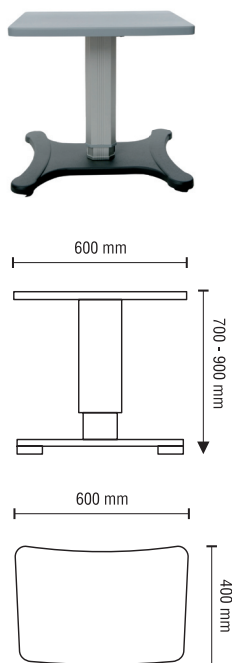


SE-2

Stolik z kolumną montowaną centralnie na dwa urządzenia.

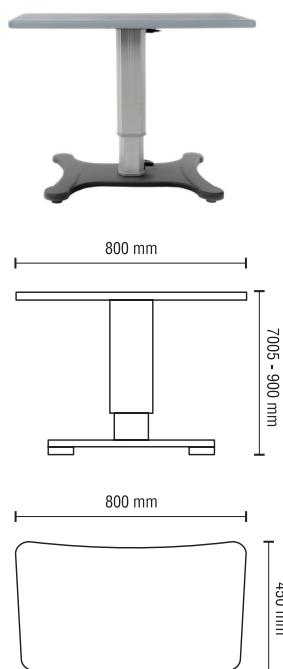

SE-2A

Stolik asymetryczny z blatem na dwa urządzenia (może występować również w wersji na jedno urządzenie).

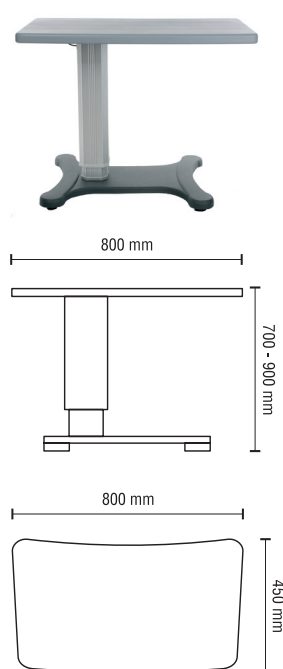

Dane techniczne:

Typ	SE-1	SE-2	SE-2A
Rozmiar	600 mm x 400 mm	800 mm x 450 mm	800 mm x 450 mm
Wysokość	700 mm - 900 mm	700mm - 900 mm	700mm - 900 mm
Waga	30 kg	32 kg	32 kg
Zasilanie	230V, 50-60Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Max. obciążenie	60 kg	80 kg	80 kg

Klasyfikacja: wyrób medyczny klasy I (wg MDD 93/42/CEE)