

**Waldmann** **W**  
ENGINEER OF LIGHT.

PL

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII UV 182



[WWW.WALDMANNPOLSKA.PL](http://WWW.WALDMANNPOLSKA.PL)

# SYSTEM FOTOTERAPII UV 182



Modułowy system Waldmann UV 182 oferuje dermatologom zupełnie nowe możliwości prowadzenia terapii miejscowych przy pomocy promieni UV.


Urządzenie standardowo wyposażone jest w centralny panel sterujący, który kontroluje pracę do czterech modułów z lampami UV jednocześnie. Dzięki szybkozłączom, moduły w prosty i szybki sposób mogą być przełączane pomiędzy poszczególnymi gniazdami – pozycje od 1 do 4. System automatycznie rozpoznaje konfigurację oraz rodzaj lamp w module (UVA lub UVB), co znacznie ułatwia obsługę urządzenia, a także jego rozbudowę w dowolnej chwili.



Modułowa konstrukcja systemu UV 182 pozwala lekarzowi na prowadzenie selektywnej terapii skóry dłoni, stóp czy twarzy, a także na naświetlanie kilku partii ciała jednocześnie.

Przy pomocy opcjonalnych czujników UV, system może stale monitorować natężenie promieniowania UV, gwarantując dokładne dawkowanie.

## Najważniejsze cechy:

- Obracany monitor TFT 10.4" z panelem dotykowym
- Centralne sterowanie modułami
- Automatyczne rozpoznawanie modułów
- Szybka i prosta rekonfiguracja systemu
- Elektrycznie regulowana pozycja statywu
- Opcjonalnie: system czujników UV, osłona z filtrem UV, uchwyt ścienny do przechowywania 2 modułów

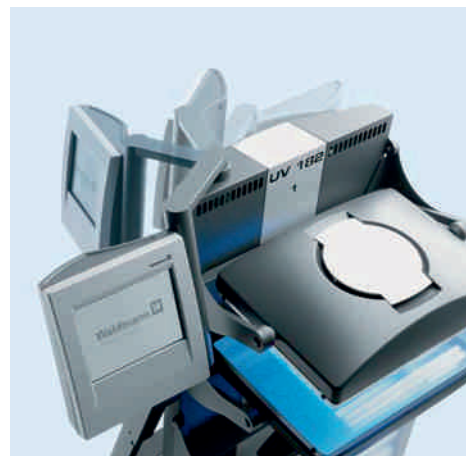

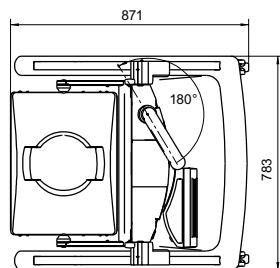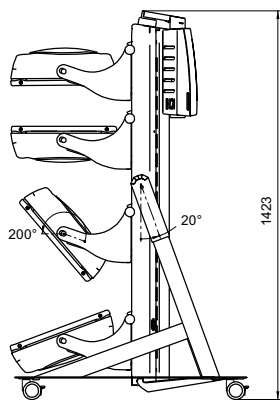

## PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (dł. x wys. x szer.):

Statyw

ok. 783 x 1423 x 863 mm

Moduł

ok. 619 x 203 x 456 mm

Waga (bez opakowania):

Statyw (pełna/podstawowa konfiguracja)

ok. 69 kg / 62 kg

Moduł

ok. 8.5 kg

Kolor:

RAL 7016 (anthracite grey)

RAL 9006 (white aluminium)

Pobór mocy:

Statyw

64 W cos φ 0.95

Moduł

174 W cos φ 0.95

Zasilanie:

230 V/50 Hz lub 220 V/60 Hz

Przewód:

ok. 5 m

Klasa ochronności:

Klasa II a

### Opcje wyposażenia (dla każdego modułu)

- 4 x PUVA 36 W
- 4 x UV6 36 W (szerokopasmowe UVB)
- 4 x TL01 36 W (wąskopasmowe UVB 311 nm)
- 4 x UVA1 36 W

Uwaga: Statyw urządzenia dostępny jest w dwóch wersjach. W wersji pełnej statyw wyposażony jest w gniazda od 1 do 4; w wersji podstawowej statyw wyposażony jest w gniazda 2 i 4. Możliwa jest późniejsza rozbudowa.



0297

**HEADQUARTERS GERMANY**

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Postfach 50 62  
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN  
GERMANY  
Telephone +49 7720 601-200  
Fax +49 7720 601-290  
www.waldmann-medizintechnik.com  
info-puva@waldmann.com

**FRANCE**

WaldmannEclairageS.A.S.  
ZoneIndustrielle  
Ruedel'Embranchement  
67116REICHSTETT  
FRANCE  
Telephone+33388209588  
Fax+33388209568  
www.waldmann.com  
info-fr@waldmann.com

**SWITZERLAND**

Waldmann Lichttechnik GmbH  
Benkenstrasse57  
5024Kü TTIGEN  
SWITZERLAND  
Telephone+41628391212  
Fax+41628391299  
www.waldmann.com  
info-ch@waldmann.com

**THE NETHERLANDS**

WaldmannBV  
Lingewei19  
4004LKT IEDEL  
THENETHERLANDS  
Telephone+31344631019  
Fax+31344627856  
www.waldmann.com  
info-nl@waldmann.com

Euroscalemed sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polskę.

Oferuje pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także dostawę części zamiennych.

[www.waldmann-medical.com](http://www.waldmann-medical.com)  
[www.waldmannpolska.pl](http://www.waldmannpolska.pl)



**Biuro handlowe**  
ul. Szczecińska 61/67  
91-222 Łódź  
tel. +48 42 652 01 28  
+48 42 612 20 04

e-mail: kontakt@es-med.pl  
www.euroscalemed.pl

**Serwis**  
ul. Flamandzka 19  
91-160 Łódź  
tel. + 48 42 612 33 23  
e-mail: serwis@es-med.pl