

ELI 250c

KOLEJNA GENERACJA 12-KANAŁOWYCH APARATÓW EKG DO BADAŃ SPOCZYNKOWYCH




12-KANAŁOWY elektrokardiograf

CECHY PRODUKTU

- **Aparat przenośny**
Kompaktowa obudowa i mała waga, ELI™ 250c zapewnia wszechstronną funkcjonalność, a zarazem prostą obsługę i jest jednocześnie aparatem przenośnym.
- **Wyświetlacz graficzny LCD**
Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz do podglądu bieżącego 12-odprowadzeniowego EKG, a po rejestracji do jego przeglądania.
- **Wyróżnienie dla Algorytmu Mortara VERITAS™ Analiza Spoczynkowego EKG**
Uznany w świecie algorytm interpretacji spoczynkowego EKG osoby dorosłej i dziecka; stanowi pomoc w ocenie 12-kanałowego zapisu EKG.
- **Wybierz Bezprzewodową lub Tradycyjną akwizycję sygnału EKG**
ELI 250c oferuje możliwość wyboru innowacyjnego rozwiązania WAM™ - bezprzewodowego modułu akwizycji sygnału EKG lub przewodowego AM12. Moduły posiadają wymienne kable, przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu.
- **Najlepsze 10s- "Best 10"**
ELI 250c automatycznie wybiera i wyświetla 10 najlepszych sekund z pełnego 5 minutowego ciągłego zapisu EKG, skraca to czas wykonania badania eliminując niejednokrotnie konieczność powtarzania rejestracji.
- **Pełna Klawiatura**
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta oraz klawisze funkcyjne do zapisu EKG w trybie automatycznym i ręcznym oraz inicjowania dwukierunkowej transmisji danych.
- **Interfejs Wymiany Informacji**
Dwukierunkowa transmisja danych przez modem wewnętrzny, sieć LAN, sieć bezprzewodową WLAN, lub mobilny GPRS do systemów Mortara E-Scribe™ i Athena, lub innych np.: EMR, HIS i systemów PACS poprzez XML, PDF, UNIPRO32, oraz DICOM32®.

 Mortara

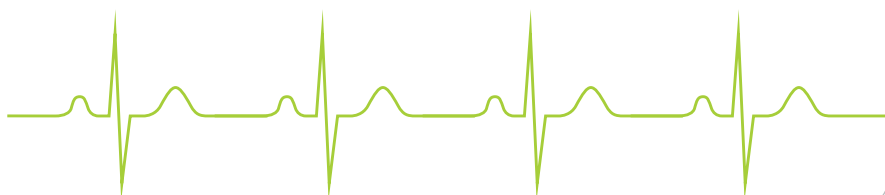

MORTARA INSTRUMENT, INC.

7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Service: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

MORTARA RANGONI EUROPE, SRL

(European Headquarters)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

MORTARA INSTRUMENT AUSTRALIA

PO Box 7568
Baulkham Hills NSW 2153
Unit 28, 9 Hoyle Avenue
Castle Hill NSW 2154
Australia
Tel: +61 2 8070 9303
Fax: +61 2 9899 9478

www.mortara.com

ISO 13485 CERTIFIED


GWARANCJA + SERWIS

Firma Mortara Instrument zapewnia najwyższy poziom wsparcia klienta. Prosimy o kontakt w celu wybrania optymalnego programu opieki serwisowej.

ELEKTROKARDIOGRAF ELI™ 250c

CECHY	SPECYFIKACJA*
RODZAJ URZĄDZENIA	12-kanałowy elektrokardiograf
KANAŁY WEJŚCIOWE	Jednoczesna akwizycja 12 kanałów
STANDARD ODPROWADZEŃ	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
WYŚWIETLACZ	Ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD 1/4 VGA (320 x 240), prezentacja grupy 3, 4+4 lub 6+6 kanałów jednocześnie
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA DYNAMIKA WEJŚCIOWA NAPIĘCIE NIEZRÓWNOWAŻENIA CMRR	Spełnia lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI EC11
PRĄD UPŁYWU PACJENTA PRĄD UPŁYWU OBUDOWY	Spełnia lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI ES1
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA	40.000 próbek/s/kanał – wykrywanie stymulatora 1.000 próbek/s/kanał – rejestracja i analiza
FUNKCJE OPCJONALNE	Algorytm VERITAS interpretacji EKG uwzględniający wiek oraz płeć osoby badanej; wybór standardu dwukierunkowej transmisji danych
RODZAJ PAPIERU	Papier termiczny formatu A4 (210 mm); składanka 250 stron
DRUKARKA TERMICZNA	Sterowana komputerowo matryca 8pkt/mm
PRZESUW PAPIERU	5, 10, 25 lub 50 mm/s
CZUŁOŚĆ	5, 10 lub 20 mm/mV
FORMATY WYDRUKU	Standardowy lub Cabrera; 3+1, 3+3, 6, 6+6 lub 12 kanałów
WYDRUKI W TRYBIE RĘCZNYM	3, 6 lub 12 kanałów z konfigurowalną grupą odprowadzeń
RODZAJ KLAWIATURY	Elastomerowa z pełnym zestawem znaków alfanumerycznych, zmienne etykiety menu i dedykowane klawisze funkcyjne
PASMO PRZENOSZENIA	0.05 do 300 Hz
FILTRY	Wysokiej jakości filtr linii izoelektrycznej, filtr sieciowy 50/60 Hz, filtry dolnoprzepustowe 40 Hz, 150 Hz lub 300 Hz
PRZETWARZANIE A/C	20 bitów (1.17 uV LSB)
KLASA URZĄDZENIA	Klasa I, Typ CF – urządzenie odporne na defibrylację
PAMIĘĆ ZAPISÓW EKG	Standardowo do 100, opcjonalnie do 200 zapisów
WAGA	5.1 kg z baterią (bez papieru)
WYMIARY	394 x 432 x 102 mm
ZASILANIE	100-240 VAC / 50/60 Hz; akumulator wewnętrzny bezobsługowy

*Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi.

AM12™, ELI™, E-Scribe™, VERITAS™ oraz WAM™ są znakami towarowymi firmy Mortara Instrument, Inc.

DICOM® jest znakiem towarowym zarejestrowanym w National Electrical Manufacturers Association jego publikacje dotyczą standardów komunikacji cyfrowej informacji medycznych.

ENG 1

DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:

02-884 Warszawa, ul. Puławska 538
Tel: +48 (22) 644-80-62
Fax: +48 (22) 644-81-89
e-mail: mds@e-mds.pl
<http://www.e-mds.pl>