

Ambulo 2400

AMBULATORYJNY SYSTEM DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA KRWI



HOLTER ciśnieniowy

CECHY PRODUKTU

- **24-godzinne Rozwiązanie dla Twojego Ambulatorium**

24-godzinny system monitorowania ciśnienia krwi oferuje innowacyjność, rzetelność pomiarów oraz niezawodność.

- **Wysoka Dokładność**

Potwierdzona dokładność, spełniająca rygorystyczne standardy kliniczne Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, AAMI SP-10 oraz światowego standardu ISO.

- **Sprawdzona Technologia**

Opatentowana metoda oscylometryczna wraz z zaawansowanym oprogramowaniem Microsoft® opartym na platformie Windows® umożliwia sprawną obsługę pacjenta, archiwizację danych, analizę i dokumentację danych pomiarowych.

- **Opcja Actigraphy – Monitor Aktywności Ruchowej**

Automatyczne określanie stanów snu/czuwania na podstawie opatentowanego unikalnego rozwiązania, zwalnia pacjenta z potrzeby prowadzenia dzienniczka aktywności, a także umożliwia synchronizację zdarzeń podczas badań klinicznych.

- **Pełny Podgląd**

Szczegółowe raporty z pomiarów ciśnienia krwi w ciągu rytmu dobowego, a także wszystkich zdarzeń i błędów.


- **Imponujący & Komfortowy**

Kompaktowa lekka obudowa w połączeniu z wrażeniem łagodnie opadającej fali nie narusza pacjentom komfortu codziennych zajęć i minimalizuje niedogodności badania.

- **Łatwy w Obsłudze**

Szybkie, proste podłączanie noszą korzyści zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Cicha i płynna praca umożliwia zwiększenie częstotliwości pomiarów jak również wpływa na precyzję wyników pomiarów.

 **Mortara**

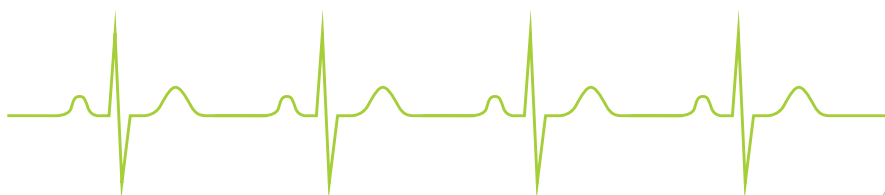

MORTARA INSTRUMENT, INC.

7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Service: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

MORTARA RANGONI EUROPE, SRL

(European Headquarters)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

www.mortara.com

ISO 13485 CERTIFIED

GWARANCJA + SERWIS

Firma Mortara Instrument zapewnia najwyższy poziom wsparcia klienta. Prosimy o kontakt w celu wybrania optymalnego programu opieki serwisowej.


AMBULO™ 2400 SYSTEM DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA KRWI

CECHY	SPECYFIKACJA*
WYMIARY	4.7 x 2.7 x 1.2" (119 x 68 x 32 mm)
WAGA	253 g (z bateriami)
ZASADA POMIARU	Opatentowana oscylometryczna technika liniowej deflacji.
ZAKRESY POMIAROWE	Skurczowe: 60 do 280 mmHg Rozkurczowe: 30 do 160 mmHg Tętno: 30 do 180 mmHg
DOKŁADNOŚĆ POMIAROWA	Ciśnienie krwi: ± 3 mmHg średniej różnicy ± 8 mmHg odchylenia standardowego Zakres Tętno: ± 3 bpm Zgodny z ANSI/AAMI SP-10:2002 & BHS (Grade A/A) oraz ISO 81060-2:2009
INTERWAŁY POMIAROWE	Regulowane w przedziale 24-godzin 4 interwały, każdy konfigurowalny w odstępach co 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 105 lub 120-minutowych. Opcjonalnie możliwość randomizacji do 75% w obrębie interwałów. Możliwość wykonania badań przedłużonych, ze standardowych 24-godzinnych do maksymalnie 7 dni. Opcjonalnie możliwość ustawienia harmonogramu pomiarów dla Fazy I-wszej badań klinicznych obejmujących próbki PK/PD w dyskretnych punktach czasowych opartych na wymaganiach protokołu. Pomiar dokonane są w określonych momentach czasowych aż do ich wyczerpania.
DOSTĘPNE MANKIETY	W zestawie komplet 3 mankietów: Standardowy, Duży oraz Mały. Opcjonalnie mankiet Easy Wear™.
OPCJA ACTIGRAPHY	Zapis z akcelerometru z trzech osi XYZ w celu wyświetlenia i programowa kategoryzacja cykli dzień (aktywność)/noc (sen).
PAMIĘĆ	Technologia półprzewodnikowa Flash. Pozwala na 2700 pomiarów ciśnienia krwi oraz 7 dni ciągłego monitorowania aktywności ruchowej.
INTERFEJS PC	USB
ZASILANIE AKUMULATOROWE	Akumulatory 2 x 1.2V NiMH; 2.4V DC, Maksymalny prąd: 610mA. Wystarcza na około 300 pomiarów przy wykorzystaniu regularnych mankiet dla dorosłych.
OPROGRAMOWANIE	Hypertension Diagnostics Suite wymaga komputera PC z systemem Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista lub Windows 7 z minimalną rozdzielczością grafiki 1024 x 768.

*Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi.

Ambulo™ jest znakiem handlowym Mortara Instrument, Inc.

Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

ENG 2

DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:

02-884 Warszawa, ul. Puławska 538
Tel: +48 (22) 644-80-62
Fax: +48 (22) 644-81-89
e-mail: mds@e-mds.pl
<http://www.e-mds.pl>