

Nocospray.2

Najprostsza dezynfekcja metodą zamglawiania

Niskie koszty dezynfekcji !



**SZYBKA DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ**

CE 0499

 **Greenpol**®

Nocospray.2

Automatyczna dezynfekcja pomieszczeń

Dezynfekcja pomieszczeń za pomocą dyfuzji **suchej i niewidocznej mgły** opartej na 6% nadtlenu wodoru i kationach srebra (**NOCOLYSE.6**) generowanej przez podręczny dyfuzor (**NOCOSPRAY.2**)

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA NOCOSPRAY.2:


- Technologia suchej mgły o wielkości 5 mikronów
- Komputerowa kontrola dezynfekcji za pomocą czytnika USB*
- Zapis daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji*
- Możliwość opóźnienia czasu startu*
- Bardzo szybka dyfuzja środka w całym pomieszczeniu (3 min dla 50 m³) i możliwość użytkowania już po 30 minutach
- Kompatybilny ze sprzętem elektronicznym znajdującym się wewnątrz pomieszczenia
- Dezynfekuje całe pomieszczenie wraz ze sprzętem
- Bardzo łatwy w użyciu
- Małe wymiary urządzenia, waga tylko 5,8kg
- * Dotyczy Nocospray.2 USB

Urządzenie zgodne z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC

CHARAKTERYSTYKA DEZYNFEKANTU NOCOLYSE.6:

- Skład: H₂O₂, Ag⁺
- Biodegradowalny w 99,9%
- Nietoksyczny
- Niekorozyjny
- Aktywność: bakteriobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza i sporobójcza
- Nocolyse.6 nie posiada formaldehydu, amoniaku oraz chloru co czyni go bezpiecznym dla użytkownika
- Bardzo niskie zużycie środka dezynfekcyjnego (1 ml/m³)
- Nie pozostawia osadu
- Możliwość sprawdzenia penetracji środka – **NOCOTEST****

Minimalne Ryzyko Infekcji - osiągnięte jest po kilku dniach regularnego stosowania i utrzymane poprzez codzienne używanie **Nocospray.2**

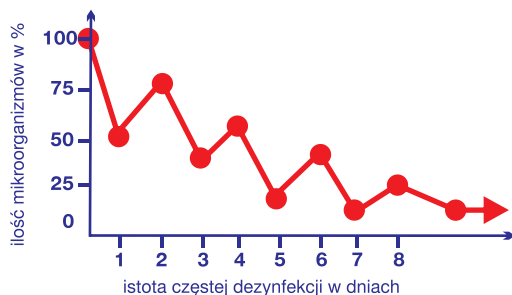

DOSTĘPNE ŚRODKI:

NOCOLYSE.6 NEUTRAL / MINT

- środek dezynfekujący bezzapachowy / o zapachu miętowym

NOCOLYSE.12 ONE SHOT

- środek dezynfekujący o podwójnym działaniu

NOCOLYSE.6 NOCODOR

- środek dezynfekujący likwidujący nieprzyjemne, intensywne zapachy

NOCOLYSE FOOD

- środek dezynfekujący przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością

OXYDOR

- środek dezodorujący


ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

NF T 72 281
NF EN 1040
NF EN 1276
NF EN 1275
NF EN 1650
NF T 72 180



MIJESCA ZASTOSOWANIA:

- ambulanse
- bloki operacyjne
- oddziały intensywnej terapii
- oddziały zakaźne
- oddziały neonatologiczne
- sale chorych
- gabinety lekarskie
- gabinety weterynaryjne
- laboratoria
- hotele
- szatnie
- systemy klimatyzacyjne

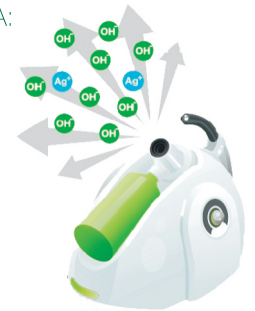

DOSTĘPNE WERSJE:



- Nocospray.2 - standardowa wersja urządzenia bez czytnika USB.
- Nocospray.2 USB - wersja urządzenia z możliwością komputerowego zapisu danych
- Nocospray.2 z timerem - możliwość ustawienia godziny startu



- Nocospray Wall - stacjonarne urządzenie do dezynfekcji szczególnie polecane do ambulansów



- Nocomax - urządzenie do dezynfekcji dużych pomieszczeń o kubaturze nawet do 20 000 m³.
- Wbudowany port do komunikacji z komputerem, co umożliwia archiwizację parametrów
- Łatwy w obsłudze wyświetlacz informujący m.in. o ilości środka dezynfekcyjnego
- Możliwość programowania czasu

**NOCOTEST – testy wskaźnikowe zmieniające kolor w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym



WYNIKI

AKTYWNOŚĆ ŚRODKA: BAKTERIOBÓJCZA, WIRUSOBÓJCZA, GRZYBOBÓJCZA I SPOROBÓJCZA

Dostępne liczne badania: IN VITRO oraz IN VIVO

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
MRSA Staphylococcus aureus
Aspergillus Niger
Bacillus subtilis var. Niger spores
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium tuberculosis

Clostridium Difficile
H5N1, H1N1
Orthopoxvirus
Adenovirus V
Rhinovirus Influenza
Norovirus
Polio I
Candida albicans

ver.0.1 05-12-2013r