



Przyłóżkowy mobilny system szynowy PMS został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu pracy personelu medycznego. Dzięki mobilnej podstawie umożliwia przemieszczanie pacjenta na łóżku wraz z aparaturą medyczną między oddziałami szpitalnymi.

Stelaż przystosowany jest do mocowania aparatury medycznej, butli tlenowej oraz osprzętu szynowego, takiego jak: wieszak kroplówki, uchwyt na monitor, koszyki na akcesoria, uchwyt do butli do tlenu, pojemnik na cewniki, uchwyt do worka na odpady, uchwyt na kable, uchwyt do butelek, maszt pomp infuzyjnych, miska na odpadki, pojemnik na narzędzia, listwa zasilająca i wiele innych akcesoriów według zapotrzebowania Zamawiającego.

Bogata gama akcesoriów sprawia, że przyłóżkowy mobilny system szynowy PMS można dostosować do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Elementy **systemu szynowego PMS** wykonano z:

stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo lub z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9


szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podtrzymująca wyposażenie medyczne

podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą



Przykładowe rozwiązania systemu szynowego PMS

Przykładowe rozwiązania

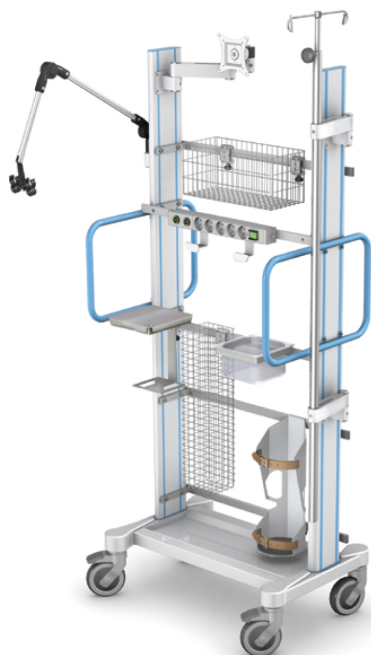

PMS z wyposażeniem



PMS z wyposażeniem

Proponowane ustawienia



Za łóżkiem pacjenta



Przed łóżkiem pacjenta



Obok łóżka pacjenta