

Dzięki nowej wannie balneologicznej **Orionmed Balneo** kąpiel solankowa może być wzbogacona o efektywny hydromasaż przy pomocy dysz kierunkowych. Dzięki zastosowaniu hydromasażu balneologicznego, kąpiele solankowe wykonywane w wannie **Orionmed Balneo**, oprócz oddziaływania chemicznego, powodują również rozluźnienie mięśni, przemieszczenie płynów ustrojowych oraz poprawiają przemianę materii.



Długość: **214 cm**




Wysokość: **85 cm**



Szerokość: **85 cm**



Waga: **170 kg**

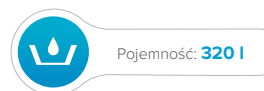

Pojemność: **320 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego, odporna na działanie solanki,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (160-280 l),
- 26 dysz kierunkowych do hydromasażu,
- łatwo dostępny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-99 min.),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system dezynfekcji i odkamieniania,
- system usuwania wody z całej instalacji wanny,
- 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu),
- specjalna pompa oraz armatura przystosowana do kąpiele solankowych,
- poręcze na dłoń, profilowane miejsca na kończyny górne i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień,
- dodatkowy zawór CO₂ (opcja).

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	160-280
Pojemność do przelewu [l]:	320
Czas napełniania / spustu [min]:	ok. 4
Pobór mocy: [kW]	4,5
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	214 x 85 x 85
Masa [kg]:	170 (195 z pełnym wyposażeniem)
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B

Możliwości zabiegowe:

- balneoterapia: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody termalne, kąpiele z dodatkiem płynnej borowiny,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora (opcja CO₂),
- hydromasaż balneologiczny lub wodny,
- kąpiele w piwie,
- chromoterapia (opcje CHROMO),
- muzykoterapia (opcja AUDIO).

Kąpiele solankowe - wskazania:

- choroby reumatoidalne,
- zwyrodnienia stawów i kręgosłupa,
- stany pourazowe kości i stawów,
- schorzenia ze zwiększonym napięciem mięśniowym,
- nerwice,
- przewlekłe choroby dróg oddechowych,
- zaburzenia krążenia obwodowego.

Opcje dodatkowe:

CO₂: dodatkowy zawór CO₂

CHROMO 2R: chromoterapia - 2 reflektory

CHROMO 4R: chromoterapia - 4 reflektory

CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła

CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła

CHROMO 36: chromoterapia - 36 pojedynczych źródeł światła

AUDIO: zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

