

Respirator VELA®

Kompleksowy. Uniwersalny. Sprawdzony.

Personel medyczny intensywnej terapii potrzebuje rozwiązań umożliwiających prowadzenie najwyższej, jakości terapii oddechowej. Respirator VELA® zapewnia wszechstronny zakres możliwości klinicznych dla dzieci i dorosłych.



Zaawansowana technologia wentylacji w jednym urządzeniu

W przepełnionym szpitalu gdzie wszechstronność sprzętu jest krytyczna, respirator VELA umożliwia wszechstronną wentylację dorosłych i dzieci, ze wsparciem inwazyjnym lub nieinwazyjnym.



Kompleksowy

- Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna
- Opcje dla dorosłych i dzieci
- Zaawansowane ustawienia do leczenia najtrudniejszych przypadków
- Wentylacja nieinwazyjna w wielu trybach z automatyczną kompensacją nieszczelności
- Podwójne ramię wentylacji nieinwazyjnej zwiększa eliminację CO₂
- Wentylacja bezdechu z wybranym typem oddechu
- Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia obsługę
- Zintegrowane monitorowanie kapnografii objętościowej

Uniwersalny

- Realizuje wiele aplikacji z oddziałów pierwszej pomocy, intensywnej terapii
- Działa niezależnie od źródeł powietrza zapewniając dużą elastyczność
- Przenośna jednostka pozwala na pracę na oddziale I w transporcie
- Wysokociśnieniowe wejście O₂ do miksera
- Niskociśnieniowe wejście O₂ na akumulator
- Wewnętrzny akumulator dużej pojemności na 6 godzin pracy
- Zastawka wydechowa umożliwiająca rozmowę

Sprawdzony

- Opatentowana technologia turbiny zapewniająca przepływ 180 l/min
- Dwa lata gwarancji na respirator, pięć lat lub 40 tys. godzin na turbinę
- Precyzyjny zintegrowany mieszalnik gazów, monitorowanie i alarmy FiO₂
- Pełne 24 godzinne trendy wszystkich monitorowanych parametrów
- Niskie koszty eksploatacji turbiny bez regularnych przeglądów

Intuicyjna obsługa

Wygodny ekran dotykowy respiratora VELA redukuje czas nauki, zapewnia spójną obsługę różnych funkcji i zwiększa pewność użytkownika.

Tryby

Okno operacyjne wyświetla aktualny tryb i zapewnia łatwy i elastyczny dostęp do pozostałych trybów pracy

Wyświetlane dane pomiarowe

Pięć mierzonych parametrów wybranych z 19, wyświetlane na ekranie

Ekran główny

Aktywna matryca, kolorowy dotykowy ekran LCD, wyświetla skalowalną grafikę

Ustawienia wentylacji

Nastawy respiratora wyświetlane są na wszystkich ekranach

Nebulizator


Zsynchronizowany z wdechem o regulowanym czasie podawania leku 1 -60 min

Menu

Dodatkowe menu łatwo dostępne z ekranu głównego

Alarmy

Informacje o alarmach są wyświetlane z sygnałem akustycznym, zgodnie z priorytetem

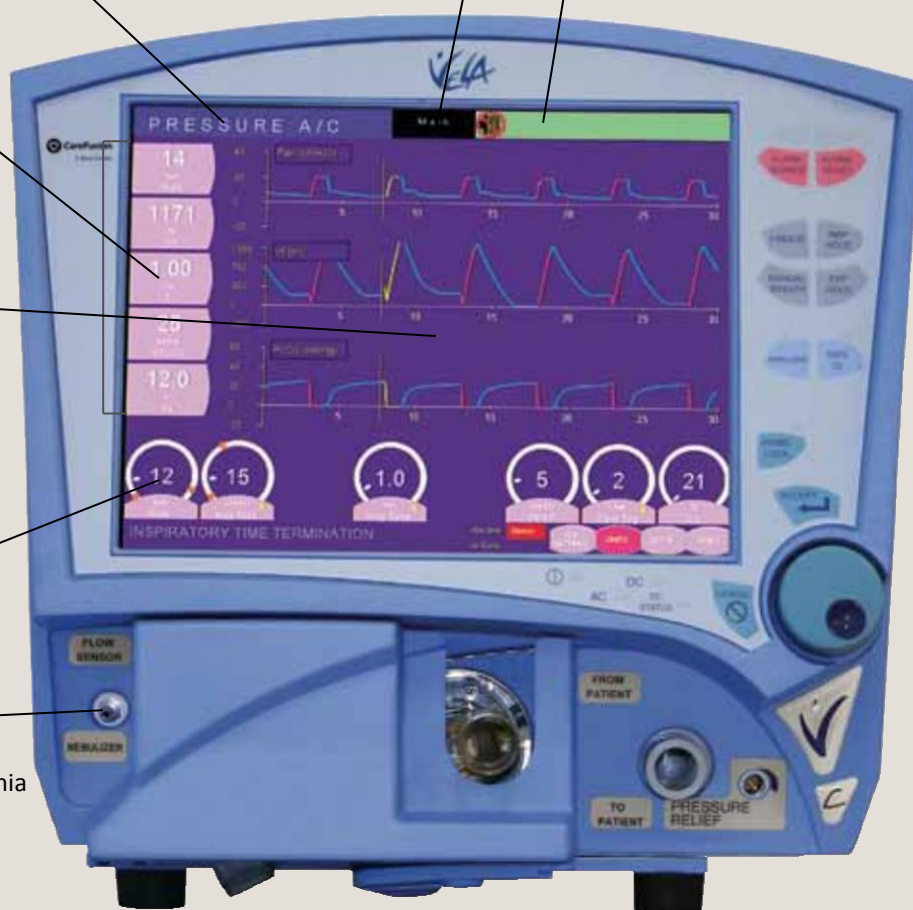

Trendy

Inteligentny skalowalny ekran wyświetla dane minuta po minucie w postaci graficznej i tabelarycznej wszystkich mierzonych parametrów



Dedykowany ekran danych

Konfigurowalny ekran monitorowania umożliwia dobranie odpowiednich parametrów dokumentacji



Opcje zaawansowane

Zintegrowana kapnografia końcowo wydechowa dostarcza istotnych danych do oceny monitorowanego pacjenta.

 **WARNING:** U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

CareFusion
22745 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, CA 92887
800.231.2466 toll-free
714.283.2228 tel
714.283.8493 fax

CareFusion
Yorba Linda, CA

carefusion.com

© 2012 CareFusion Corporation or one of its subsidiaries. All rights reserved. VELA and Simple Touch are trademarks or registered trademarks of CareFusion Corporation or one of its subsidiaries. RC1021-01 (0412/2000) L 3145 Rev. C

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Lifemed Poland Sp.z o.o.
ul. Cybernetyki 19b
02-677 Warszawa
Tel. 0 22 862 83 75/76