

## Przenośny mini inkubator CO<sub>2</sub> NB-203M

MINICell™


Kompaktowy i ekonomiczny mini inkubator z atmosferą CO<sub>2</sub>

Właściwości:

- Komora o pojemności 15,2 litra
- Lekki, łatwy do przenoszenia
- Waga tylko 6,8 kg
- Posiada rączkę ułatwiającą przenoszenie oraz wtyczkę do ładowarki samochodowej
- Ekonomiczna cena i kompaktowe wykonanie do użytkowania osobistego
- Mały rozmiar umożliwia pracę w komorach laminarnych i warunkach sterylnych
- Cyfrowo ustawiana temperatura i poziom CO<sub>2</sub>
- Wymuszony obieg powietrza
- Doskonały rozkład temperatury
- Szybki powrót do ustawień CO<sub>2</sub> kontrolowany przez czujnik IR
- Chłodzenie z bardzo niskim poziomem hałasu
  - 2 półki ze stali nierdzewnej (standard)
  - Utrzymanie wilgotności przy użyciu naczyń z wodą
- Chłodzenie i grzanie przy użyciu elementów Peltiera
- Naczynie z wodą ze stali nierdzewnej
- Wtyczka i gniazdo samochodowe



NB-203M

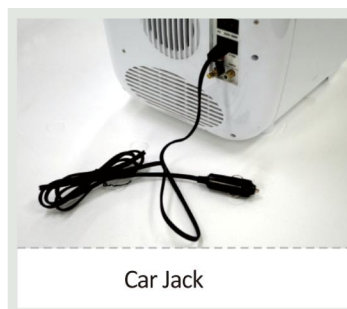

Car Jack



# INKUBATORY Z ATMOSFERĄ CO<sub>2</sub>

Specyfikacja:

| Model                            | NB-203M  |
|----------------------------------|--|
| Zakres temperatury               | +15 do +45°C przy temp. otoczenia +25°C                                  |
| Dokładność temperatury           | ±0,25°C przy 37°C  |
| Kontrola temperatury             | Micom  |
| Zakres CO <sub>2</sub>           | 0% do 20%  |
| Czujnik CO <sub>2</sub>          | Dwuwiązkowy IR   |
| Dokładność CO <sub>2</sub>       | ±0,1% dla 5%   |
| Wilgotność                       | Do 80%   |
| Ciśnienie gazu                   | 1 bar  |
| Wyświetlacz                      | LED  |
| Chłodzenie i grzanie             | Moduły Peltier (elementy termoelektryczne)                               |
| Wentylator wewnętrzny            | Tak  |
| Półki                            | 2 ze stali nierdzewnej (max 3 szt.)                                      |
| Objętość komory                  | 15,2 litra   |
| Materiał wewnętrzny i zewnętrzny | Tworzywo ABS   |
| Wymiary wewnętrzne               | 224 x 200 x 340 mm   |
| Wymiary zewnętrzne               | 292 x 333 x 433 mm   |
| Waga                             | 6,8 kg   |
| Zasilanie                        | DC12V, AC230V, 50/60 Hz  |
| Zużycie energii                  | DC-zimny: 46W, gorący: 48W<br>AC-zimny: 63W, gorący: 63W                 |
| Opcje<br>203M-Hole<br>203M-SHELF | φ12 mm port dostępowy z zaślepką<br>Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej |

