



MEDICART. BELGIAN DESIGN AND FUNCTIONALITY

This cart is built according to the Euronorm standard and is compatible with all current Euronorm 600 x 400 baskets. All options can be easily attached to the corner profiles. Thanks to the materials used (aluminium and plastic) the cart is light and manoeuvrable.

All the materials are resistant to corrosion and also to popular cleaning and disinfecting products. The materials are resistant to UV and heat. The carts have 4 grey, non-marking casters with bearings (including 1 electrically conducting Rifix wheel and one wheel with a brake) Ø 125mm with polyurethane hubs. The double Easy-roll Tente® wheels ensure that rolling resistance is kept to a minimum.

Standard colour: U67.001 PE silver-grey and red. Other colours are available on request.

Medicarts can be fitted with telescopic drawers, modular sides and various options.

MEDICART. DOBRY WZÓR I FUNKCJONALNOŚĆ

Ten wózek jest zbudowany zgodnie z normą Euronorm i jest zgodny z wszystkimi koszami Euronorm o wymiarach 600 x 400 mm. Wszystkie opcje mogą być łatwo zaadoptowane do narożnych profili. Zastosowane materiały (aluminium i plastik) sprawiają, że wózek jest lekki i zwrotny.

Wszystkie materiały są odporne na korozję i na popularne środki do mycia i dezynfekcji. Materiał jest odporny na działanie światła UV i wysokie temperatury. Wózki mają 4 koła z nie pozostawiającego ślady materiału (włączając jedno koło z hamulcem i jedno antystatyczne) o średnicy Ø 125 mm z poliuretanowymi tulejami. Podwójne koła Easy-roll zapewniają minimalny opór toczenia.


Standardowy kolor: U67.001 PE srebrnoszary i czerwony. Inne kolory na zamówienie.

MEDICART. SAMPLE MEDICART CONFIGURATION

The Medicart can be configured entirely according to the customer's wishes, and the customer determines the subdivisions and the number of accessories.

MEDICART. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

Medicart może być skonfigurowany na potrzeby klienta, to on określa podział wózka i liczbę dodatków.

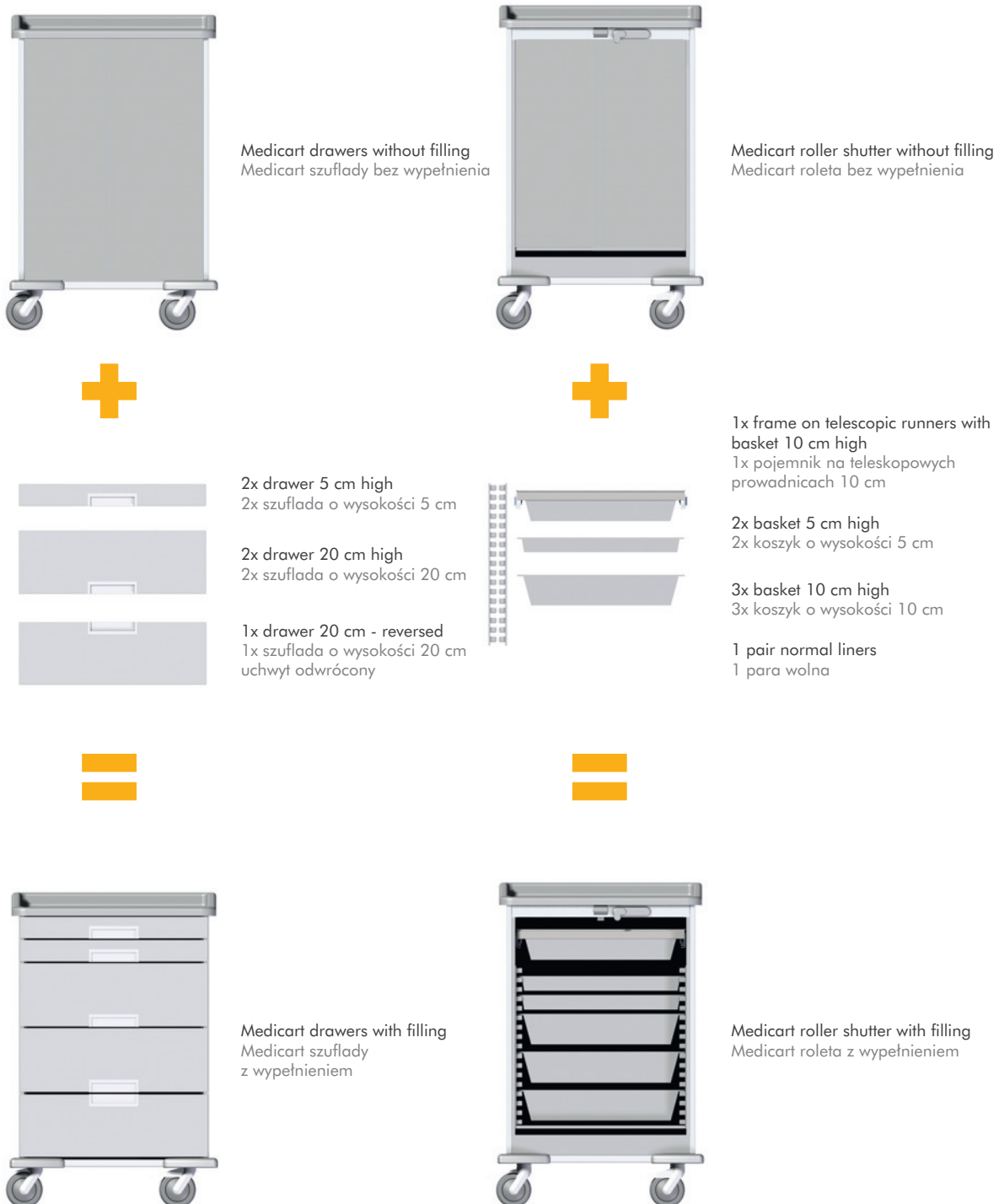

**MEDICART 1000 -
DRAWERS**

This multifunctional cart can be used in a huge range of different departments, as a medication cart, file cart, an emergency cart etc.

**MEDICART 1000 -
SZUFLADY**

Ten wielofunkcyjny wózek może być stosowane na różnych oddziałach szpitalnych.

**MEDICART 1000. DRAWERS**

The Medicart with drawers has several drawers with specific heights: 5cm, 10cm and 20cm are available. It is also possible to provide specific drawers for trays of medication pots. A pull-out PC drawer can be fitted to the side of the cart.

The number of drawers is decided by the customer. The drawers in a Medicart can be locked using an electronic or key-operated lock, which is situated at the back of the cart. The electronic lock can be easily operated using a digital card or teardrop.

The Medicart configuration can be extended to include a number of accessories. You can find more information about this in the Medicart - accessories section (p. 12). The drawers can also include the baskets and trays in our modular system, a pull-out work surface or trays for medication pots.

MEDICART 1000. SZUFLADY

Medicart jest dostępny z szufladami o określonych wysokościach 5, 10 i 20 cm. To jest ważne aby szuflady były przystosowane do przewożenia tac z medykamentami. Szuflada na komputer PC umieszczona jest z boku wózka.

Liczba szuflad zależy od zamówienia klienta. Szuflady mogą być zamykane na klucz jak i na zamek elektroniczny umieszczony z boku wózka. Zamek elektroniczny jest otwierany za pomocą karty chipowej.

Konfiguracja wózka Medicart może być rozszerzona o wiele dodatkowych akcesoriów. Patrz Medicart – akcesoria (p.12). Szuflady mogą zawierać kosze, tace etc. naszego systemu.



MEDICART 1000 WITH 1 DRAWER OF 5 CM, 3 DRAWERS OF 10 CM AND 1 DRAWER OF 20 CM
 MEDICART 1000 1 SZUFLADA 5 CM, 3 SZUFLADY 10 CM, 1 SZUFLADA 20 CM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19008 00020	715 x 565 x 960 mm	910 mm



MEDICART 1000 WITH 1 DRAWER OF 5 CM, 4 DRAWERS OF 10 CM AND 1 DRAWER OF 20 CM
 MEDICART 1000 1 SZUFLADA 5 CM, 4 SZUFLADY 10 CM, 1 SZUFLADA 20 CM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19008 00010	715 x 565 x 1090 mm	1040 mm



MEDICART 1000 WITH 3 DRAWERS OF 10 CM AND 2 DRAWERS OF 20 CM
 MEDICART 1000 3 SZUFLADY 10 CM, 2 SZUFLADY 20 CM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19008 00004	715 x 565 x 1105 mm	1055 mm



MEDICART 1000 WITH 1 DRAWER OF 5 CM AND 6 DRAWERS OF 10 CM
 MEDICART 1000 1 SZUFLADA 5 CM, 6 SZUFLAD 10 CM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19008 00009	715 x 565 x 1120 mm	1070 mm



MEDICART 1000 WITH 5 DRAWERS OF 10 CM AND 1 DRAWER OF 20 CM
 MEDICART 1000 5 SZUFLAD 10 CM, 1 SZUFLADA 20 CM

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19008 00008	715 x 565 x 1140 mm	1090 mm