

**UFLEX 3**

*This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse, etc.*

**UFLEX 3**

*Ten wszechstronny modułowy system magazynowania, może być używany dla magazynowania koszy, sterylnych instrumentów, leków etc. w takich działach jak oddziały, gabinety, apteki, bloki operacyjne etc.*

**UFLEX 3. OPTIMAL USE OF SPACE**

The UFlex 3 modular storage system is a combined system for Euronorm baskets and containers (600x400mm), DIN baskets (600x300mm) and trays. The rack is composed of 2000mm high stands. Each rack comprises two stands that are connected to each other by a set of four spacers (= 1 set). The stands are fitted with adjustable plastic feet. The frame is made of anodised aluminium.

The distance between the rails can be determined by the customer at 68mm intervals. A standard column features 13 pairs of rails. The loading capacity is 600kg per stand, 25 kg per location with nylon rails and 25 kg per location with Tourne-click rails.

Racks with the same depth (D- or W-type) offer endless combinations. It is possible to join several columns, e.g. a column for baskets combined with a column for trays.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is synonym for quality, flexibility and a long life.

**UFLEX 3. OPTIMALNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI**

Modułowy system UFLEX-3 jest zintegrowanym systemem dla koszy normy EURO i pojemników (600 x 400mm), koszy normy DIN (600x300mm) i tac. Regał składa się ze stelaży o wysokości 2000mm. Każdy regał zawiera dwa boki, które są połączone jeden do drugiego przez zestaw czterech łączników dystansowych (= 1 zestaw). Regały są wyposażone w plastikowe stopki. Rama jest wykonana z anodowanego aluminium. Odległość między szynami może być wybierana przez klienta w 68mm odstępach. Standardowe wyposażenie regału w 13 par szyn nośnych. Ładowność jednego regału 600kg, 15kg na półkę przy szynach z tworzywa sztucznego typu nylonu i 25 kg przy szynach Turne-click.

Półki z tą samą głębokością (D albo W-typ) oferują nie kończącą się kombinację. Jest możliwe łączenie kilku regałów, na przykład regał dla koszy połączonych z regałem dla tac.

UFLEX-3 nadaje się do działów centralna sterylizacja, bloków operacyjny, apteka, magazyn i dużo innych działów.



UFLEX-3 to synonim jakości, elastyczności i długiego użytkowania.

**UFLEX 3. BUILDING YOUR OWN UFLEX 3 RACK**


With the UFlex 3 modular system, you can easily design and build racks according to your personal needs. Racks with the same depth can be combined endlessly.

**UFLEX 3. ZBUDUJ SWÓJ WŁASNY SYSTEM PÓLEK UFLEX 3**

Z modułowym systemem UFLEX 3 ty możesz zbudować regały stosowane dla twoich osobistych potrzeb. Regały z tą samą głębokością mogą być łączone w dowolne długości.

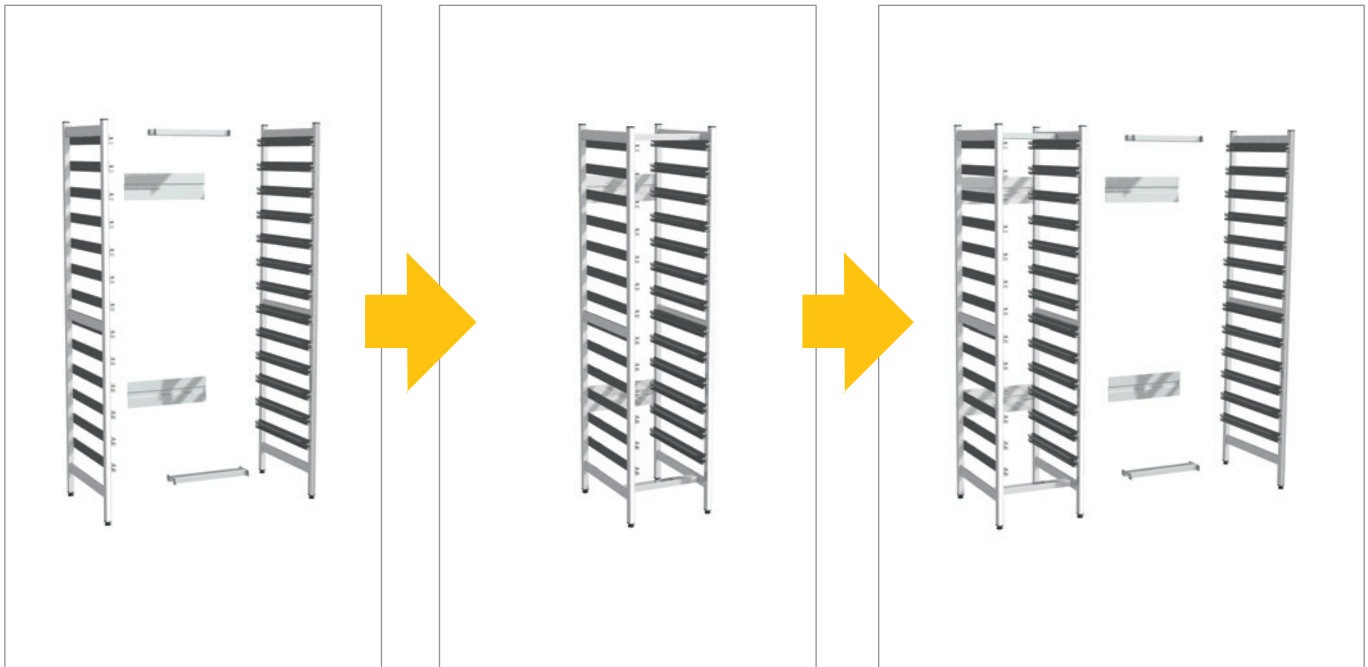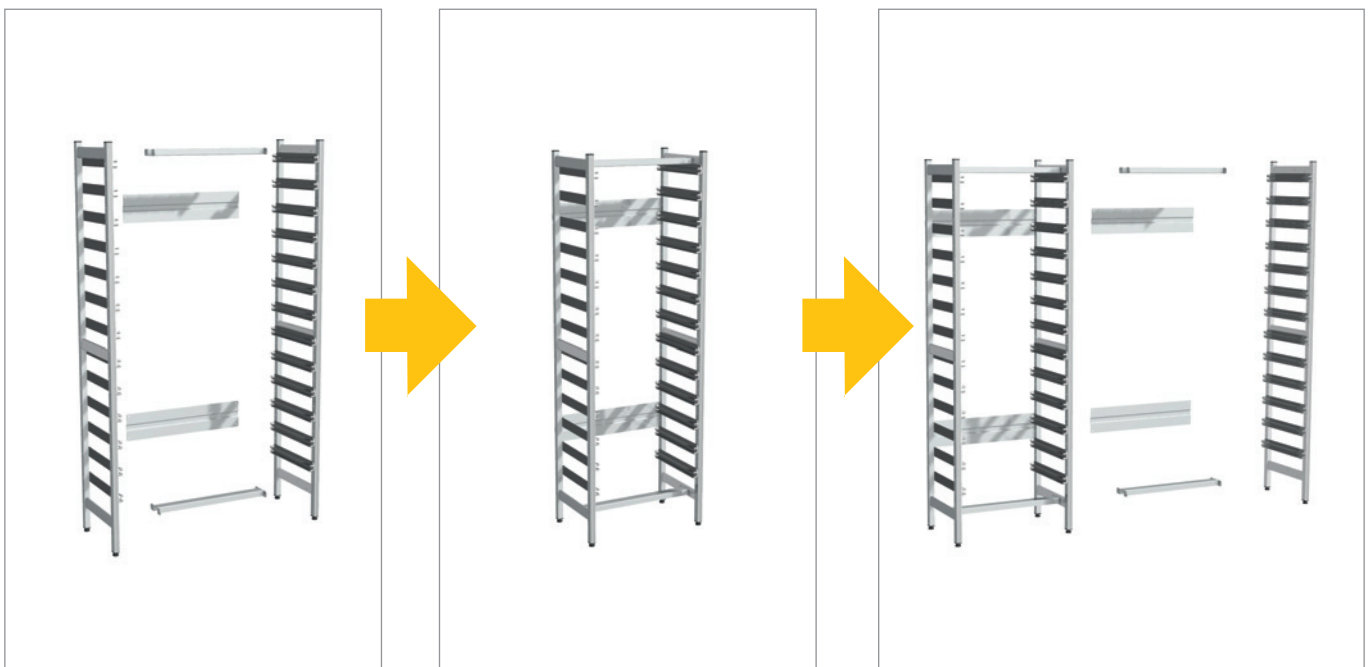**D-TYP. 600 x 400 MM****W-TYP. 400 x 600 MM**

**DIN.** 300 x 600 MM

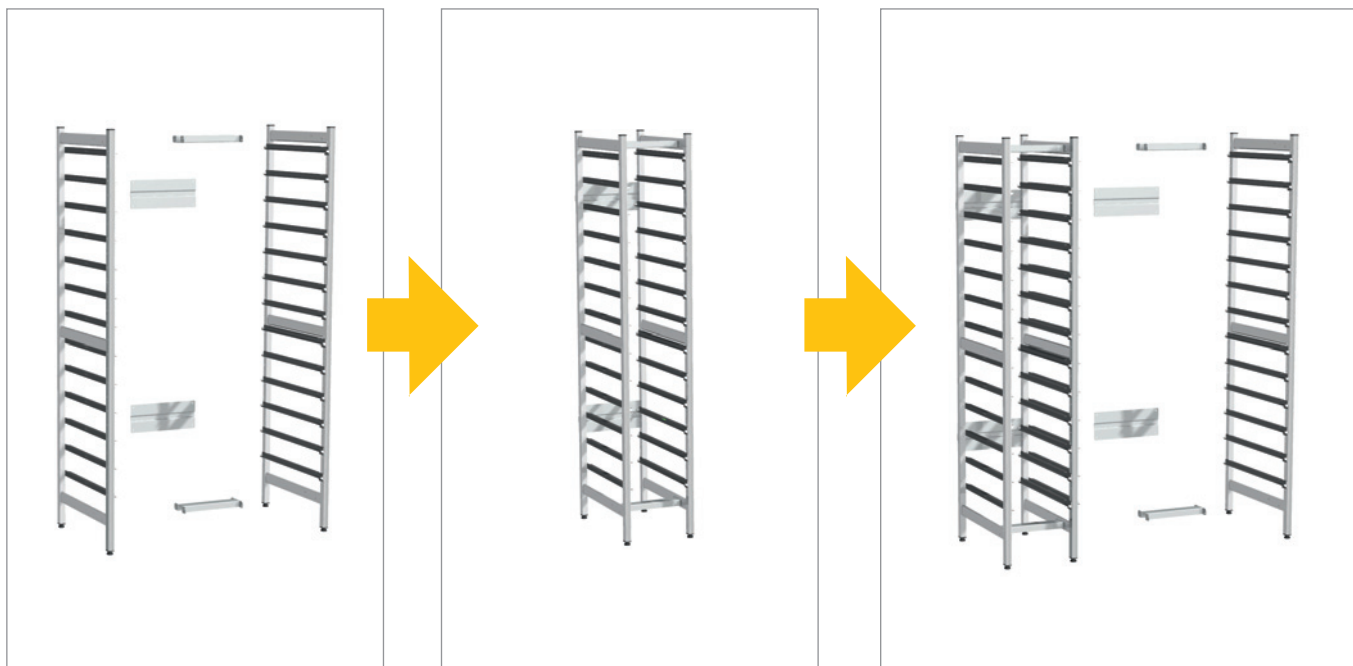


**SHELF.** 600 x 900 MM - 400 x 900 MM



**NEW.** TOURNE-CLICK RAILS



**NOWOŚĆ.** SZYNA NOŚNA TOURNE-CLICK

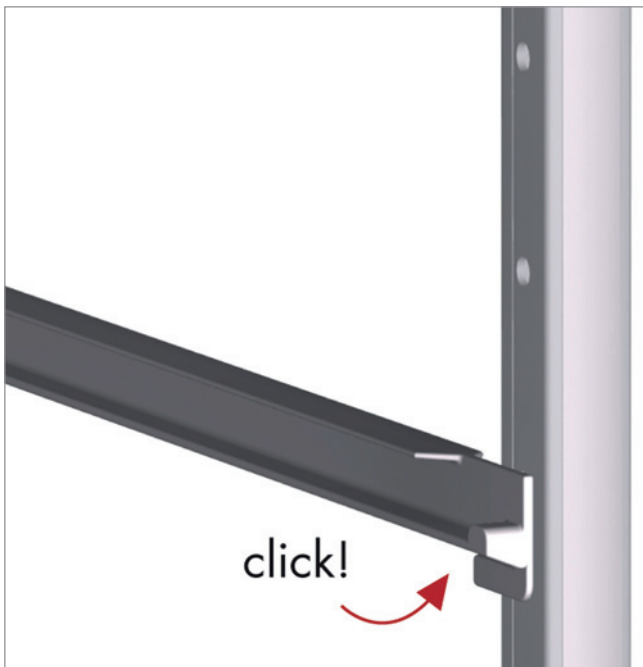






**UFLEX 3. POSSIBLE COMPLETION FOR ALL DEPARTMENTS**

**UFLEX 3. MOŻLIWE WYPOSAŻENIE DLA WSZYSTKICH DZIAŁÓW**

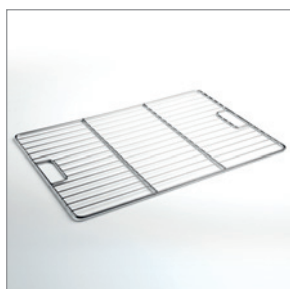

**Stainless steel wire shelves**  
Stalowa nierdzewna półka



**Fine mesh trays**  
Zamykany kosz o drobnym  
splocie



**PC baskets**  
Kosz PC



**ABS baskets**  
Kosze ABS



**Stainless steel wire baskets**  
Kosze z drutu ze stali nierdzewnej




**Stainless steel instrument baskets**  
Kosze na instrumenty ze stali nierdzewnej - sito



### POSTS REGAŁY

Article Number Numer artykułu	Dimensions	Wymiary	Description Opis
16008 00007	Depth 400 mm	Głębokość 400 mm	W-type
16008 00006	Depth 600 mm	Głębokość 600 mm	D-type

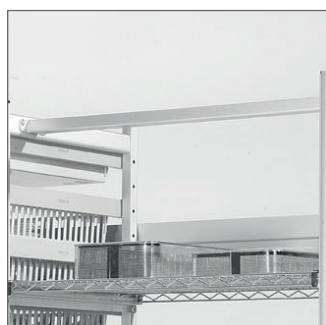

### SPACERS (SET OF 4) ŁĄCZNIKI DYSTANSOWE (ZESTAW 4 SZTUKI)

Article Number Numer artykułu	Dimensions	Wymiary	Description Opis
16008 00003	Width 300 mm	Długość 300 mm	DIN-type
16008 00001	Width 400 mm	Długość 400 mm	D-type
16008 00002	Width 600 mm	Długość 600 mm	W-type
16008 00004	Width 900 mm	Długość 900 mm	Shelf



### NYLON RAILS NYLON

Article Number Numer artykułu	Dimensions	Wymiary	Description Opis
14005 00004	Depth 400 mm	Głębokość 400 mm	W-type
14005 00006	Diagonal 400 mm	Przekątna 400 mm	
14005 00003	Depth 600 mm	Głębokość 600 mm	D-type
14005 00005	Diagonal 600 mm	Przekątna 600 mm	



### TOURNE-CLICK RAILS DIN SZYNA TOURNE-CLICK DIN

Article Number Numer artykułu	Dimensions	Wymiary	Description Opis
16008 00013	Depth 600 mm	Głębokość 600 mm	DIN-type



### TOURNE-CLICK RAILS EURO SZYNA TOURNE-CLICK EURO

Article Number Numer artykułu	Dimensions	Wymiary	Description Opis
16008 00021	Depth 600 mm	Głębokość 600 mm	D-type
16008 00022	Depth 400 mm	Głębokość 400 mm	W-type



### ALUMINIUM SHELF PÓŁKA ALUMINIOWA

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
16006 00002	900 x 400 mm	W-type
16006 00001	900 x 600 mm	D-type



### STAINLESS STEEL SHELF PÓŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
16007 00002	900 x 400 mm	W-type
16007 00001	900 x 600 mm	D-type



### CHROME-PLATED STEEL WIRE SHELVES PÓŁKA Z DRUTU STALOWEGO CHROMOWANA

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
16002 00003	900 x 400 mm	W-type
16002 00002	900 x 600 mm	D-type



### LABEL HOLDER FOR UFLEX 3 POSTS RAMKA NA ETYKIETĘ DLA SYSTEMU UFLEX 3

Article Number Numer artykułu
16008 00029



### WHEELS FOR UFLEX 3 POSTS KÓŁKA DLA SYSTEMU UFLEX 3

Article Number Numer artykułu	Description Opis
16008 00032	Ø 50 mm



### CAP FOR UNUSED POSITIONS ZAŚLEPKA OTWORÓW

Article Number Numer artykułu
99010 00020



### TELESCOPIC RAILS WITH FRAME TELESKOPOWE SZYNY Z RAMKĄ

Article Number Numer artykułu	Description Opis
16002 00008	Telescopic runners with frame for UFlex 3 60 wide - 40 deep - W-type Teleskopowe szyny z ramką do systemu UFLEX 3, 60 szeroka - 40 głęboka - W-Typ
16002 00009	Telescopic runners with frame for UFlex 3 40 wide - 60 deep - D-type Teleskopowe szyny z ramką do systemu UFLEX 3, 60 szeroka - 40 głęboka - D-Typ



### FRAME FOR CATHETER HOLDERS RAMA DO KOSZY CEWNIKOWYCH

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
16002 00001	600 x 400 x 20 mm	Frame for catheter holders Rama do koszy cewnikowych
30004 00001	135 x 530 x 85 mm	Catheter holder with adjustable feet Kosz cewnikowy z regulowanymi nóżkami



### ROOF PANEL FOR UFLEX 3 GÓRNA POKRYWA DO UFLEX 3

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
16008 00024	400 x 600 mm	D-type
16008 00025	600 x 400 mm	W-type
16008 00026	300 x 600 mm	DIN-type
16008 00027	900 x 600 mm	Shelf D-type
16008 00028	900 x 400 mm	Shelf W-type