

BALONY DO USUWANIA KAMIENI Z DRÓG ŻÓŁCIOWYCH


Jeden baloon, trzy średnice.

Trójkanałowe balony rozszerzające są kolejnym produktem z gamy wysokiej jakości produktów firmy MICRO-TECH.

Zostały stworzone do niezawodnego usuwania małych kamieni oraz osadu z dróg żółciowych.


Stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera oraz **dwa markery x-ray** ułatwiają umieszczenie balonu we właściwej pozycji.

Cylindryczny balon został wykonany z **wysokiej jakości lateksu** i może być rozszerzony do **trzech różnych średnic**. Zestaw zawiera trzy specjalnie skalibrowane strzykawki do napełnienia balonu do trzech przypisanych rozmiarów. Po napełnieniu, powierzchnia balonu przylega płasko względem ścianek dróg żółciowych, umożliwiając skuteczne i łatwe oczyszczenie dróg żółciowych pacjenta. Zestaw posiada 3 kanały : dla przewodnika 0.036 cala, dla kontrastu oraz do napełniania balonu. Zastosowanie dodatkowych kanałów dla przewodnika i kontrastu dodatkowo ułatwia wykonanie zabiegu.

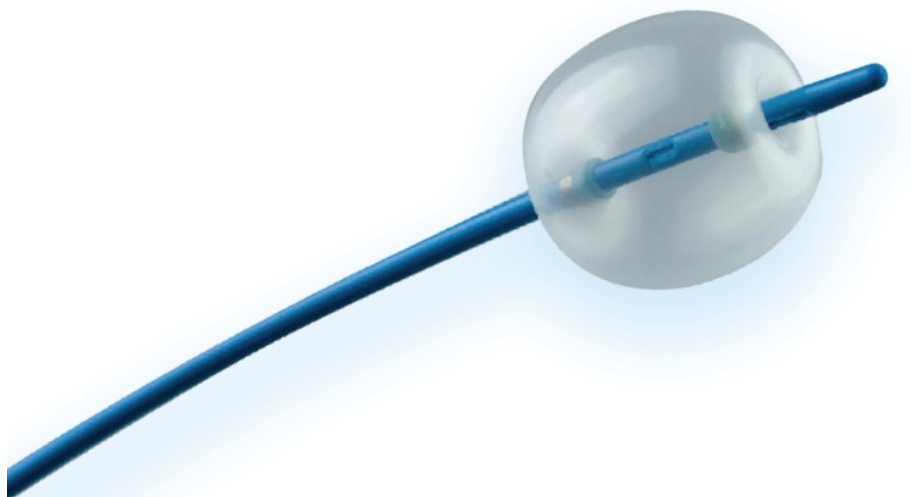

Specyfikacja

- Balony 3 stopniowe
- Jedna skalibrowana końcówka dla średnicy
- Wykonane z lateksu wysokiej jakości
- 3 osobne kanały dla napełniania, przewodnika oraz kontrastu
- Bardzo dobra widzialność w promieniach RTG

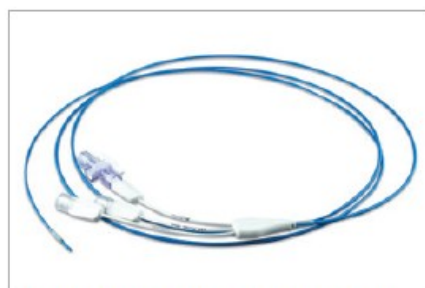

3-kanałowy balon do usuwania kamieni z dróg żółciowych firmy MICRO-TECH





REF	Lumens	Ø Catheter Fr.	Ø Balloon mm	Working length mm	Price/pc.	Order size	Amount
Stone Extraction Balloons							
SRB-T-9/12/15-20	3	7	9 / 12 / 15	2,000			
SRB-T-12/15/18-20	3	7	12 / 15 / 18	2,000			
SRB-T-15/18/21-20	3	7	15 / 18 / 21	2,000			