


Stent segmentowy

Nowa definicja elastyczności.

Stent przelykowy o konstrukcji segmentowej zapewnia maksymalną elastyczność i zdolność do adaptacji podczas procedury stentowania zwężeń. W przeciwieństwie do konwencjonalnych stentów jednoczęściowych, stent segmentowy składa się z kilku modułów, które są niezależnie ruchome. Umożliwia to doskonale dostosowanie stentu zarówno do anatomii i perystaltyki i zapewnia maksymalną stabilność w danej pozycji.

Wszystkie segmentowe stenty są w pełni pokryte i wyposażone w dwie nici ekstrakcyjne dla łatwego repozycjonowania i usuwania stentów.

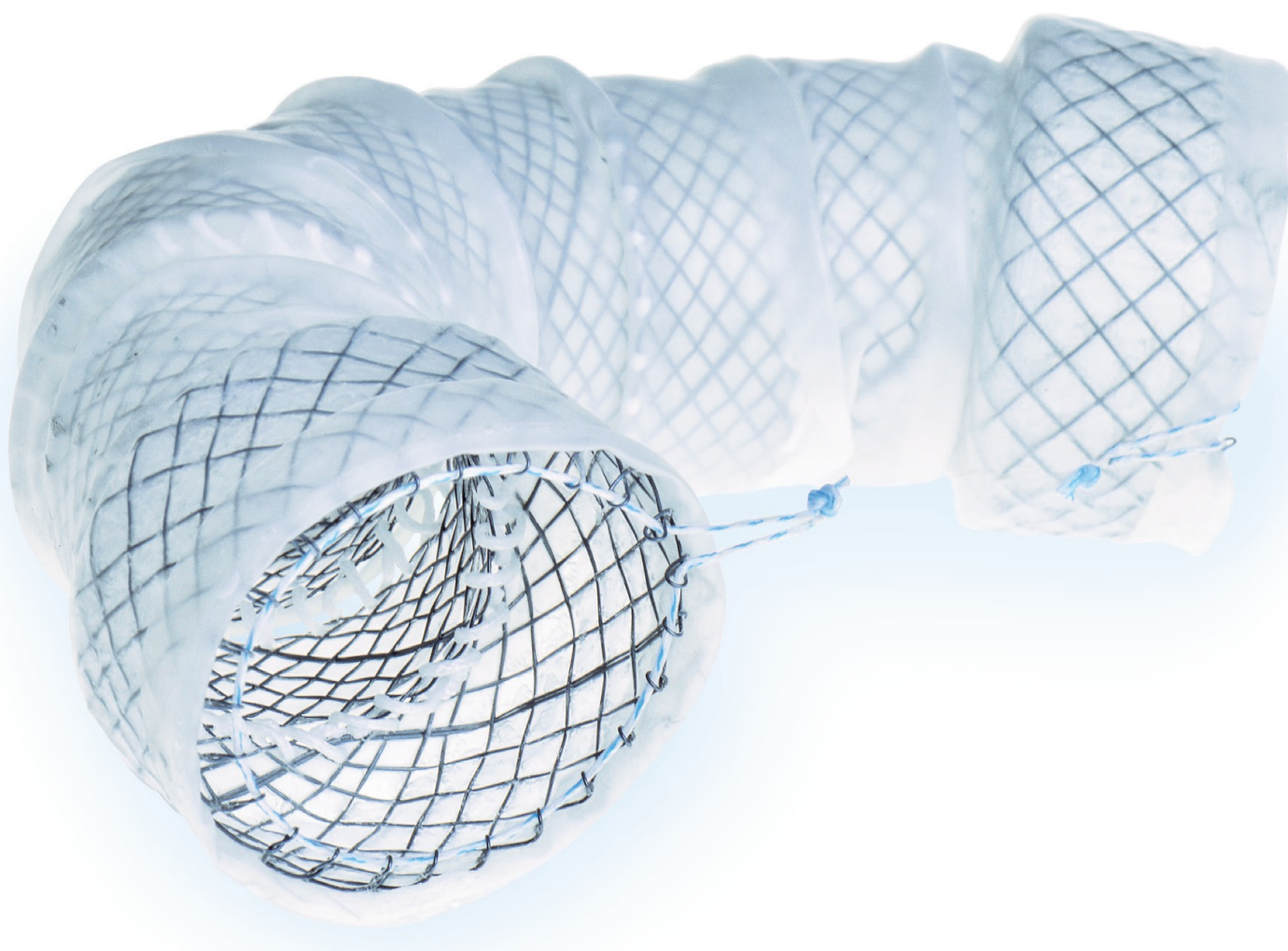

Specyfikacja

- Segmentowa konstrukcja stentu
- Samorozprężalny materiał nitinolowy
- Wysoki poziom siły rozprężania oraz zachowania pozycji
- Wytrzymałe i elastyczne pokrycie
- Kompatybilny z przewodnikiem do 0,035"





REF	Ø mm	Length mm	Specification	Price/pc.	Order size	Amount
Segmented stent						
ST71-224-18.060	18	60	with covering, double-cup			
ST71-224-18.080	18	80	with covering, double-cup			
ST71-224-18.100	18	100	with covering, double-cup			
ST71-224-18.120	18	120	with covering, double-cup			
ST71-224-18.140	18	140	with covering, double-cup			
ST71-224-22.060	22	60	with covering, double-cup			
ST71-224-22.080	22	80	with covering, double-cup			
ST71-224-22.100	22	100	with covering, double-cup			
ST71-224-22.120	22	120	with covering, double-cup			
ST71-224-22.140	22	140	with covering, double-cup			