

# Nino Intensive

08878

Stabilne łóżeczko z 4 opuszczanymi panelami bocznymi, co gwarantuje optymalną dostępność.

## Rama

- Rama wykonana z okrągłych stalowych rur.
- Wyposażona w 4 zintegrowane uchwyty na stelaż kropłówkowy z pokrętkami regulacyjnymi.
- Rama łóżeczka spoczywa na 4 specjalnych kółkach Ø 100 mm z hamulcami.

## Typy platform materaca

- 1. Stała platforma materaca: składa się z metalowej ramy i płaszczyzny z laminatu o grubości 6 mm.
- 2. Odchylana platforma materaca: składa się z metalowej ramy i zdejmowanej płyty platformy materaca z perforowanej stali. Odchylenie platformy materaca jest możliwe w zakresie do  $\pm 12^\circ$  przy pomocy regulacji teleskopowej.
- 3. Odchylana platforma materaca z 2 sekcjami: składa się z metalowej ramy z 2 zdejmowanymi płytami platformy materaca z perforowanej stali. Podglówek odchylany do  $\pm 70^\circ$ . Obie sekcje platformy materaca są wyposażone w elastyczny uchwyt, którym można regulować tylko zewnętrzną część łóżka.

## Oslony boczne


- Rama wykonana z okrągłych stalowych rur.
- Odległość między rurami wynosi maksymalnie 60 mm.
- Panele boczne można ustawić w 3 różnych pozycjach: niskiej, środkowej (33,5 cm) i wysokiej.
- Obniżane panele boczne osuwają się na 2 chromowanych stalowych prowadnicach.
- Panele można odblokować tylko dwoma rękami.

Łóżeczka są wytwarzane zgodnie z normą europejską EN 716 i są zgodne z dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG.



## Wymiary

- Typ 55 x 110 cm:  
a x b: 61 x 121,5 cm  
zalecane wymiary materaca: 55 x 110 x 8 cm
- Typ 70 x 157 cm:  
a x b: 80 x 167 cm  
zalecane wymiary materaca: 70 x 157 x 8 cm

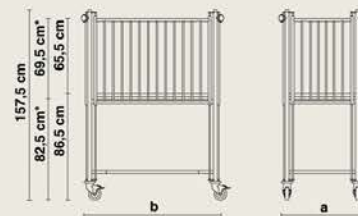

\*wymiary dla platform o mocowanym materacu

## Materiały i wykończenie

- Metal: stal, pokrycie epoksydowe lub chrom.
- Syntetyczne.
- Możliwość stosowania większości środków czyszczących.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystanych materiałów i konstrukcji: znajdują się w naszej dokumentacji technicznej.

## Opcje

- Odchylana platforma materaca.
- Odchylana platforma materaca z 2 sekcjami.
- Materac ogniotwały i odporny na mocz.
- Stelaż pod kropłówkę.
- Uchwyt na podwójną butlę z tlenem.
- Półka/półka pod monitor.
- Bliźniacze koła Ø 100 mm.

## Kolory

Dysponujemy szeroką gamą kolorystyczną.  
Karty próbek i same próbki dostępne na życzenie.

## Akcesoria

Zapoznaj się z naszą listą akcesoriów.

