

Łóżko Olympia II

08950

Łóżka szpitalne Olympia łączą w sobie prostotę, elegancję i funkcjonalność.

08950 | Olympia Hospital II

Ochronność elektryczna klasy II

Łóżko jest standardowo wyposażone w podwójnie izolowany sterownik bez uziemienia, złącze ekwipotencjalne, mechanizm szybkiego uwalniania i baterię.

Wózek

- Stabilna regulacja wysokości przy pomocy systemu wsporników.
- Regulacja pozycji Trendelenburga (*) i odwróconej pozycji Trendelenburga do $\pm 17^\circ$.
- Indywidualnie hamujące kółka $\varnothing 125$ mm.
- Zintegrowane kółka S $\varnothing 125$ mm lub $\varnothing 150$ mm na precyzyjnych łożyskach kulkowych, blokowanych centralnie (*).
- Pedał aktywujący mechanizm hamulca centralnego (*).
- Otwarty wózek poprawia dostępność do przestrzeni pod łóżkiem i ułatwia sprzątanie.

Platforma materaca

- Platforma materaca z 3 lub 4 (*) sekcjami.
- Oparcie pleców regulowane elektrycznie do $\pm 70^\circ$ z autoregresją.
- Podparcie kolan regulowane elektrycznie do $\pm 34^\circ$ (w przypadku 4 sekcji).
- Część podpierająca nogi i stopy można regulować ręcznie.
- Elektryczna manipulacja sekcji platformy materaca wyposażona w zacisk bezpieczeństwa.
- Platforma materaca z zaokrąglonymi profilami.
- Standardowe wyposażenie z wycięciami na pasy ograniczające ruchy pacjenta.
- Podparcie pleców i stóp wyposażone w 2 zintegrowane uchwyty materaca.
- Łóżko standardowo wyposażone w teleskopowe rozszerzenie do + 20 cm.
- 4 narożniki łóżka zabezpieczono zderzakami.
- 4 narożniki łóżka wyposażono w uchwyty, w których można zamocować stojak na kroplówkę lub podnośnik.
- Wybór spośród 3 rodzajów paneli laminowanych.
- Oba boki wyposażono w 3 syntetyczne uchwyty na akcesoria.

Manipulacja elektryczna

- Funkcje elektryczne można uruchamiać przy pomocy przełącznika ręcznego, ministerownika pielęgniarstwa (*) lub sterownika pielęgniarstwa (*)
- Przełącznik ręczny zawiera wstępnie zaprogramowaną funkcję spania.
- Mini sterownik pielęgniarstwa (*) lub sterownik pielęgniarstwa (*) umożliwia selektywne wyłączenie kilku funkcji.
- Blokada kontroli (*) jednym klawiszem wyłącza sterowanie przycisków ręcznych .

Typy paneli

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (*)
- Senzo (*)

Oslony boczne

- Atmosphere (*)
- Duo-Safe (*)
- Trix (tylko z panelem Jaro) (*)

Akcesoria

Zapoznaj się z naszą listą akcesoriów.




(*) Opcja



Wymiary i dane techniczne

- Szerokość: 100 cm, Długość: 212 cm
- Regulacja wysokości platformy materaca¹: ± 38 cm - $\pm 78,5$ cm
- Wysokość przejazdu¹: L: 170 mm, P: 135 mm
- Bezpieczne obciążenie robocze: 230 kg
- Waga (z opcjami): 125 kg
- Wymiary platformy materaca: 204 x 86 cm
- Wymiary materaca: 195 x 85 cm

¹ W modelu standardowym.

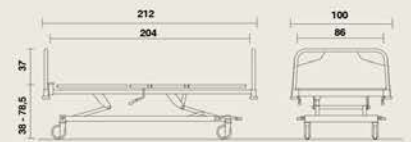

Materiały i wykończenie

- Metal.
- Laminat.
- wykończony żywicą epoksydową w kolorze białego aluminium lub chromu RAL 9006.
- Zawiasy wyposażone w łożyska samosmarujące (=brak konieczności konserwacji).
- Możliwość stosowania większości środków czyszczących.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystanych materiałów i konstrukcji: znajdują się w naszej dokumentacji technicznej.

Disponujemy szeroką gamą kolorystyczną.

Opcje

- 4-częściowa platforma materaca.
- Zdejmowane części platformy syntetycznego materaca.
- Zdejmowane laminowane części platformy o grubości 6 mm.
- Możliwe wydłużenie od strony stóp do +20 cm.
- Typy paneli: Lauro, Jaro lub Senzo.
- Oslony boczne.
- Blokada sterowania (ACL) i sterownik pielęgniarstwa (również w wersji mini) + uchwyt.
- Podświetlany przełącznik ręczny.
- Nocna lampka pod łóżkiem.
- Bateria z sygnałem alarmowym.
- Pozycje Trendelenburga.
- Manualny mechanizm szybkiego zwalniania blokady oparcia.
- Pedał wysoko/nisko.
- Wybór różnych typów kółek, 5. kółka. + hamulca centralnego.

