

SS201

zgrzewarka rotacyjna z drukarką

opis produktu

Zgrzewarka rotacyjna z drukarką SS201 przeznaczona jest do pracy w oddziałach szpitalnych i gabinetach prywatnych. Zgrzewa zarówno opakowania papierowo-foliowe jak i TYVEK wszystkich typów.

Urządzenie posiada elektroniczny wyświetlacz LCD temperatury zgrzewania (temp. zgrzewu 50-250°C), podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki oraz automatyczne włączanie i wyłączenie napędu dzięki zastosowaniu optycznego sensora ruchu. Zgrzewarka SS201 posiada obudowę ze stali nierdzewnej szlifowanej AISI 304, co gwarantuje wysoką jakość użytkowania.

dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 585 x 260 x 210 mm, waga 17.5 kg.

Moc: 230V, 50/60 Hz jednofazowa

100V, 50/60 Hz jednofazowa

Max absorpcja: 600 W


Prędkość podawania: 10 m/min

Temp. zgrzewania: max. 250°C, tolerancja +/- 1°C

Siła zgrzewania: 100 N

Odległość zgrzewania od krawędzi: 5-30 mm

Szerokość zgrzewu: 14 mm

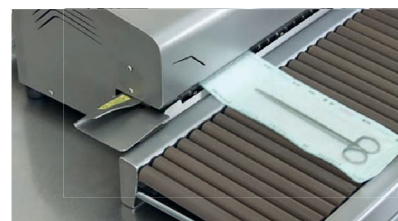

normy

EN 60204- 1:2006
EN 614-1:2006+A1:2009
ISO 121100:2010
DIN 58953-7:2008

numer katalogowy

SS201

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu