



# ONLY ONE

Neo-Tee®

*First and Only  
Disposable Infant  
T-Piece Resuscitator*

**Resuscytator Neo-Tee T-Piece**

Nowy, wbudowany w obwód kontroler pozwala lekarzowi na zmianę ciśnienia w drogach oddechowych



**Mercury Medical®**

**50**  
YEARS

Your Need . . . Our Innovation®

**Ponieważ dzieci to nie  
"mali dorośli"**



**AKSIS**




Przedstawiamy lepszy sposób prowadzenia wentylacji dodatnim ciśnieniem u noworodków przy użyciu dogodnego, niezawodnego i czytelnego wskaźnika ciśnienia.

Resuscytator Neo-Tee posiada kontrolę przepływu i ograniczenie ciśnienia. Oferuje możliwość ustawienia docelowego szczytowego ciśnienia wdechowego (PIP) oraz dodatniego ciśnienia końcowo wydechowego (PEEP).

Resuscytator Neo-Tee jest urządzeniem całkowicie jednorazowym (do użytku przez jednego pacjenta) i nie wymaga stosowania dodatkowego wyposażenia.

### Oryginalny Neo-Tee

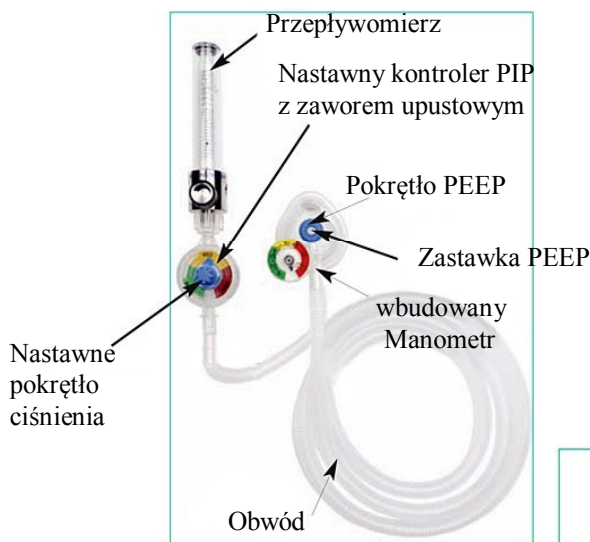

Niewątpliwie jako pierwszy na rynku Resuscytator Neo-Tee jest jedynym jednorazowym urządzeniem posiadającym wbudowany kontroler dla dogodnego odczytu dostarczanego ciśnienia.

### Nowy Neo-Tee



Uniwersalne okrągłe złącze tlenu D.I.S.S.



Nowy resuscytator noworodkowy Neo-Tee z wbudowanym manometrem (0-40cm H<sub>2</sub>O) i zaworem upustowym